

機械器具74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

パックテイルEDボトル

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、投与口、ボトルからなる。

<構造図>

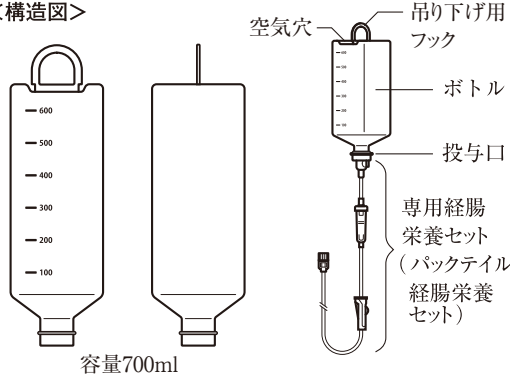

2. 原材料

投与口	ポリエチレン
ボトル	
吊り下げ用フック	ポリエチレン、シリコン

【使用目的又は効果】

専用経腸栄養セットと連結して経腸栄養剤等(食品を含む)を投与する器具であって、1回限りの使用で使い捨てるものである。

【使用方法等】

- 汚染に十分注意しながら包装を開封し、本品を取り出します。
- 経腸栄養剤等(食品を含む)を開封します。
- 吊り下げ用フックを閉じた(空気穴を閉じた)状態で、経腸栄養剤等(食品を含む)を本品に移し替えます。
- 本品の投与口に専用経腸栄養セット(パックテイル経腸栄養セット)を取り付け、投与口の緩みや外れが生じないようにしっかりと締めます。
※その際専用経腸栄養セット(パックテイル経腸栄養セット)のクレンメを閉じた状態で接続してください。
- 本品をガートルスタンド等に吊り下げた後、専用経腸栄養セット(パックテイル経腸栄養セット)の使用 방법에従い、経腸栄養剤等(食品を含む)を投与します。
- 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 本品の使用前には手洗い等を行い、清潔な状態で使用してください。
- 栄養カテーテル等が詰まっていないこと、正しい位置にあることを確認してから接続してください。
- 個包装を開封する際は、はさみ等の刃物を使用しないこと。
[本品を傷つけ、使用時に液漏れが生じる恐れがあります。]
- 経腸栄養剤等(食品等を含む)は開封後すぐに使用してください。
- 本品は自然落下式であり、加圧できません。
- 本品を使用する際に横に倒さないこと。また、投与中に本品を強く握る等、負荷をかけないこと。
[栄養剤が漏れる恐れがあります。]
- 本品に経腸栄養剤等(食品等を含む)を充填した状態での長時間の保管及び投与の中断は避けてください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれ強度が低下することから取り扱いには注意すること。
[破損する恐れがある。]
- 本品を60℃以上の温度にさらさないこと。
- 容器の目盛りは目安として使用すること。

<不具合・有害事象>

- その他の不具合
液漏れ、過量投与、破損、緩み、詰まり、包装が破損、汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 有効期間
3年(自己認証による)
包装の使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売(お問い合わせ先)
ニュートリー株式会社
電話番号:0120-219-038

製造(輸入先)
ジョンウ イエンジ
大韓民国