

整形外科用角度計

【禁忌・禁止】

- 1) 本品は滅菌できません。ご注意ください。
- 2) 本品を曲げたり、切削する等の二次的加工(改造)することは、破損の原因となるので、絶対に行わないで下さい。
- 3) 本器を清掃する際には、必ず中性洗剤をご使用下さい。強酸性、又は強アルカリ性の洗剤は、本製品を腐蝕させるおそれがあるので、絶対に避けて下さい。


【形状、構造及び原理等】

1. 材質:

アルミニウム合金、ステンレス鋼、アクリル樹脂

2. 形状又は構造

カタログNo. 600 整形外科用角度計

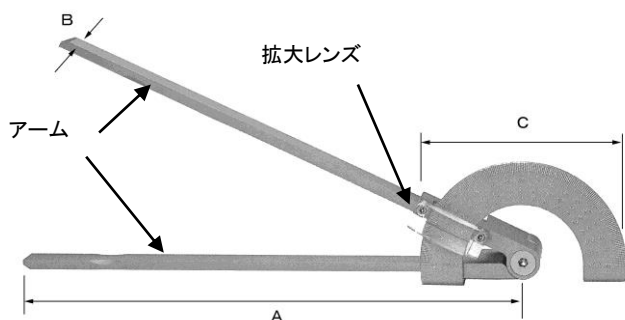

3. 原理

本品は、分度器に2本のアームを取り付けた器具である。

単位:mm

A	B	C
300	15	120

【使用目的又は効果】

本品は、患者の四肢関節の角度及び可動域を計測するために用いる。

【使用方法等】

アームを静かに開閉し、拡大レンズの赤い線上の目盛を読む。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 熱により部品が損傷しますので、オートクレーブ等滅菌装置に入れしないで下さい。
- 2) 拡大レンズはプラスチック製のため、誤って傷をつけないよう取扱いにご注意下さい。
- 3) アームを開閉させる際、手指等をはさまないようにご注意ください。

2. 不具合・有害事象

本器の使用により、以下のような不具合・有害事象がおこる可能性があります。

- 1) 頻回使用によるアームのがたつき、目盛のズレ。
- 2) 目盛板のゆがみ等による開閉機構の不具合。

【保管方法及び有効期限等】

保管にあたっては、目盛板や拡大レンズの破損を防ぐため、他の鋼製器械に触れないように注意して下さい。

【保守点検に係る事項】

- 1) 本器は、定期的に清拭を行って下さい。清拭に用いる洗剤は、適切な濃度で使用して下さい。
- 2) 本体各部を点検し、キズ、腐蝕がないか、拡大レンズが割れていないか点検して下さい。また、アームを静かに開閉し、がたつきなどの異常がないかを点検して下さい。異常がみられる場合は、使用せず、直ちに修理に出して下さい。
- 3) 強アルカリ性、または強酸性の洗剤や消毒剤は、器具を腐蝕させるおそれがあるので、絶対に使用を避けて下さい。中性洗剤の使用を推奨します。また、金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、清掃の際には使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 根本商会