

機械器具(30) 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用ステープルリムーバ JMDN コード: 16787002

プレミアムリムーバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用・再滅菌禁止。


＜適用対象(患者)＞

1. 本品の成分に対する感作又はアレルギー反応を示す可能性のある患者への適用禁止〔ニッケル・クロムを含むため〕。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

- (1) 形状、構造

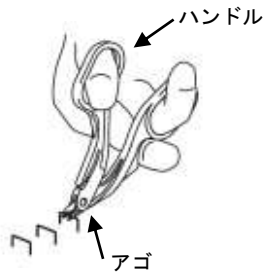

- (2) 原材料

アゴ: ステンレス鋼

2. 原理

本品の下アゴをスキンステープルの下に滑り込ませ、ハンドルが完全に閉じるまで握る。2 本の下アゴの間に上アゴが入り込み、スキンステープルが変形し開く。本品を上方に引き上げると、スキンステープルが抜去される。

【使用目的又は効果】

本品は、スキンステープルを抜去するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品の下アゴをスキンステープルの下に滑り込ませる。
2. ハンドルが完全に閉じるまで握り込み、スキンステープルを開く。
3. 本品を上方に引き上げ、スキンステープルを抜去する。抜去したスキンステープルを廃棄してから次のスキンステープルを抜去する。

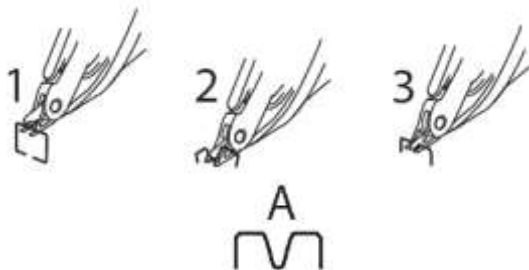


図 A: 抜去後のステープル形状例

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) ハンドルを完全に握りこむまで、スキンステープルを引き上げないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用に際し、以下のような有害事象が考えられる。

- (1) ニッケル・クロムにアレルギーのある患者に使用した場合のアレルギー反応〔本品のアゴにニッケル・クロムを含むため〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温(15℃～30℃)で清潔な場所に保管すること。一時的に室温を超える場合であっても、54℃を超えないこと。

AS-B4SKIN03(02)

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

コヴィディエンジャパン株式会社

カスタマーサポートセンター: 0120-998-971

Covidien

(コヴィディエン)

アメリカ合衆国