

** 器06 呼吸補助器
** 管理医療機器 呼吸同調式レギュレータセット 70580000

Q 酸 (Y型 YG型)

警 告

- ・使用にあたっては医師の処方及び指示に従うこと。
- ・近くに火気がない事を確認すること。
- ・改造したり分解したり絶対しないこと。故障の場合は販売店に連絡すること。
- ・本機器の修理は、トレーニングを受けた修理業者だけが行うこと。
- ・清潔な環境で保管のこと。



火気厳禁



禁煙



分解禁止

** 【品目仕様等】


- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1 種 類 | 呼吸補助器 |
| 2 使 用 ガ ス | 医療用酸素 |
| 3 ボ ン ベ | ヨークバルブ付きボンベ |
| 4 ボンベ充填圧力 | 19.6MPa 以下 |
| 5 設 定 圧 力 | 0.21MPa 以下 |
| 6 重 量 | Yタイプ : 340g
YGタイプ : 412g |
| 7 流 量 範 囲 | |

流 量 設 定 目 盛 (NL/min)										
0.0	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0

** 【操作方法又は使用方法等】

1. 取付け方法

- 容器弁の上から本器を挿入する。
- ピンを所定の位置に挿入し、取付けハンドルをねじ込んで固定させる。
注) ピンが入らない時は、異ガスの為、容器をチェックする。
- チューブを取付ける。
注) チューブが始めからついている場合は必要ない。

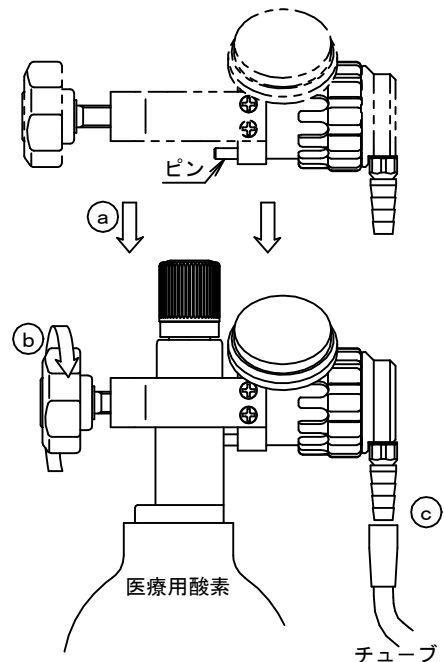

2. 使用方法

- * a. 切替えハンドルを回し、処方の流量値のところに合わせる。
注) 「カチッ」という位置が、適切なハンドル位置です。
- * b. 容器弁の開閉ハンドルをゆっくり開ける。
- * c. これで設定流量のガスがでます。
- * d. 使用後は、容器弁の開閉ハンドルを回し閉じる。
- * e. 本器内の酸素を放出してから、本器の切替えハンドルを「0.0」にする。

** 禁忌・禁止


MR室への持ち込みは、その対応品ではないため厳禁。

** 禁忌・禁止

ガス漏れを発見した場合は、その個所に指などを近づけないこと。


** 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

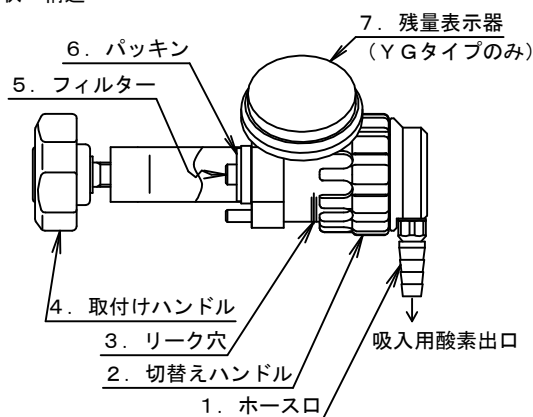

2. 原理

- ・ 高圧酸素ガスを減圧し、低圧酸素にする。
- ・ 各種サイズのオリフィスを選択し、流量調整する。
- ・ 処方流量の酸素ガスが放出される。

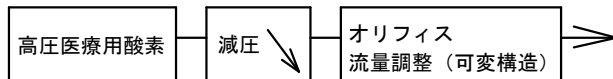

** 【性能、使用目的、効能又は効果】

1 使用目的

酸素療法を必要とする患者に対し、処方量の酸素ガスを患者に提供する。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

* 【使用上の注意】

1. 保管時の注意
 - a. 直射日光の当たらない常温のところに保管すること。
 - b. ぶつけたり、落としたりしないこと。
 - c. 清潔な環境に保管すること。
2. 使用時の注意
 - a. 取付けの際は、取付けハンドルを回ししっかりねじ込むこと。
 - * b. 取り外しの際は、容器弁の開閉ハンドルを閉にした後に本器の切替えハンドルを「O. O」以外の所にして本器内の酸素を放出すること。
 - c. 直射日光が当たらないようにすること。
 - d. 火気は近づけないこと。

** 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光、高温、結露が生じるような環境、塩分、油脂類、ほこり、雨、水などをさけて保管すること。
2. 耐用期間

5年間。

** 【取扱い上の注意】

1. ぶつけたり、落としたりしないこと。
- * 2. 転倒等で、損傷が見られた時は、速やかに取扱い販売店に連絡し、点検を受けること。
3. 周辺では、火気を使用しないこと。引火性、発火性の物を置かないこと。



火気厳禁



禁煙

** 【保守・点検に係る事項】

- a. 日常点検を原則として、一日一回使用時に行なうこと。
- b. 使用頻度によるが、六ヶ月を目処に定期点検を行うこと。

<日常点検>

- * 取付けハンドル及びホース口のチューブが緩んでないか。
中途半端な取付けハンドルのねじ込み・チューブの取付け状態で使用されると、正確な流量がでない可能性があると共に、ガスを無駄に消費してしまう。
- ・異常に汚れてはいないか。
汚れた時の清掃は乾拭き程度にし、家庭用洗剤等は使用しないこと。

<定期点検>

- ・使用環境、保管環境のチェック
- ・傷、変形等はないか
- ・異臭、異音、変色等はないか
- * 切替えハンドルの操作性は良いか
- ・正常にガスが出ているか

** 【包装】

1台／1箱

** 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

株式会社 ネ リ キ 神戸工場
〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2丁目7番6号
TEL (078) 992-1251 (代)
FAX (078) 992-1243

取扱い説明書を必ずご参照下さい。
