

* 器06 呼吸補助器
 * 管理医療機器 呼吸同調式レギュレータセット 70580000
 フロージェントルプラストリオ

1

**

警告

- ・近くに火気がないことを確認してから使用のこと。
(酸素は燃焼を促進)
- ・改造したり分解したり絶対しないこと。
- ・清潔な環境に保管すること



火気厳禁




禁煙



分解禁止

警告

酸素ポンベを持ち運ぶときは、元栓の部分を持たないこと。

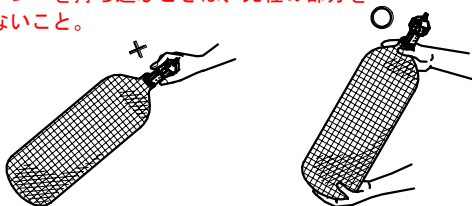

警告

酸素ポンベを落としたり、倒したり
乱暴な取扱をしないこと。





禁忌・禁止

MR室への持ち込みは、その対応品ではないため厳禁。

禁忌・禁止

ガス漏れを発見した場合は、その個所に指などを近づけないこと。

[形状・構造及び原理等]

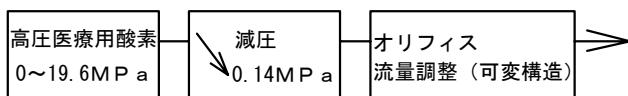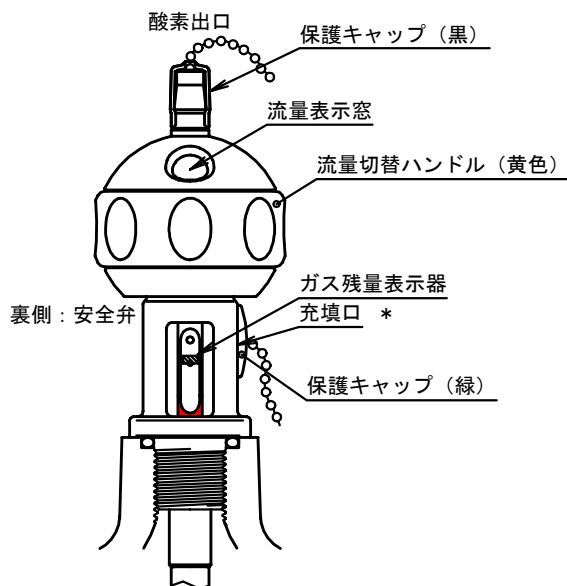

** [性能、使用目的、効能又は効果]

1 使用目的

酸素療法を必要とする患者に対し、処方量の酸素ガスを患者に提供する。

** [品目仕様等]

1 類別名称	呼吸補助器
2 使用ガス	医療用酸素
3 名称	フロージェントルプラストリオ
4 用途	酸素微流量調整弁 (容器弁一体型)
5 耐圧	32.7 MPa
6 容器充填圧力	19.6 MPa
7 耐圧試験圧力	32.7 MPa
8 気密試験圧力	19.6 MPa
9 安全弁作動圧力	22.3 ~ 26.1 MPa
10 可溶合金	100 ~ 110 °C
11 減圧圧力	0.14 MPa
12 流量設定目盛り	

流 量 設 定 目 盛											(NL/min)
閉	0.25	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10

- 13 流量精度 2.0 MPa ~ 16.7 MPa において
 ・「0.25」「0.5」 --- 表示の±15%
 ・その他 --- 表示の±10%
- 14 重量 430 g
- 15 その他 流量調整弁、容器弁と一体
 容器内ガス残量を示す残量表示器付き

** [操作方法又は使用方法]

1. 操作方法

- ガス残量表示器によってガスが入っていることを確認する。
- 流量切替ハンドルを廻し、医師の処方量に設定する。
- 使用しないときは、流量切替ハンドルを廻し「閉」に設定する。

2. 使用方法

- 製品上部の酸素出口のキャップを外して、所定のチューブをホース口にしっかり差し込む。
- 流量切替ハンドルを廻し、流量表示窓にあらわれる値を医師の処方量に合わせる。
- 小池メディカル製呼吸同調器「酸歩2」に接続して使用する場合は、流量を10 L/min に設定 (表示値「10」)。
- 使用しないときは、流量切替ハンドルを廻し「閉」に設定し、保護キャップをかぶせる。

** [使用上の注意]

- 医師の処方に従い流量を設定すること。
- 添付のチューブは上部にあるホース口の奥まで差し込むこと。
- 流量切替ハンドルは、「カチ」と音がするところで留めること。
- 安全弁、充填口はさわらないこと。



分解禁止


- 上部にある酸素出口以外からガスが漏れている場合は無理に止めようとせず、そのままガスを抜き取扱い販売店に連絡すること。



火気厳禁

取扱説明書を必ず参照ください

6. ガス残量表示器付き。下図のようにガス残量をしめす。
印が赤線にかかれば新しい容器に取り替えること。

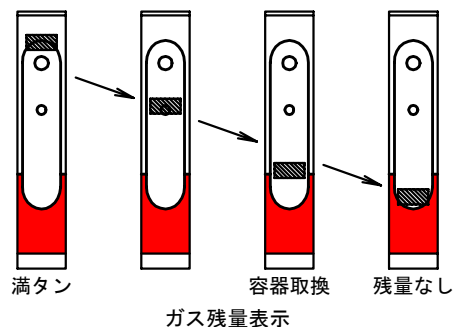

**** [貯蔵・保管方法及び使用期間等]**

1. 貯蔵・保管方法

- すえつけられている保護キャップをすること。
- 流量切替ハンドルを廻し「閉」に設定すること。
- 直射日光、高温、結露が生じるような環境、塩分、油脂類、ほこり、雨、水などをさけて保管すること。

2. 耐用期間

5年間。

**** [取扱い上の注意]**

- ぶつけたり、落としたりしないこと。
- 転倒等で、痛みが見られた時は、取扱い販売店に連絡すること。
- 周辺では、火気を使用しないこと。引火性、発火性の物を置かないこと。



火気厳禁



禁煙

**** [保守・点検に係る事項]**

- 日常点検を原則として、一日一回使用時に行なうこと。
- 使用頻度によるが、六ヶ月を目処に定期点検を行うこと。

<日常点検>

- チューブがしっかりさされているか。
中途半端な差込みで使用されると、正確な流量がでない可能性があると共に、ガスが無駄に消費してしまう。
- 異常に汚れてはいないか。
汚れた時の清掃は乾拭き程度にし、家庭用洗剤等は使用しないこと。

<定期点検>

- 使用環境、保管環境のチェック
- 傷、変形等はないか
- 異臭、異音、変色等はないか
- ダイヤルの操作性は良いか
- 正常にガスが出ているか

**** [包装]**

1台／1箱

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等]

**** 株式会社 ネリキ 神戸工場**
〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2丁目7番6号
TEL (078) 992-1251 (代)
FAX (078) 992-1243

取扱説明書を必ず参照ください