

器具器械第6号 呼吸補助器
流量設定器 OCV-5

【警告】

- ・使用にあたっては医師の処方及び指示に従うこと。
- ・近くに火気がない事を確認してから使用すること。
- ・清潔な環境で保管し、油脂分を付着させないこと。
- ・分解や改造は絶対しないこと。
- 故障の場合は販売店に連絡すること。
- ・本器の分解・修理は、修理技術者のみが行うこと。



火気厳禁




禁煙



分解禁止

【形状・構造等】

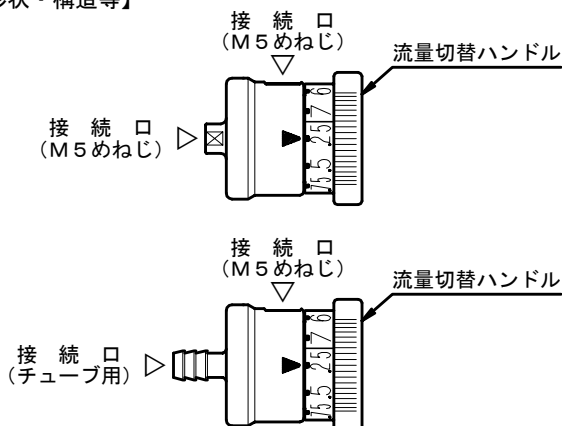

【性能、使用目的、効能又は効果】


- 1 種類 呼吸補助器
- 2 販売名 流量設定器 OCV-5
- 3 用途 酸素療法
- 4 使用ガス 医療用酸素
- 5 使用圧力 0.14MPa (基準)
- 6 ガス供給元 減圧弁付き容器バルブ (GY-27型)
- 7 流量設定目盛

流量設定目盛 (L/分)											
.25	.5	.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7

- 8 流量精度
 - ・ [0.25] [0.5] [0.75] — 目盛の±0.1 L/分
 - ・ その他 — 目盛の±10%
- 9 質量 約60g

【操作方法又は使用方法等 (用途・用量含む)】

- 1 取付け方法
 - a 減圧弁付き容器バルブの低圧酸素出口に接続されたチューブ等を本器のどちら一方の接続口に接続する。
 - b もう一方の接続口にカニューラ又は呼吸器用同調器入口へのチューブを接続する。
- 2 使用方法
 - a 減圧弁付き容器バルブの元栓をゆっくりと開ける。
 - b 本器の流量切替ハンドルを回し、処方の流量目盛に合わせる。
(注) 「カチッ」と音がしたことを確認してください。
 - c 使用後は、容器弁の開閉ハンドルを閉じる。

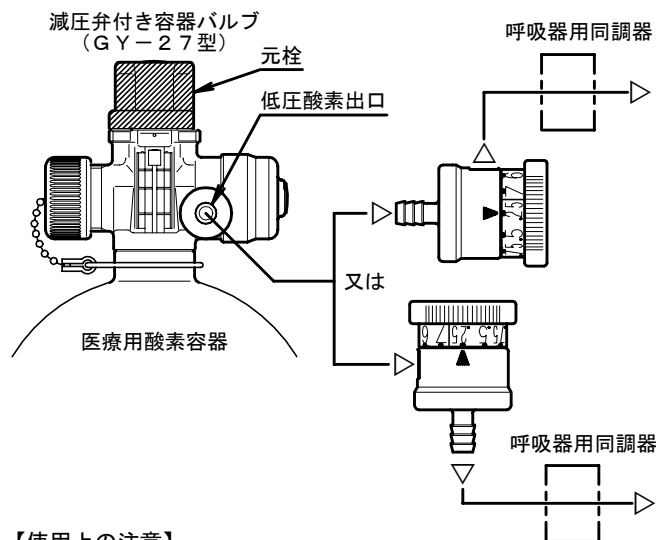

【使用上の注意】

- 1 保管時の注意
 - a 湿気の少ない涼しい場所で、直射日光を避けること。
 - b 高温になるところで保管しないこと。
 - c ぶついたり、落としたりしないこと。
 - d 清潔な環境で保管すること。
- 2 使用時の注意
 - a 湿気の少ない涼しい場所で、直射日光を避けること。
-10~+40℃の環境で使用すること。
 - b 周辺では、火気を使用しないこと。引火性、発火性の物を置かないこと。
 - c ぶついたり、落としたりしないこと。
 - d 石油、油脂類を付着させないこと。

【作動・動作原理】

オリフィスによる流量選択方式

- ・ 処方流量の目盛に合わすと、その流量に応じたオリフィスを切替え選択できる。

【保守・点検に係わる事項】

- a 日常点検は一日一回使用時に行うこと。
 - b 定期点検は六ヶ月に一度行うこと。
- <日常点検>
- ・ 接続部がしっかりとつながっているか。漏れはないか。
 - ・ 流量切替えが正常にできるか。
 - ・ 石油、油脂類の付着、異常な汚れはないか。

<定期点検>

- ・ 使用環境、保管環境が異常でないか。
- ・ 異常な傷、変形はないか。
- ・ 異臭、変色、汚れはないか。石油、油脂類の付着はないか。
- ・ 流量切替ハンドルの回転は良好か。異音はないか。
- ・ 酸素は正常に流れるか。

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 ネリキ

* 神戸工場：〒651-2241

兵庫県神戸市西区室谷2丁目7番6号

TEL (078) 992-1251 (代)

FAX (078) 992-1243