

添付文書

2018 年 3 月 22 日（新様式第 7 版）

届出番号：13B2X10183000001

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ（70259000）

再使用禁止


販売名：ディスポーザブル エアウェイ

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・当社指定の併用医療機器以外には使用しないこと。
- ・本品は、改造はしないこと。
- ・滅菌は行わないこと。
- ・消毒用アルコール等で拭かないこと。

【形状、構造及び原理】

1. 外観図

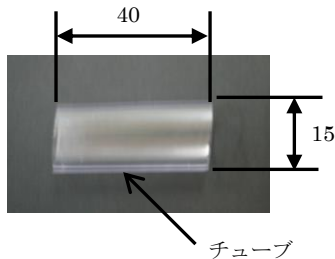

＜組成＞

ポリ塩化ビニル

2. 作動原理

本品は、装置（販売名：呼気COモニター BC-711M）の給気部に接続して、呼気を装置に排出するチューブである。

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

本品は、短期的使用を目的として、装置（販売名：呼気COモニター BC-711M）の給気部に接続し、口に咥えて呼気を装置に排出するために使用する。

【品目仕様等】

1. 仕様

- 長さ：40mm
- 外形：φ15mm
- 内径：φ12mm

【操作方法又は使用方法等】

併用機器

本品と組み合わせて使用する装置を以下に示す。

構成品の 一般的名称	販売名	承認番号	取得者
一酸化炭素ガス 分析装置	呼気COモニター BC-711M	22000BZX00575000	自社

1. 使用前の準備

- (1) 本品に損傷等がないことを確認する。

2. 使用方法

- (1) 本品を装置（販売名：呼気COモニター BC-711M）の給気部に接続する。

- (2) 装置の指示に従い、本品を口に咥えて、約15秒間を目安に息を吹き続ける。
- (3) 本品は、吹き終わったら口から離し、装置の給気部から取り外してください。

3. 使用後の処置

- (1) 取り外した本品は、破棄してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品は、再使用しないこと。
- ・消毒用アルコール等で拭かないこと。
- ・本品は当社指定の併用機器以外には使用しないこと。
- ・滅菌は行わないこと。

2. 取扱い上の注意

- ・使用前は、水またはぬるま湯で清掃すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) ほこり・塩分・イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。

2. 使用環境

- 周囲温度範囲： 10～40℃
- 相対湿度範囲： 30～75%（但し結露のないこと）
- 気圧： 700 hPa～1,060 hPa

3. 保管条件

- 周囲温度範囲： 0～50℃
- 相対湿度範囲： 10～95%（但し結露のないこと）
- 気圧： 700 hPa～1,060 hPa

【保守・点検に関わる事項】

1. 保守点検は次点に注意すること。

- (1) チューブに傷や変質がないか必ず点検すること。

【包装】

100個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 株式会社 ネモト・センサエンジニアリング
住 所： 東京都杉並区高井戸東 4-10-9
電 話 番 号： 03-3333-2760

製 造 業 者： 株式会社 ネモト・センサエンジニアリング
住 所： 茨城県牛久市ひたち野西 4-2-1