


機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 再使用可能なニードルリキャップ器 37461000

ペンニードル® リムーバー III

【形状・構造及び原理等】

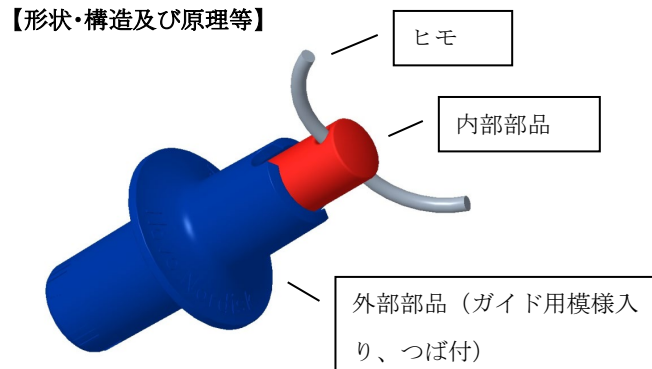

材質:
外部部品及び内部部品:ABS 樹脂
ヒモ:ポリプロピレン

【使用目的】

使用者が容易に針に蓋ができ、針刺し事故を防止する。
本品は再使用可能である。

【使用方法】

1. 安全のため、つばより後部の内部部品側を持つ。
2. 本品をペン型注入器に取り付けた注射針にかぶせる。ペンニードル® プラスに使用する場合、本品のガイド用模様をペンニードル® プラスの模様に合わせて。
3. 本品ごと回して注射針を取り外した後、本品の内部部品を押し、注射針を安全な廃棄容器中に廃棄する。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

1. 本品はペンニードル®(認証番号第 218AABZX00038000 号)及びペンニードル® プラス(認証番号第 227AABZX00122000 号)以外には使用しないこと。
2. 血液が付着した本品は使用しないこと[感染の原因となる可能性がある]。
3. 取り付け時につばより前を持たないこと[針刺しが生じる可能性がある]。
4. 注射針を押し出すときに本品先端部を触らないこと[針刺しが生じる可能性がある]。

【使用上の注意】

本品は注意深く取り扱い、落としたり衝撃を与えたりしないこと[故障の原因となる]。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.保管方法

- (1) 通常、小児の手の届かない場所に保管すること。
- (2) 注射針を外して保管すること[針刺しが生じる可能性がある]。
- (3) 次のような場所での保管を避けること[故障の原因や品質に影響を及ぼすことがある]。
 - 1) ほこりやゴミが付着しやすい場所
 - 2) 汚れやすい場所
 - 3) 水のかかりやすい場所
 - 4) 直射日光の当たる場所
 - 5) 極端に高温または低温になる場所

【保守・点検に係る事項】

- (1) 汚れは、中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭き取ること。
- (2) ほこりやゴミは、やわらかいブラシで払った後、やわらかい布で軽く拭くこと。
- (3) 油をさしたり、液体(消毒用アルコール等)に浸したりしないこと[故障の原因や品質に影響を及ぼすことがある]。

【包装】

1本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1
製造国:デンマーク
外国製造所:Novo Nordisk A/S ノボ ノルディスク A/S

問い合わせ先
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ノボケア相談室
Tel 0120-180363(フリーダイヤル)

ペンニードル®は Novo Nordisk A/S の登録商標です。