

医療用品 04 整形用品
歯科用インプラントアバットメント 70910000
高度管理医療機器

レストアー アバットメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用しないこと。[感染予防のため]
 - ・再滅菌しないこと。[品質の低下や汚染の可能性があるため]
 - ・他社製品との併用をしないこと。
 - ・チタンアレルギーのある患者。
- 以下の患者には使用しないこと。
- ・口腔又は口腔周辺に悪性若しくは悪性と疑われる腫瘍のある者。
 - ・本品による術部に放射線治療を行っている者。
 - ・口腔粘膜に疾病(白板症、扁平苔癬、真菌増殖症、口内炎、歯肉炎等)のある者。

【形状・構造及び原理等】

本品は、各種アバットメント、スクリュー及びその他の付属品から構成され、以下の種類がある。

1. ヒーリングアバットメント

名称	SD ヒーリングアバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.2	2.0	6.0
4.2	4.0	8.0
4.2	6.0	10.0
4.2	8.0	12.0
5.5	2.0	6.0
5.5	4.0	8.0
5.5	6.0	10.0
5.5	8.0	12.0
7.0	2.0	6.0
7.0	4.0	8.0
7.0	6.0	10.0
7.0	8.0	12.0



単位: mm

名称	ヒーリングアバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
5.0	2.0	6.0
5.0	4.0	8.0
5.0	6.0	10.0
5.0	8.0	12.0
6.0	2.0	6.0
6.0	4.0	8.0
6.0	6.0	10.0
6.0	8.0	12.0
7.5	2.0	6.0
7.5	4.0	8.0
7.5	6.0	10.0
7.5	8.0	12.0



名称	WD ヒーリングアバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
6.0	2.0	6.0
6.0	4.0	8.0



2. アバットメント

1) SD COC アバットメント

名称	SD COC アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
5.0	2.0	8.0
5.0	4.0	10.0



名称	SD COC 15° アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
5.0	2.0	10.0
5.0	4.0	12.0



名称	SD アバットメント スクリュー (チタン合金製)	
最大外径	全長	
5.0	10.0	



名称	SD アバットメント スクリュー (金合金製)	
最大外径	全長	
5.0	12.0	



2) SD O-リング アバットメント

名称	SD O-リング アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
5.0	2.0	6.0
5.0	4.0	8.0
5.0	6.0	10.0



3) グラボナ アバットメント

名称	グラボナ アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.0	2.0	6.0
4.0	4.0	8.0



4) O-リング アバットメント

名称	O-リング アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.0	2.0	10.0
4.0	4.0	12.0
4.0	6.0	14.0



5) スタンダード アバットメント

名称	スタンダード アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.0	2.5	6.0
4.0	3.0	8.0
4.0	4.0	10.0
4.0	5.0	8.0
4.0	7.0	10.0
4.0	9.0	8.0



名称	O-リングアバットメントスクリュー	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.0	2.5	5.0
4.0	3.0	6.0
4.0	4.0	7.0
4.0	5.0	8.0
4.0	7.0	10.0
4.0	9.0	12.0



名称	ヒーリング キャップ	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.0	2.5	5.0



6) コニカル アバットメント

名称	コニカル アバットメント	
最大外径	カブ部の長さ	全長
5.0	1.0	6.0
5.0	2.0	8.0
5.0	3.0	10.0



名称	コニカルアバットメントスクリュー	
最大外径	カブ部の長さ	全長
5.0	1.0	9.0
5.0	2.0	10.0
5.0	3.0	11.0



名称	ヒーリング キャップ	
最大外径	全長	
5.0	6.5	



7) COC アバットメント

名称	COC アバットメント ストレート	
最大外径	カブ部の長さ	全長
4.4	2.0	13.0



取扱い説明書を必ずご参照下さい。

名称	COC ロッキング アバットメント	
最大外径	カ部の長さ	全長
5.0	2.0	8.4
5.0	4.0	10.4



名称	COC 15° アバットメント	
最大外径	カ部の長さ	全長
5.0	2.0	9.5
5.0	4.0	13.5



名称	COC 25° アバットメント	
最大外径	カ部の長さ	全長
5.0	2.0	9.5
5.0	4.0	13.5



名称	ヘックス スクリュー	
最大外径	全長	
5.0	8.0	



8) WD COC アバットメント

名称最大	WD COC アバットメントカ部	
外径	カ部の長さ	全長
5.0	2.0	8.4
5.0	4.0	10.4



名称	WD COC 15° アバットメント	
最大外径	カ部の長さ	全長
5.0	2.0	9.5
5.0	4.0	11.5



名称	WD アバットメント スクリュー (チタン合金製)	
最大外径	全長	
3.0	8.7	



名称	WD アバットメント スクリュー (金合金製)	
最大外径	全長	
3.0	8.6	



9) WD コニカル アバットメント

名称	WD コニカル アバットメント	
最大外径	カ部の長さ	全長
5.0	1.0	3.0
5.0	2.0	3.8
5.0	3.0	4.7



名称	WD コニカルアバットメントスクリュー	
最大外径	全長	
3.5	9.0	
3.5	10.0	
3.5	11.0	



名称	WD コニカルアバットメントヒールリングキャップ	
最大外径	全長	
5.5	6.5	



10) UCLA テンボラリー アバットメント

名称	UCLA テンボラリー アバットメント(ヘックス用)	
最大外径	全長	
4.5	16.4	



名称	UCLA テンボラリー アバットメント	
最大外径	全長	
4.5	16.4	

3. スリーブ、スクリュー

名 称 (SD UCLA アバットメント用)	最大外径	全長
プラスチック スリーブ	3.7	16.4
プラスチック スリーブ (ヘックス用)	3.7	16.4
ゴールド スリーブ	3.0	5.0
ゴールド スリーブ	3.3	5.0
AC プラスチック スリーブ	4.2	16.4
AC プラスチック スリーブ	5.5	16.4
AC プラスチック スリーブ	7.0	16.4



プラスチック スリーブ




ゴールド スリーブ




AC プラスチック スリーブ

名 称 (UCLA アバットメント用)	最大外径	全長
ゴールド スリーブ	3.3	5.8
ゴールド スリーブ	4.0	5.8
ゴールド プラスチック スリーブ	3.3	5.8
ゴールド プラスチック スリーブ	4.0	5.8
ゴールド スクリュー	3.0	9.0
プラスチック スリーブ	4.5	16.4
プラスチック スリーブ (ヘックス用)	4.5	16.4
AC プラスチック スリーブ	5.0	16.4
AC プラスチック スリーブ	6.0	16.4
AC プラスチック スリーブ	7.5	16.4
チタニウム スクリュー	2.4	9.1

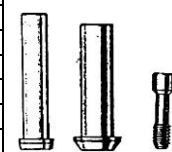

プラスチック スリーブ AC プラスチック チタニウム スクリュー

名 称 (WD UCLA アバットメント用)	最大外径	全長
プラスチック スリーブ	6.0	16.4
プラスチック スリーブ (ヘックス用)	6.0	16.4
ゴールド スリーブ	5.0	5.8

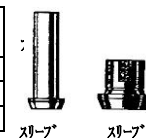

名 称 (スタンダード アバットメント用)	最大外径	全長
プラスチック スリーブ	4.5	14.1



名 称 (コニカル アバットメント用)	最大外径	全長
プラスチック スリーブ	4.8	15.8
プラスチック スリーブ (ヘックス用)	4.8	15.8



名 称	最大外径	全長
フェイスティンク スクリュー (チタン合金製)	2.3	4.6
フェイスティンク スクリュー (金合金製)	2.3	4.6



4. シリンダー

名 称 (スタンダード アバットメント用)	最大外径	全長
ゴールド シリンダー	4.0	3.3



名 称 (コニカル アバットメント用)	最大外径	全長
ゴールド シリンダー	5.0	6.6
ゴールド シリンダー	4.0	6.6



名 称 (WD コニカル アバットメント用)	最大外径	全長
ゴールド シリンダー	5.0	6.5



5. ポスト、ピン

名 称 (SD UCLA アバットメント用)	最大外径	全長
インプレッション ポスト	3.3	14.4
インプレッション ポスト (2ピース用)	3.7	11.0
ワキシング ピン	2.3	14.5
ワキシング ピン	2.3	17.5



(付属品)

インプレッション ポスト インプレッション ポスト (2ピース) ワキシング ピン

名 称 (スタンダード アバットメント用)	最大外径	全長
インプレッション ポスト	4.5	9.9
インプレッション ポスト (2ピース用)	5.2	8.3
ワキシング ピン	2.3	21.3



(付属品)

インプレッション ポスト インプレッション ポスト (2ピース) ワキシング ピン

【使用上の注意】 * **

[使用注意]

1. 本品は、一度使用したもの、血液や唾液に触れたものを再使用しないこと（再使用が可能なインスツルメント類を除く）。
2. 本品の研削作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
3. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

[重要な基本的注意]

1. 本品の使用により発疹などの症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 術者は、手技等を熟知した上で使用すること。
3. 再使用が可能なインスツルメント類は使用時に適切な滅菌又は消毒後、使用すること。
4. 本品の表面はなるべく接触しないようにすること。接触する必要がある時は、専用工具以外のものを使用しないこと。
5. 患者管理のため、製造番号をカルテに記載すること。
6. 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。 [自己認証による]

【保管方法及び有効期間等】 *

[保管方法]

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[使用期限]

ラベル／包装に記載（製造元データによる自己認証）

※（例  YYYY-XX は、使用期限 YYYY 年 XX 月を示す。）

【保守・点検に係る事項】 *

[滅菌方法]

再使用が可能なインスツルメント類は、使用前にオートクレーブ滅菌（温度 121℃、時間 20 分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】 *

製造販売業者 : 白水貿易株式会社
電 話 番 号 : 06-6396-4400
F A X 番 号 : 06-6396-4457
ホームページ : <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 国 : アメリカ合衆国
製 造 業 者 : Keystone Dental, Inc.