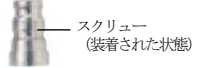


レストアー コニカルアバットメント インプレッションポスト

【形状・構造及び原理等】

【形状】

種類	外観
SD/RD ヘクス	 ロング ショート スクリュー スクリュー
WD ヘクス	
SD/RD ノンヘクス	 スクリュー (装着された状態)

【成分】

チタン合金

【原理】

本品は、コニカルアバットメントと正確に嵌合する形状を有しており、コニカルアバットメントアナログと併用することで、アバットメントの形状及び口腔内の位置を作業用模型上に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの補綴物の設計、作製などに用いる。

【使用方法等】*

〔ヘクスタイプ及びロングスクリューを使用する場合（オープントレー法）〕

1. ヒーリングアバットメントとその周辺部をアルジネートで印象採得し、カスタムトレーを作製する。
2. ロングスクリューがトレーを貫通するように、カスタムトレーに孔を開けておく。
3. ヒーリングアバットメントを口腔内のインプラントから撤去し、コニカルアバットメントをインプラントに装着する。
4. 本品をコニカルアバットメントに装着する。
5. ロングスクリューが本品を貫通した状態でアバットメントの内部スレッドに達したことを確認し、ヘクスドライバー（.048"）をロングスクリュー上端に装着する。
6. ヘクスドライバー（.048"）でロングスクリューを時計方向に回転させて締結し、本品をアバットメントに固定する。
7. カスタムトレーを歯列に被せ、ロングスクリューがトレーから出ていることを確認後、トレーを口腔内から撤去する。
8. ロングスクリューの上端をワックス等でブロックアウトする。
9. 本品の周りに印象材を塗布します。このとき、ロングスクリューの上端は印象材から露出させておく。
10. カスタムトレーを印象材で満たして歯列に被せ、顎の印象を採得する。
11. 印象材硬化後、ロングスクリューをヘクスドライバー（.048"）で緩めてアバットメントから取り外し、さらに印象材から撤去する。
12. 印象を口腔内から撤去する。（本品は、印象内に組み込まれる）
13. 印象内の本品に、アバットメントアナログを装着し、ロングスクリューで連結及び固定する。

14. 印象に石膏又はエポキシレジンを注入・築盛して、作業用模型を作製する。

〔ヘクスタイプ及びショートスクリューを使用する場合（クローズドトレー法）〕

1. ヒーリングアバットメントとその周辺部をアルジネートで印象採得し、カスタムトレーを作製する。
2. ヒーリングアバットメントを口腔内のインプラントから撤去し、コニカルアバットメントをインプラントに装着する。
3. ショートスクリューが本品を貫通した状態でアバットメントの内部スレッドに達したことを確認し、ヘクスドライバー（.048"）をショートスクリュー上端に装着する。
4. ヘクスドライバー（.048"）でショートスクリューを時計方向に回転させて締結し、本品をアバットメントに固定する。
5. ショートスクリューの上部をワックス等でブロックアウトする。
6. 本品の周りに印象材を塗布する。
7. カスタムトレーを印象で満たして歯列に被せ、印象を採得する。
8. 印象材硬化後、印象を口腔内から撤去する。（本品はアバットメントに装着された状態です）
9. ショートスクリューをブロックアウトしていたワックス等を除去し、ヘクスドライバー（.048"）でショートスクリューを緩め、ショートスクリュー及び本品を口腔内から撤去する。
10. 本品にアバットメントアナログを装着し、ヘクスドライバー（.048"）とショートスクリューでこれらを固定し、本品を再び印象内に挿入する。このとき、本品の平坦面を印象内の平坦面に合わせることで印象採得時の印象内位置に本品が正確に戻るようにする。
11. 作製した印象を技工所に送り、作業用模型の作製を指示する。

〔ノンヘクスタイプを使用する場合（クローズドトレー法）〕

1. ヒーリングアバットメントとその周辺部をアルジネートで印象採得し、カスタムトレーを作製する。
2. ヒーリングアバットメントを口腔内のインプラントから撤去し、コニカルアバットメントをインプラントに装着する。
3. 本品をアバットメントに装着し、スクリューを手指により締結する。
4. 本品の周りに印象材を塗布する。
5. カスタムトレーを印象材で満たして歯列に被せ、印象を採得する。
6. 印象材硬化後、印象を口腔内から撤去する（本品はアバットメントに装着された状態である）。
7. 本品を緩め、口腔内から撤去する。
8. 本品にコニカルアバットメントアナログを装着し、本品を印象内に挿入する。
9. 印象に石膏又はエポキシレジンを注入・築盛して、作業用模型を作製する。

【滅菌】

使用後、洗浄及び滅菌を行う。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

取扱説明書を必ずご参照ください

1. ヒーリングアパットメントの種類に対応した本品を選択すること。
2. オープントレー法で採得した印象を撤去する際には本品の印象内の位置がずれないように注意すること。
3. クローズドトレイ法で採得した印象内に本品を挿入する際にはその位置に十分注意すること。

【使用上の注意】*

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保管方法及び有効期間等】*

[使用期限]

1. 滅菌有効期限*はラベル・包装に記載（製造元データによる自己認証）
2. 滅菌有効期限までに使用すること。期限切れの場合は、使用前に洗浄・滅菌すること。

※（例  XXXX-YY は、使用期限 XXXX 年 YY 月を示す）

【保守・点検に係る事項】*

[洗浄]

1. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬し、除去する。
2. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

[滅菌]

洗浄後、器具は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌(121℃、140 kPa、20 分以上)すること。なお、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるよう設定すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電 話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.