


機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
歯科用咬合器 10201000
一般医療機器

シークエンシャルテーブル

【形状・構造及び原理等】

1. 主要部の形状と名称

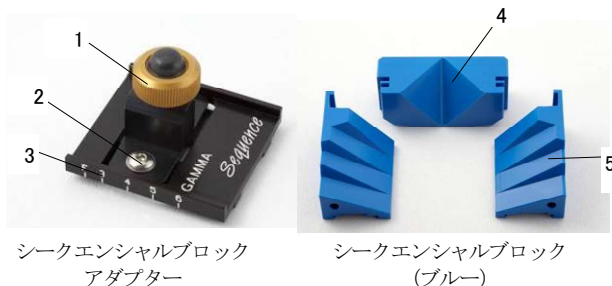

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. ピンスクリュー | 4. プロトルーシブエレメント |
| 2. スクリュー | 5. 側方エレメント |
| 3. 目盛り | |

【構成】

- ・シークエンシャルブロックアダプター
- ・シークエンシャルブロック：4 種類
(ブルー、グリーン、オレンジ、イエロー：各 3 個)
- ・付属品
スクリュードライバ
セクションテーブルプログラム収録 CD-ROM

2. 本体の寸法

寸法：

- ・シークエンシャルブロックアダプター
：幅 46×奥行き 50×高さ 6mm
- ・シークエンシャルブロック：幅 46.5×奥行き 50×高さ 20mm

3. 原理

本品を歯科用咬合器と組み合わせて使用することにより、患者毎に異なる顎関節路に合った歯牙角度を咬合器上で再現することにより、義歯作成時における空間運動による形態的な人工咬合面を形成する。

【使用目的又は効果】

下顎運動をシミュレートするように設計された歯科用咬合器と組み合わせて使用することにより、顎運動の経路に調和した歯牙角度を咬合器上で再現する。

【使用方法等】

【使用方法】

1. ガイダンスエレメントの選択


患者から測定した SCI（矢状顎路角）及びベネット角に基づいて、付属のセクションプログラムにより最適なガイダンスエレメントを選択します。

2. 咬合器からキャリアプレートを取り外します。


3. シークエンシャルブロックアダプターへのシークエンシャルブロックの装着

本品のシークエンシャルブロックアダプターに選択したシークエンシャルブロックを装着します。

- (1) 側方エレメントは、対応する側の溝に前方から挿入し、そのまま 4 の目盛りまでスライドさせます。

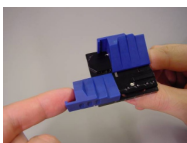


- (2) プロトルーシブエレメントは、ガイド溝と噛み合わせながらキャリアプレートへしっかりと差し込みます。

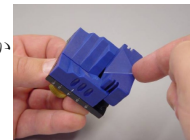


4. 咬合器への本品の装着

- (1) 咬合器のインサイザルピンを 0 位置に合わせます。

- (2) シークエンシャルブロックの位置が、シークエンシャルブロックアダプターの F の目盛りになるよう位置を合わせ、リテーナーに装着したエレメントと一緒に咬合器の上弓に装着します。この時、シークエンシャルブロックアダプターの「Gamma Sequence」という文字が前方を向くようにします。

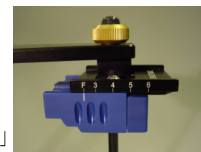

- (3) 咬合器のインサイザルピン先端がプロトルーシブエレメントのガイド溝に位置するようシークエンシャルブロックアダプターを動かかし、その位置でシークエンシャルブロックアダプターのスクリューを付属のスクリュードライバでしっかりと締めます。

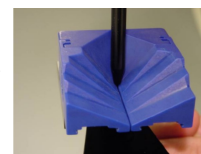

- (4) 咬合器を軽く開閉させて、シークエンシャルブロックアダプターの位置調整をチェックする。この時、インサイザルピンが溝の中央にあり、咬合器を締める時にガイド面が(3)で調整した初期位置から移動していないことを確認します。

- (5) インサイザルピンが初期位置から移動している場合は、スクリュードライバでスクリューを緩め、本品を矢状方向と側方方向で初期位置に合わせた後に、再びスクリューをしっかりと締めます。



全てのセッティング終了後、咬合器を動かす時に、インサイザルピンが本品のガイド面に沿ってスライドしていることを確認します。

5. 本品を装着した咬合器を使用します。

6. 使用後の清掃

本器を圧縮空気、又は布で拭いて清掃します。

【使用方法に関する使用上の注意】

1. 清掃、潤滑のために油類、酸、有機溶剤等を使用しないこと。本品が劣化するおそれがあります。
2. シークエンシャルブロックアダプターの溝、及びシークエンシャルブロックは特に清潔に保っておくこと。汚れたまま使用するとスムーズに動かなくなる場合があります。

【使用上の注意】*

1. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1
2. 本品は精密な製品のため、机から落下させたり強い衝撃を与えたり乱暴で無理な取扱はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

清潔で乾燥した場所に保管すること。

[耐用年数]

10 年[自己認証（製造元データによる）]

但し、これは保守点検が行われ、適切な環境で使われた場合で、使用状況により変わります。

【保守・点検に係る事項】

医療機器の使用前点検および保守管理責任は使用者側にあります。使用前には必ず取扱説明書に従い各部の点検を行い、適切にメンテナンスを行うこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	白水貿易株式会社
電話番号	06-6396-4400
FAX番号	06-6396-4457
ホームページ	https://www.hakusui-trading.co.jp
製造国	ドイツ
製造業者	GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs GmbH