

医 04 整形用品

一般医療機器 アイパッド 11661000

マイルドアイキュアー


再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

- ・粘着テープ：ポリエステル不織布
アクリル系粘着剤
- ・パッド：ポリエチレンネット状フィルム両面
付脱脂綿
- ・本品は、単回使用です。
- ・本品はエチレンオキシドガス滅菌を行った製品です。

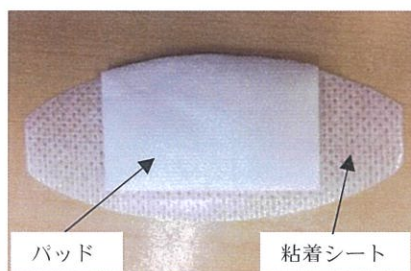

＜構造＞

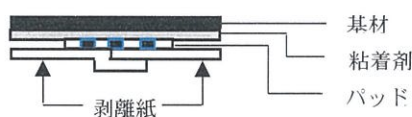

＜原理＞

本品は、ガーゼ又は綿等の様々な材料で製造されたパッドとそれを固定する用途の粘着テープからなる器具で、眼の保護又は分泌物の吸引に用いる。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、ガーゼ又は綿等の様々な材料で製造されたパッドとそれを固定する用途の粘着テープからなる器具をいう。眼の保護又は分泌物の吸引に用いる。
- ・本品は、単回使用である。
- ・本品はエチレンオキシドガス滅菌を行った製品である。

【使用方法等】

- ①眼の周りを清潔にしてください。
※皮膚に水分、クリーム、汚れ等が残っていると密着性が損なわれますので、きれいに拭き取ってからご使用ください。
- ②剥離紙を本体から剥がしてください。（粘着面及びパッド部に手が触れないようにご注意ください。）
- ③粘着剤のついていない方を上（眉毛側）になるようにしてください。
- ④パッド部を眼に当て、粘着テープで固定してください。
- ⑤本品はエチレンオキシドガス滅菌を行った製品で

す。再滅菌はしないでください。

【使用上の注意】

- ・本品の使用により「発疹」「発赤」「かゆみ」等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・粘着面を創傷面、湿疹、かぶれ等の患部に貼らないでください。
- ・本品を使用中にパッド部が汚れた、又は、水に濡れた時は、新しいものに貼りかえてください。
- ・本品使用中の歩行には注意してください。階段や段差のある場所は特に危険ですので注意してください。
- ・本品使用中の自動車、自動二輪、自転車等の運転は注意してください。交通事故の原因になります。
- ・本品使用中に粘着剤のニオイを感じることがありますが、製品異常ではありません。
- ・本品を長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。皮膚刺激の発生原因になります。
- ・皮膚から一度剥がした本品を、もう一度使用しないでください。
- ・本品はエチレンオキシドガス滅菌を行った製品です。開封後は早めに使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

（有効期間）

容器又は包装に記載。

【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911