

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 止血剤注入キット 70397000

ベリプラスト® スプレーセット

*(低圧噴霧用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

<適用対象>

活動性出血部位への薬液噴霧。
[ガス塞栓の恐れがある。]

<使用方法>


- 1) 完全閉鎖系での使用禁止。
[ガス塞栓の恐れがある。]
- 2) 薬液噴霧の際、先端部を切離面に挿入または密着させた状態にするなど、目的部位に近づけ過ぎてはならない。
[ガス塞栓の恐れがある。]
- 3) 圧縮空気または窒素以外のガスを使用してはならない。ガス圧は150kPa (1.5kgf/cm²) 以上に上げてはならない。
[ガス塞栓の恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】


本品は、スプレーヘッドとエアー用チューブで構成する仕様である。

<構造図(代表図)>

* 1. 低圧噴霧用

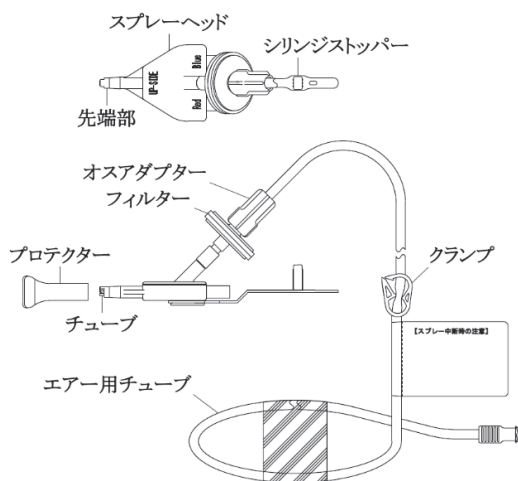

* 2. 低圧噴霧用スプレーヘッド

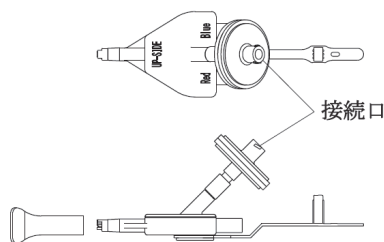

- 1) エアー用チューブ: ポリ塩化ビニル(可塑剤: フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
- 2) 先端部及びスプレーヘッド: ABS 樹脂
- 3) チューブ: フッ素樹脂

【使用目的又は効果】

生理的組織接着剤を噴霧塗布するための器具である。

【使用方法等】

1. 通常使用

- 1) 汚染に注意して、包装より取り出す。
- 2) 調製方法に従って溶解した A 液・B 液の入ったシリンジをバレルホルダーに固定し、プランジャーをプランジャーホルダーに固定した状態でスプレーヘッドにセットする。(A 液は Blue 側に、B 液は Red 側にセット)
- 3) シリンジストッパーをバレルホルダーにしっかりと固定する。
- 4) プロテクターを外す。
- 5) スプレーヘッドのフィルターにエアー用チューブを接続する。
- 6) クランプを操作しエアールートを開塞する。
- 7) エアー用チューブをガス流量調節器のコネクターに接続する。
- 8) ガス圧を 75～120kPa (0.75～1.2kgf/cm²) に設定する。
- 9) 使用直前にクランプを開放し先端部からのエアー吐出を確認したら、シリンジのプランジャーを押して目的部位に薬液を噴霧する。

2. スプレーヘッド交換時

- 1) クランプを操作し、エアーの吐出を止める。
- 2) シリンジストッパーをバレルホルダーから外し、A 液・B 液の入ったシリンジをバレルホルダーごとスプレーヘッドから外す。
- 3) シリンジストッパーをバレルホルダーにしっかりと固定する。
- 4) 使用済み品のエアー用チューブのオスアダプターをフィルターから外し、新たなスプレーヘッドのフィルターの接続口にオスアダプターをしっかりと嵌める。
- 5) 新たなスプレーヘッドのプロテクターを外す。
- 6) ガス圧設定を確認する。(75～120kPa (0.75～1.2kgf/cm²))
- 7) 使用直前にクランプを開放し先端部からのエアー吐出を確認したら、シリンジのプランジャーを押して目的部位に薬液を噴霧する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) ベリプラスト® 付属のシリンジを使用し、確実に接続すること。
[接続部からの薬液漏れが生じる恐れがある。]
- 2) スプレーヘッドの先端部へは、強い衝撃を与えないこと。
[先端部が変形し、薬液の噴霧ができなくなる。]
- 3) 薬液を噴霧する際は、スプレーヘッドの UP-SIDE 文字側を上向きにすること。
[逆向きでの使用は薬液詰まりの原因になる。]
- 4) 薬液の噴霧を中断する場合は、シリンジのプランジャーを少し引き、クランプを操作しエアーの吐出を止めて液だれを防止すること。
- 5) 薬液ルートが閉塞した場合は、先端部に付着した薬剤を完全に拭き取り、更にエアーあるいは生理食塩液により薬液ルート内に残存した薬剤を除去すること。
- 6) シリンジを付け替える場合は、それぞれの薬液を前と同じ薬液ルートに接続すること。
[薬液ルートが閉塞する。]

【使用上の注意】

<不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的に以下のような不具合や有害事象を発生する恐れがある。
有害事象が発生した場合には、術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 1) その他の不具合
 - ① 併用医療機器破損
 - ② 漏れ
 - ③ 詰まり
- 2) 重大な有害事象
 - ① 感染
 - ② ガス塞栓
- 3) その他の有害事象
 - ① アレルギー反応

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

<有効期間>

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社八光
TEL 026-275-0121

<製造業者>

株式会社八光

**** 供給会社:**

CSL ベーリング株式会社
くすり相談窓口 TEL 0120-534-587