

## メジ三活® ロック式 (L型)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止


#### ＜使用方法＞

造影剤等の高圧注入には使用しないこと。  
 [破損する可能性がある。]

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、輸液回路と予め医薬品が充填された注射筒とを接続するために使用され、ハンドル位置を切り替える事により、流路が切り替わる構造である。

#### ＜構造図(代表図)＞

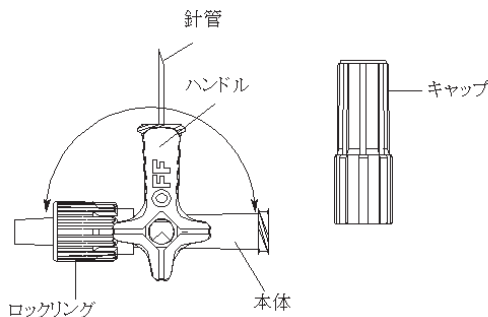

- 1) 本体: ポリカーボネート又はポリプロピレン
- 2) ハンドル: ポリエチレン
- 3) 針管: ステンレス鋼(ニッケル・クロム含有)

#### 【使用目的又は効果】

脈管系への液注入を調節する血管内投与キットの部品をいう。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

- 1) 他機器と接続して、本体に生理食塩液等の薬液を充填させる。
- 2) 針部のキャップを外し、本品の針管を注射薬容器兼注射器の筒先に押し込み、連通させて薬液を注入する。
- 3) ハンドルの OFF 方向の流路が閉塞される。使用目的により、ハンドル位置を切り替えて使用する。

#### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- 2) テーパー部に薬液を付着させないこと。  
 [嵌合部に緩み等が生じる可能性がある。]
- 3) 嵌合させる際は過度な締め付けをしないこと。  
 [コネクターが外れなくなる又は、コネクターが破損する可能性がある。]
- 4) テーパー部に薬液等が付着した状態で、締め付け及び増し締めを行わないこと。  
 [通常より深くテーパーに入り込むことで、コネクターの変形、破損を引き起こし、接合部からの薬液の漏れ、空気混入の原因となる。]
- 5) ロックリング付の本品とポリ塩化ビニル製のメスコネクターを接続する場合は、締め付けに注意すること。  
 [外れなくなる可能性がある。]
- 6) 針を用いて混注する場合は、混注用キャップ等を用いるとともに、適切な長さの針を選択して、針先がコック部に接触しないようにすること。  
 [コックにピンホールが生じて、薬液が漏れることがある。]
- 7) 針管には直接手を触れないこと。  
 [針刺し、感染のおそれがある。]

- 8) 混注する場合は、混注する薬剤を考慮し、必要な場合はフラッシュを行うなどの適切な方法で行うこと。  
 [混注後薬剤の一部が滞留し、直ちに流れない可能性がある。]
- 9) 使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的を確認すること。なお、締め過ぎに注意すること。  
 [必要以上の過大な力で締め付けると、ひび割れが生じて、薬液が漏れる可能性がある。]
- 10) ハンドルを 180° 以上回転させないこと。  
 [本体又はハンドルが破損して、薬液が漏れる可能性がある。]
- 11) ハンドルに対し、引き抜く方向に過度な負荷を加えないこと。  
 [ハンドルが外れ、液漏れが発生する可能性がある。]

#### 【使用上の注意】

##### ＜重要な基本的注意＞

- 1) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、本体のひび割れに注意すること。  
 [本体は、ポリカーボネートを使用しており、薬液により本体にひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響を生じることがある。]
- 2) 低温下では、衝撃等で破損する可能性があるため、取り扱いに注意すること。  
 [低温下では耐衝撃強度が低下し、破損する恐れがあるため。]
- 3) キャップをリキャップする必要がある場合には、誤刺に注意すること。

##### ＜不具合・有害事象＞

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合
  - ① 本品の変形・破損
  - ② 液漏れ
- 2) 重大な有害事象
  - ① 感染
- 3) その他の有害事象
  - ① アレルギー反応

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ＜保管方法＞

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

##### ＜有効期間＞

ラベルに記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### ＜製造販売業者＞

株式会社八光  
 TEL 026-275-0121

##### ＜製造業者＞

株式会社八光

##### 販売業者:

日本メジフィジックス株式会社  
 東京都江東区新砂3丁目4番10号  
 TEL (03)5634-7006