

医療用品(03) 類別名称 手術用手袋及び指サック

一般医療機器

一般的名称: 歯科用手袋 JMDN コード: 70911000

ジーシー グローブⅡ (歯科用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の経験がある医療従事者の使用、及び患者への使用は禁止

**【形状・構造及び原理等】


1. 構成

＜種類＞

寸法の違いで、以下の 4 種類のサイズがある。

- (1) ジーシーグローブⅡ(歯科用) SS
- (2) ジーシーグローブⅡ(歯科用) S
- (3) ジーシーグローブⅡ(歯科用) M
- (4) ジーシーグローブⅡ(歯科用) L

2. 形状

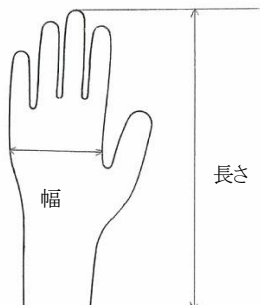

＜寸法表＞

項 目		寸 法
幅	ジーシー グローブⅡ(歯科用) SS	75 (±5mm)
	ジーシー グローブⅡ(歯科用) S	85 (±5mm)
	ジーシー グローブⅡ(歯科用) M	95 (±5mm)
	ジーシー グローブⅡ(歯科用) L	105 (±5mm)
長さ		240 mm 以上
厚み	カフ(縁から 25mm の位置)	0.10 mm 以上
	手のひら(中央)	0.12 mm 以上
	指(先端から 13mm の位置)	0.14 mm 以上

＜原材料＞

天然ゴムラテックス(パウダーなし)

3. 原理

手の形状に合わせて作られたラテックス製の手袋で、手に被せることで歯科の診察、治療及び処置時に手を汚れから守る。

【使用目的又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製(ラテックス)の手袋である。

*【使用方法等】

1. 包装から手袋を取り出す。
2. 手に装着する。
3. 使用は 1 回限りで廃棄すること。

*【使用上の注意】

＜使用注意＞

1. 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こす可能性がある。アレルギー性症状には、I 型(即時型: 天然ゴムラテックスに含まれるたん白による)、IV 型(遅延型: 主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による)がある。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師に相談すること。

2. 二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会が多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

＜重要な基本的注意＞

1. 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 包装を開封したらすぐに使用すること。
3. 使用中に手袋が破れた場合は、新しい製品に交換すること。

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)＞

薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるため確認の上、使用すること。

＜その他の注意＞

1. 手術には用いないこと。
2. 使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で地域の条例等に従い廃棄処分すること。

*【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

＜有効期間＞

外装に記載

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 原田産業株式会社

電話番号: 06-6244-0978

外国製造業者: コンセプト ラバー プロダクツ社

(Concept Rubber Products Sdn. Bhd.)

国名: マレーシア