

## 添付文書

作成年月日 2002年 8月28日 (新様式第1版)  
改訂年月日 2006年 3月31日 (第2版)  
改訂年月日 2008年 3月21日 (第3版)  
改訂年月日 2014年 12月18日 (第4版)

届出番号 13B2X00206000045

医療用品 6 視力表及び色盲検査表  
一般的名称 アムスラーチャート コード No32786000  
一般医療機器 (クラス I)

販売名 アムスラーチャート


### 【禁忌、禁止】

本品を曲げ、切削、打刻等二次加工は絶対にしない事

### 【形状、構造及び原理】

本 (表紙及び上質紙)

140mm X 210mm 12ページ  
検査表は7項

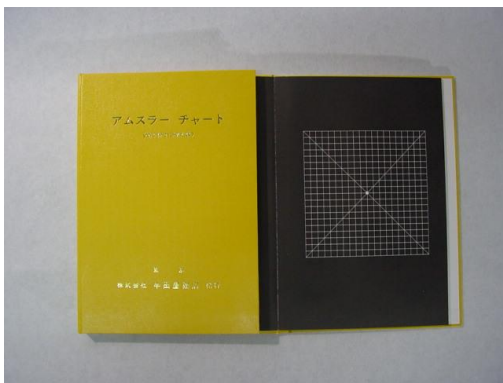

### 【使用目的又は効果】

中心暗点、変視症、変色症等、視野の中心部及び  
傍中心部の不整の検出

- 1表 黒地に白線の格子、2表 1表に白色の対角線を書き入れた物  
3表 黒地に赤線の格子、4表 黒地に白点の視標  
5表 黒地に白線の平行線、6表 白地に黒線の平行線  
7表 1表の中心部の格子を細かくした物

### 【使用方法】

- (1) 明室で影が出来ないようにして検査して下さい。  
(500LUX程度が望ましい)
- (2) 検査距離は30cmの距離で、表の面が視線とほぼ垂直になるようにして下さい。
- (3) 第1表 白色格子が曲がったり、中心部又は視野の一部分が着色したり、ぼやけて見えたり、消えたりする。  
第2表 曲線が曲がったり、ぼやけたり、消えたりする。  
第3表 赤格子について、第1表と同じ検査をおこなう。  
第4表 白い点々の中心部又は視野の一部分がかすんだり、着色したり、消えたりする。  
第5表 中心部又は視野の一部分において白い平行線の走行が曲がったり、かすんだり、消えたりする。  
第6表 黒い平行線について、第5表と同じ検査をおこなう。  
第7表 中心部だけ目の細かな格子について第1表と同じ検査を行う。
- (4) 河本氏中心暗点計と併用すると便利です。
- (5) 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し適切に処置して下さい。

### 【使用上の注意】

- (1) 本表は十分堅牢なインクにより印刷してありますが、長く光にあえば変色は免れないため、必要時間以外には表を閉じて置いてください。
- (2) 長年月を経過すれば、表の色はある程度変色するので、本表により良好な検査成績を得るためには、刊行後5年以内の物を使用してください。
- (3) 本表を直接手でこすったり、乱暴に取り扱わないで下さい。
- (4) 本器は医師等医療に精通した者がご使用ください。
- (5) 本器及び患者に異常があった場合は使用しないで下さい。
- (6) 破損、変色等ありましたら交換して下さい。

### 【保管方法及び有効期間】

- (1) 使用時以外は表を閉じて置いてください。
- (2) 直射日光にはさらさないで下さい。
- (3) 本表の保管は常温常湿で、極端な温度、湿度で保管しないで下さい。
- (4) 使用期間は5年をめどにして下さい。

### 【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用時以外は表を閉じて置いてください。
- (2) 破損、変色等ありましたら交換して下さい。

### 【包装】

一冊単位

### 【主要文献及び文献請求先】

氏名 株式会社 半田屋商店  
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-4  
電話 03-3811-0087  
FAX 03-3818-9695

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店  
〒113-0033  
東京都文京区本郷3-37-4  
Tel 03-3811-0087  
Fax 03-3818-9695