


機械器具 6 視力表及び色盲検査表
一般的名称 視力表 コードNo.16800000
一般医療機器(クラスⅠ))


販売名 視力検査キット「たべたのだあれ」

*【形状、構造及び原理】

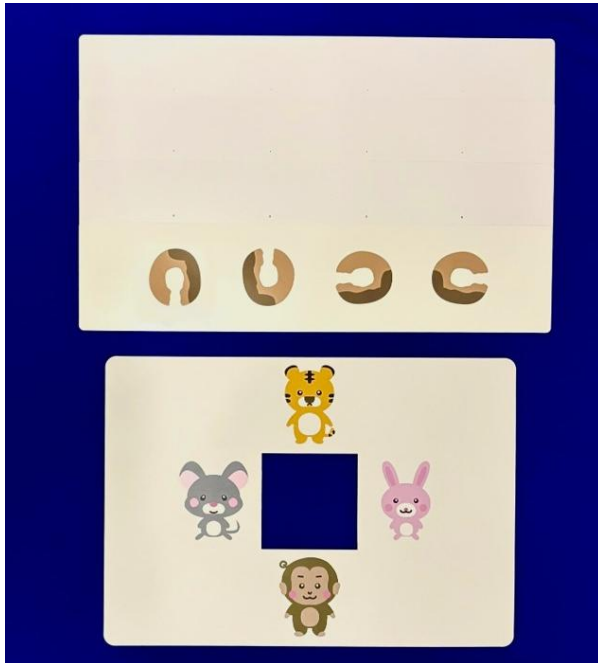

1. 通常仕様(30cm用):

視標表示パネル×1、スライド視標×4 枚(ドーナツ絵、0.3・0.5・0.8
ランドルト環 / 各 1 枚)

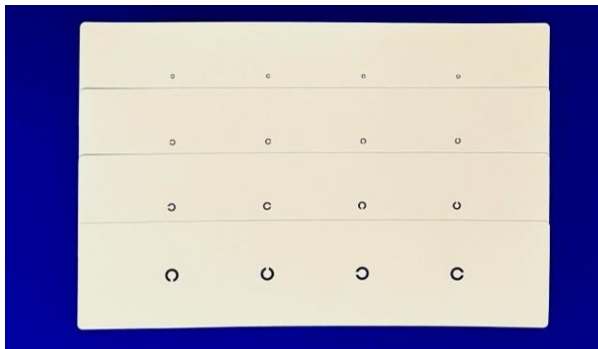

2. 追加視標(250cm用):

スライド視標×4 枚 0.3・0.5・0.7・1.0 ランドルト環 / 各 1 枚)

外寸:

- ・視標表示パネル 423×256×3mm、
- ・スライド視標 42cm×9.5cm

原材料:

- ・視標表示パネル、スライド視標(ドーナツ絵、30cm仕様 ランドルト環):塩化ビニール樹脂
- ・スライド視標(250cm仕様 ランドルト環):厚紙

視力値:

1. 30cm仕様 0.3・0.5・0.8
2. 250cm仕様 0.3・0.5・0.7・1.0

視標を提示し視力を測定する。幼児用の簡易視力の測定に適した形状。

*【使用方法】

- (1) 明室で影の出来ない場所で検査をすること、あるいは適切に照明する。視標の照度は500Lux以上となることが望ましい。
- (2) 検査前にドーナツ絵(練習用)であらかじめ検査の練習を行う。
視標提示パネルの中央にドーナツ絵を提示し「たべたのだあれ?」とクイズ形式で答えさせる。
- (3) ランドルト環視標でドーナツ絵と同様にクイズ形式で答えさせて視力検査をする。
大きい視標から順番(30cm仕様の場合:0.3→0.5→0.8 / 250cm仕様の場合:0.3、→0.5→0.7→1.0)に視力検査を行う。
- (4) ランドルト環視標による視力検査で、それぞれ3種類以上見た場合、若しくは2種類以上見えなくなった場合、検査を終了する。

【使用上の注意】

- (1) 視標面に傷、汚れ等つけない様に使用して下さい。
- (2) 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し適切に処置して下さい。

【保管方法及び有効期間】

- (1) 直射日光に当たらない場所に常温、常湿で保管すること。
- (2) 使用期間は 5 年を目途とし、視標面が傷、汚れ、焼け等が出た場合は、交換してください。

*【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後、溶剤等で拭かないこと(視標面はあまり触れないことが望ましい)。
- (2) 表面に傷をつけない様に気を付けて取り扱うこと。
- (3) 落下等による破損にご注意ください。
- (4) 本器が傷、汚れ、焼け等が出た場合は、使用期間の 5 年を待たずに交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

氏名 株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-4
電話 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

*【使用目的又は効果】

視力検査に用いる視力表。

取扱説明書をご参照ください。