

添付文書

作成年月日 2020 年 2 月 13 日（新様式 第 1 版）

届出番号 13B2X00206000161


医療用品 6 視力表及び色盲検査表
一般的名称 視力表 コード No16800000
一般医療機器（クラス I）

販売名 森実ドットバー morizane dot test for near vision & occluder for cover test

【禁忌、禁止】

本品を曲げたり、表面に傷や汚れをつけたり、視標を加工する事は、絶対にしない事。

【形状、構造及び原理】

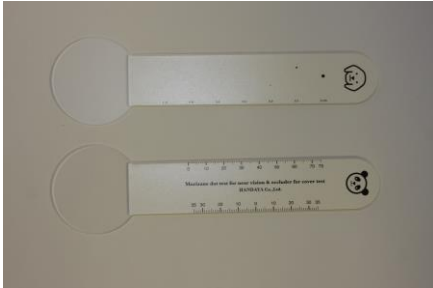

遮眼子形状の亚克力板にドット視標（近距離視力検査用）、目盛（瞳孔間距離測定用）、固視標図（犬・パンダ）が付いており視力検査等で使用する。

ドット視標 0.05、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、7種の視標が集合・不規則に配置されており、その大きさが 30cm の距離での視角が視力に相当するように正確に定められている。

瞳孔間距離測定目盛 0～75mm、0～35mm（鼻中隔から左右へ）

（付属品：クリップ付き紐）

材質 本体：亚克力 ドット視標部：印画紙

【使用目的又は効果】

- ・近距離視力の検査（検査距離 30 cm）
- 小中高の集団検診用に用いる。成人、特に老人の近距離視力のスクリーニングや老眼鏡の要否の判定、度数の適否に有用
- ・半透明遮眼子としてカバーテストに有用
- ・瞳孔間距離の測定
- ・固視標（犬・パンダ絵柄）として眼球運動観察に有用

【使用方法】

- （1） 明室で被検者と対座し、被検者の片眼を遮閉する。左・右一眼ずつ検査を行う。ドット視標を眼前 30 cm で提示し、ドットの「ある」「ない」を指差しで示し又は答えてもらう。検査距離を一定に保つために、被検者の服と検者の視標を持つ手に附属品の紐を渡すのが良い。答えた最小のドットの値を視力とする。
- （2） 半透明遮眼子として被検者の片目をカバー（遮閉）し、開放した時の復帰運動を見る。
- （3） 被検者に遠方を注視させ目盛にて瞳孔間距離を測定する。
- （4） 犬・パンダの絵柄は、被検者の固視標として使用する。

【使用上の注意】

- （1） 近距離視力は、調節と関わりが大きいので照明条件と検査距離を守ること。
- （2） 視標部は上質紙なので水道水で洗わないこと。また、汚れた手指で持たないこと。
- （3） 視標が落ちない汚れ、破損した時は使用せず交換してください。
- （4） 幼児に用いる場合には、別途既製販売のドットカード（8枚組：うさぎ or くまの顔）の視標を用い、ゆっくり指差しに時間をかけ吟味する方がより確実となる。

【保管方法及び有効期間】

- （1） 直射日光に当たらない場所に常温、常湿で保管して下さい。
- （2） 使用期間は 5 年程度、視標面が傷、汚れ、焼け等、出た場合は、交換してください。

【保守・点検に係る事項】

- （1） 表面に傷、汚れ等をつけないようご注意下さい。（視標面はあまりいじらない事が望ましい）
- （2） 汚れの除去は、フィルムクリーナー（写真洗浄液）を用いて軽く拭いて下さい。

【参考文献】

- ① 森実秀子、他：DOT VISUAL ACUITY CARD の臨床への応用その 3 斜視弱視の症例に用いて
眼臨、87：1287-1291、1992
- ② 森実秀子：森実式ドットカード、眼科診療 Q & A
8：418-419 六法出版、1990。

参考文献をお読み下さい

【主要文献及び文献請求先】

氏名 株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-4
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店
〒113-0033
東京都文京区本郷 3-37-4
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695