

添付文書

作成年月日 2022 年 11 月 21 日 (第 1 版)


届出番号 13B2X00206000212

医療用品 (6) 視力表及び色盲検査表
一般の名称 視力表及び乱視検査表 コード N o 16800000
一般医療機器 (クラス I)
販売名 読書視力チャート 日本語 MNREAD

【禁忌、禁止】

- 1、本品を曲げたり、表面に傷をつけたり、視標を加工する事は絶対にしないこと。
- 2、医師等医療に精通した者のみが使用すること。

【形状、構造及び原理】

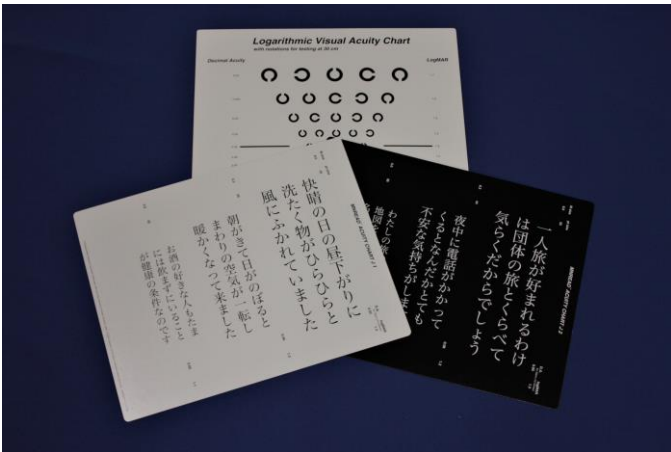

寸法：355mm×280mm×2mm 3枚組

材質：紙 (NEW-DV 坪量：550g/m²)

白地に黒字で、漢字かな交じり文又は、ひらがな単語の縦書き又は横書きの視標 1枚

黒地に白字で、漢字かな交じり文又は、ひらがな単語の縦書き又は、横書きの視標 1枚

白地に黒のランドルト環 黒地に白のランドルト環

ログマー近点視力表 1枚

ログマー視力値 1.3～0.0 まで 0.1 ステップ

【使用目的又は効果】

視力 (読書視力及び読書速度) の測定。

【使用方法】

- (1) 明室で影の出来ない場所で検査すること (500 Lux 以上が望ましい)。
標準検査距離は 30 cm です。検査距離を変えるときは取扱説明書 10 ページの換算表で補正して下さい。
- (2) 視標は少数視力 1.0 (logMAR 0.0) まで使用可能。
それ以下の視標は 1.0 視標のノイズとして入っている為、使用できません。それ以下の視力を測定するときは検査距離を変えて下さい。
- (3) MNREAD に記入されている視力値は読書視力値 (Reading Acuity) で絶対視力値 (Visual Acuity) ではない為、絶対視力値は近点視力表等でお調べ下さい。
- (4) 検査前に練習用視標であらかじめ検査の練習をします。
- (5) 大きい視標から順番に文章を声に出して読み上げさせます。
- (6) 一番大きな視標が隠れるくらいのカードで、これから読むとする視標を隠しておき、カードの端に視線を向けさせておきます。

- (7) 患者には一つの文章を出来るだけ早く、正確に読むように説明します。
- (8) ストップウォッチで読むのにかった時間を計測し、また読み間違った文字をスコアカードに記録します。
- (9) はっきり読めない部分は推測でも良い事を伝え、読み間違いにこだわらずどんどん先を読むよう励まします。
- (10) 患者が文字を一つも読めなくなったら検査は終了です。

【使用上の注意】

- (1) 視標の表面を傷つけないよう注意して扱うこと。
- (2) 視標をシンナー等溶剤で拭かないこと。
- (3) データの解析は取扱説明書にしたがうこと。
- (4) 本器は医師等医療に精通した者が使用すること。
- (5) 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し、適切に処置すること。

【保管方法及び有効期間】

- (1) 高温をさけ、常温、常湿で保管すること。
- (2) 直射日光に当てないこと。
- (3) 有効期限は特にありませんが、ボードが汚れたら交換して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後、有機溶剤等で拭かないこと。
- (2) 表面を傷つけないように注意すること。
- (3) スコアカード、グラフシートが無くなりましたらコピーして下さい。
- (4) 本器が傷、汚れ、焼け等、破損した場合は交換して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店
〒113-0033
東京都文京区本郷 3-37-4
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

取扱説明書をご参照下さい。