

機械器具 58 整形用機械器具
 一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

インプラントインスツルメントセット

【禁忌・禁止】


●使用方法における禁忌・禁止

- ・歯科診療及び歯科治療以外には使用しないで下さい。
- ・劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止して下さい。
- ・乱暴に使用しないで下さい。
- 器具を落下させるなど、強い衝撃を与えないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

本品の構成品及びその形状は以下の通り。

Spencer : 3528

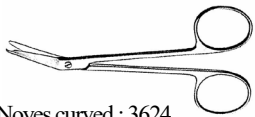


La Grange : 3525



Noyes curved : 3624



Noyes angular : 3626

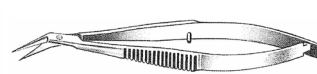

TC Micro-Adson carbide inserts
: 1014TC



TC Adson carbide inserts
: 1015TC



Scalpel handle with millimetered scale : 3629



Prichard : 878




Periosteals elevator : 854/H02



Sinus lift : 1309/7



Hemingway : 659/4,660/2,660/4

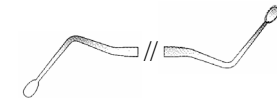

Castroviejo

Straight : 2000TC


Curved : 2001, 2001TC




Castroviejo Barraquer

Straight : 1910TC


Curved : 1911TC

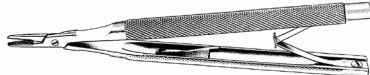

Mathieu : 1855,1855TC

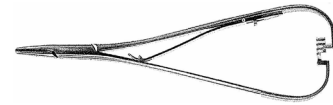


Crile-Ryde : 1925aTC

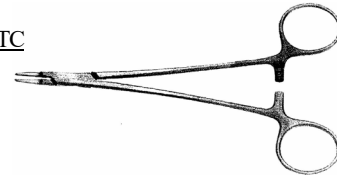


Sternberg : 890



Senn-Miller : 886

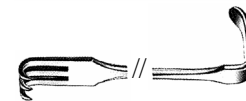

Self locking tweezers grooved
: 1019

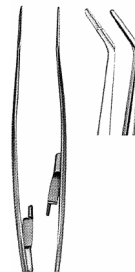

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの手術に用いる器具の組合せセットである。

【使用方法等】

各々の器具及び患者に異常が見られないかを、絶えず監視しながら使用する。

【使用上の注意】

一般的注意

- (1) 本品は未滅菌品である。使用前には必ず滅菌を行うこと。微生物汚染による患者の感染を防止するため、使用後は直ちに、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- (2) 滅菌は、オートクレーブ滅菌を行う。操作方法是オートクレーブ製造者の指示に従うこと。
- (3) 滅菌処理の前に、器具の洗浄・消毒を行うこと。
- (4) 器具の汚れが酷い場合は、超音波洗浄を行うこと。
- (5) 洗浄処理後は、水で完全にすすぎ、直ちに乾かすこと。
- (6) 器具の損傷を防ぐため、洗浄及び消毒処理中の器具同士の接触に気をつけること。
- (7) 汚染された器具を取扱う際は、防護手袋を使用するなど、二次汚染に注意すること。
- (8) 180℃を超える高温での滅菌は、作動部の硬度を減じ、耐用年数を短くする恐れがあるので行わないこと。
- (9) ケミクレーブ（高圧アルコール蒸気滅菌）は、製品の品質を損なう恐れがあるので行わないこと。
- (10) 錆防止のため、耐食性の洗浄剤及び消毒剤を使用すること。
- (11) 特殊な器具に対する洗浄剤及び消毒剤の適性、使用方法、使用時間等は、説明書を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 包装を開封せず、塵や湿気を避けて室温で保管すること。
- (2) 器具は使用後直ちに洗浄・消毒・滅菌し、十分に清潔な容器に保管すること。
- (3) 器具・器材は、十分に乾燥の上、保管すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル 2F

TEL : 03-4333-9900

製造業者：Medesy s.r.l. (イタリア)