

**2022 年 3 月改訂（第 7 版）

*2020 年 11 月改訂（第 6 版）

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

インプラントボディアナログ ロング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 歯科における技工作業以外には使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
3. 本品を落下させるなど強い衝撃を与えない、また乱暴に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


本品の構成品の形状、構造は下記の通りである。

- ・寸法別にカラーコーティングしている（黄・青・緑）




SU0001:インプラントボディアナログ ロング 3.25mm 用(HA-ET09-09)


単位:mm

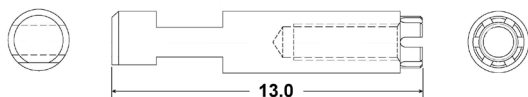

SU0002:インプラントボディアナログ ロング 3.75&4.0mm 用(HA-ET09-10)

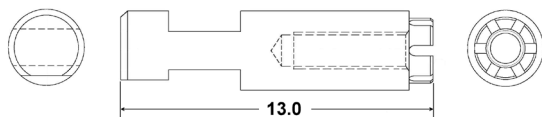

SU0003:インプラントボディアナログ ロング 5.0mm 用(HA-ET09-11)

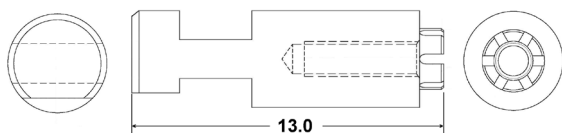

・原材料：チタン合金

カラーコーティング（陽極酸化）：黄・青・緑

【使用目的又は効果】

本品は歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着、固定の目的に用いる器具である。指定フィクスチャの上部構造を製作する際に、作業模型上でフィクスチャの形状模型（アナログ）として使用する。

【使用方法等】

- (1) 口腔内の指定フィクスチャ上で設計計画（印象採得等）を行い、作業模型を製作する。
- (2) 製作した作業模型上で本品をフィクスチャ模型（アナログ）として使用し、上部構造のアバットメントの作製を行なう。

【使用上の注意】

- (1) 本品は上部構造のアバットメントを製作する際に作業模型上でフィクスチャ模型（アナログ）として使用するものである。また未滅菌品であるので、患者の口腔内で絶対に使用しないこと。
- (2) 埋入したフィクスチャの長さ、太さに適応した製品を選択すること。また、上部構造物との関係をきちんと把握しておくこと。
- (3) 本品を使用する際には、術式マニュアル等を充分理解したうえで、適切な手順に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

包装を開封せず、室温で塵や湿気を避けて保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2F

TEL：03-4333-9900

製造業者：株式会社スズキプレシオン