

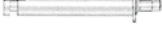
ロケーター ツール

【禁忌・禁止】

劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

本品の構成品の形状、構造は下記の通りである。

製品番号	製品名	図
8393	ロケーターコアツール (メーリングツール、メーリングツール、アバットメントドライバー) (8397、8391、8390)	
8397	ロケーターメーリングツール	
8390	ロケーターアバットメントドライバー	
8394	ロケーターアバットメントホルダースリーブ (4入)	
8394-20	ロケーターアバットメントホルダースリーブ (20入)	
9020	ロケーター30Ncmトルクレンチ&ドライバーキット (30Ncmトルクレンチ、サムノブ、ロケータートルクレンチインサートドライバー15mm) (9061、4935、8926)	
8260	ロケータートルクレンチインサートドライバー (15mm)	
8280	ロケータートルクレンチインサートドライバー (21mm)	
8926	ロケータースポットフェイスダイヤモンドバー インサートドライバー (15mm)	
8927	ロケータースポットフェイスダイヤモンドバー インサートドライバー (21mm)	
8913	ロケーターインサートドライバー23mm (ショート) ラッチタイプ	
8914	ロケーターインサートドライバー29mm (ロング) ラッチタイプ	
4936	30Ncmトルクレンチ用0.050°ヘックスインサートドライバー 21mm	
8924	ロケーターパイロットドリル ドリルスぺーサー付	
8922	スポットフェイスダイヤモンドバー	
7360	LODIドライバーショート	
7361	LODIドライバー ロング	
7362	LODIトルクラチェットレンチ (トルクラチェット、トルクレンチ交換用インサート) (7632、7463)	
7365	LODIディレクションインジケータ	
7420	LODIドリルストップ6mm、8mm、 10mm、12mm、14mm (7415、7416、7417、7418、7419)	

・原材料: ステンレス鋼、チタン合金、ポリスルフォン

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる再使用可能な器具である。
アバットメント及びアタッチメント等の着脱・締結の際に使用する。

【使用方法等】

- ・本品は全て未滅菌品である。使用前には必ず加熱蒸気滅菌(オートクレーブ滅菌等)を行うこと。ロケーターコアツール(8393)、及びトルクラチェット(7632)は、必ず分解して滅菌を行うこと。
滅菌推奨条件: 飽和蒸気中121°C40分
尚、アバットメントホルダースリーブ(8394、8394-20)については、推奨条件にて滅菌サイクル5回までの耐久性を確認している。
- ・患者の適切な臨床評価に基づき、各々の使用用途、部位に適応した製品を選択する。使用前には必ず異常がないことを確認すること。

ロケーターコアツール

メーリングツール及びメーリングツールは、メーリング(アタッチメント)の各々、着・脱の際に使用する。
アバットメントドライバーはアバットメントの着脱の際に使用する。

ロケーターアバットメントホルダースリーブ

アバットメントドライバーでアバットメントを締付ける際に、アバットメントをアバットメントドライバーに保持するために使用する。

ロケーター30Ncmトルクレンチ&ドライバーキット

アバットメントを30Ncmで締結する際に使用するキット品。

30Ncmトルクレンチ用0.050°ヘックスインサートドライバー

ロケーター30Ncmトルクレンチ&ドライバーキット用の0.050°ヘックスインサートドライバー。

ロケーターインサートドライバー

各々の互換性のあるトルクレンチに装着してアバットメントを締結する。

ロケーターパイロットドリル ドリルスぺーサー付

歯根部にディグリーフィメーリングを埋入する根管経路を形成するドリル。ドリルスぺーサーを装着して埋入深さを調整する。

ロケータースポットフェイスダイヤモンドバー

歯根部の咬合表面上にディグリーフィメーリング用の座ぐり面と皿穴形状を形成するために使用する。

LODIドライバー

トルクラチェットレンチと組合せてフィクスチャの埋入に使用する。

LODIトルクラチェットレンチ

フィクスチャの埋入、及びアバットメントの締結に使用する。
(測定可能トルク値は30~70Ncm)

LODIディレクションインジケータ

ドリリング時に窩洞の方向、及び平行関係を確認するために使用する。

LODIドリルストップ

ドリリング時に窩洞の深度を調整するために使用する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

1. LODIトルクラチェットレンチの取り扱い
(1) 使用前には、正常に動作すること及び、最初の目盛線と矢印とが合っていることを確認すること。アームがスケールの端から外れている場合は正確な測定はできないことがある。
(2) 80Ncm以上の負荷をかけないこと。過負荷、落下、取り扱いに誤りがあった場合は、正常な動作が保証されないため使用を中止すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品を使用している際は、常に患者の状態を観察し、異常を認めた場合は、直ちに手術をやめ、適切な処置をとり、患者の安全を確保すること。

2. 一般的注意

- (1) 本品は未滅菌品である。滅菌可能な製品は使用前には必ず滅菌を行うこと。微生物汚染による患者感染を防止するため、使用後は直ちに、洗浄、消毒し保管すること。また、加熱滅菌後の未乾燥保管は避け、使用直前（手術前日もしくは当日）に滅菌すること。
- (2) 滅菌は、加熱滅菌（オートクレーブ滅菌等）を行う。操作方法是加熱滅菌器製造者の指示に従うこと。
- (3) ケミクレーブ（高圧アルコール蒸気滅菌）は、製品の品質を損なわないように、充分注意して行うこと。
- (4) 超音波洗浄を行う場合は、器具の接触を避けて充分に間隔をあけるか、1本ずつガーゼ等でくるみ洗浄すること。
- (5) 滅菌、洗浄、消毒処理後は水で完全にすすぎ、充分乾燥のうえ保管すること。
- (6) 器具の損傷を防ぐため、洗浄および消毒処理中の器具同士の接触に気をつけること。
- (7) 錆防止のため、耐食性の洗浄剤及び消毒剤を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 本品は、包装を開封せず、室温で塵や湿気を避けて保管すること。
- (2) 器具は使用後直ちに洗浄・消毒し、衛生面が充分保たれた容器に保管すること。
- (3) 器具・機材は、充分に乾燥の上、保管すること。
- (4) 滅菌後の未乾燥保管は劣化の原因になるので、避けること。

有効期間

本品は使用毎に消耗・摩耗されるので、耐用期間は各製品・骨質・使用方法等により異なる。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL：03-4333-9900

製造業者：Zest Anchors LLC.（アメリカ合衆国）