

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

SG インプラントレプリカ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 本品を再使用しないこと。
2. 変形・破損等が見られた場合は、本品の使用を中止すること。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

固定用パーツが回転しない状態でさらに締結しないこと。（模型が変形、または割れる場合がある）

【形状・構造及び原理等】

形状：レプリカ本体および付属の固定用パーツから成る。

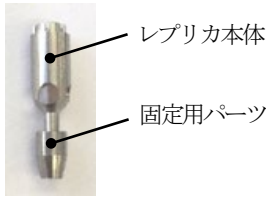

【使用上の注意】

1. 本品の加工・改造を行わないこと。
2. 本品を口腔内では使用しないこと。
3. 本品の使用前に変形・破損等がないことを必ず確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

本品は、包装を開封せず、室温で塵や湿気を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2F
TEL：03-4333-9900
製造業者：株式会社スズキプレシオン

製品番号	製品名
SU0056	SG インプラントレプリカ A1 (SPLINE3.25mm)
SU0057	SG インプラントレプリカ A2 (SPLINE3.75mm)
SU0058	SG インプラントレプリカ A3 (SPLINE5.0mm)
SU0066	SG インプラントレプリカ SP1 (SwissPlus3.8mm)
SU0067	SG インプラントレプリカ SP2 (SwissPlus4.8mm)
SU0068	SG インプラントレプリカ UAB (Universal Abut)

材質：ステンレス鋼

原理：歯科用模型等に装着して使用するインプラントフィクスチャのレプリカである。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作の目的に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 本品に対応する穴形状を有する歯科用模型等を準備する。
2. 歯科用模型等に設けられた取り付け穴に、咬合面よりレプリカ本体を挿入する。
3. 咬合面の反対側の穴から固定用パーツをレプリカ本体のネジ部に装着し、ドライバーを使用して回転させ歯科用模型等に固定する。
4. 固定用パーツの締結は、ドライバーを使用して固定用パーツが回転しなくなるところで固定する。