


機械器具22 検眼用器具
一般医療機器 検眼レンズ (JMDNコード : 34653000)

近近累進トライアルレンズ

【形状、構造及び原理等】

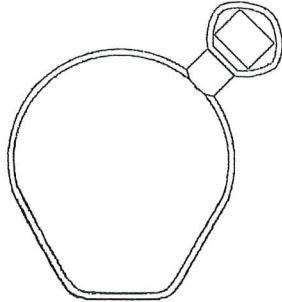

1) 構成

構成品は、単体レンズまたはセットにて出荷される。

寸法

レンズ 38mm x41mm(つまみ部分を除く)

2) 品目仕様

レンズ部分:プラスチック製、屈折率 1.50又は1.60

リム部(枠)部分:金属製、38mm x41mm

つまみ部分:プラスチック製で度数を表示

遠用度数:-1.00D

加入度数:1.00~3.00D(0.50Dステップ)

累進帯長:19mm

3) 動作原理

適切な度数のレンズを装着して被検者の
視力補正をします。

【使用目的、効能又は効果】

検眼用レンズ

【操作方法又は使用方法等】

①遠用あるいは近用度数の検眼レンズがセットされた
検眼用フレームのホルダーに本品を挿入して
視力補正をするために使用します。

②使用後は、次回使用のために清潔な
状態で保管します。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

①プラスチックレンズなので取り扱いには十分
注意して下さい。

②振動、衝撃に注意して下さい。

③熟練者以外は使用しないこと。

2) 廃棄

廃棄する場合には、廃棄、リサイクルに関する
自治体の条例に従って下さい。

レンズ 外径38mm(つまみ部分を除く)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管

①直射日光や高温多湿の環境を避け、室温で
保管すること。

②振動、衝撃等を受けない安定した場所に保管すること。

③化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に
保管しないこと。

2) 使用期間

納入された時から8年(自己認証による)

【保守点検に係る事項】

キズや割れなどが無く、検査に支障無いことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元

株式会社 ハセガワ・ビコー

〒133-0043

東京都江戸川区松本 2-41-4

TEL 03-3655-4321

販売元

株式会社 オー・ビー・シー

〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目27番2号

TEL 03-5805-6175