

機械器具 13 聴診器

一般医療機器 機械式聴診器 JMDNコード: 13755000

リットマン ステスコープ

【禁忌・禁止】

- ・本器は医療行為の代用となるものではなく、無資格、無許可、またはトレーニングなしでは、使用しないこと。
- ・生体音の聴診以外の目的では使用しないこと。
- ・聴診器を加熱又は蒸気による滅菌はしないこと
- ・聴診器を振り回さないこと。

3. 高周波数音を聴診するときは、サスペンデッド・ダイヤフラムを皮膚に強めに押し当てる。
4. 低周波数音を聴診するときは、サスペンデッド・ダイヤフラムを皮膚に軽く押し当てる。また、ベル部のある聴診器では、ベル部で聴診する。

【使用上の注意】


1. 極度の高温、低温の場所での使用は避けること。
2. 滅菌のために薬液に浸したり、蒸気滅菌したりしないこと。
3. 完全に洗浄するときは、イアーチップをイアーチューブから外してから行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 極度の高温、低温の場所での保管は避けること。
溶剤やオイルが近くにある場所での保管も避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. イアーチップとチューブは、消毒用エタノール又は、弱性石鹼水を含ませた柔らかい布で清拭してください。
2. チューブは皮脂等の影響で硬化が促進されることがあります。
保護剤を使用すると、チューブの柔軟性が維持されます。
3. イアーチップは、耳垢がたまらないよう定期的に清掃することをお勧めします。

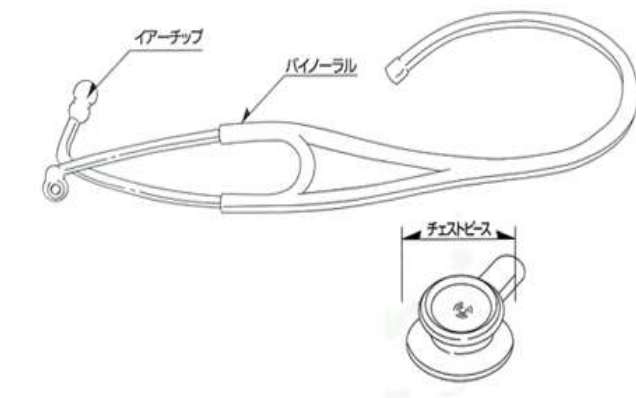

【形状・構造及び原理等】

本品は、イアーチップ、イアーチューブならびにチューブからなるバイノーラルと皮膚に直接接触して生体音を拾うチェストピースから構成される聴診器である。

原理

チェストピースで集音した振動音が、チューブ及びイアーチューブからなるバイノーラルを通じてイアーチップまで伝わり、聴診することができる。

【使用目的又は効果】

本器は、心臓、動静脈、肺などで発生する生体音を直接聴診する機器である。

【使用方法等】

使用方法

1. 耳の形に沿った正しい方向に、イアーチップを挿入する。
2. 聴診したい部位の皮膚に直接チェストピースをあてる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 パネシアン

電話 : 03-5433-2580 FAX : 03-5433-2582

製造業者:

3M Health Care 社(アメリカ合衆国)