

類別及び一般的名称： 歯科材料9 歯科用研削材料
歯科技工用ダイヤモンド研削材
一般医療機器（JMDNコード：70902000）

販売名： ケ ン ポ イ ン ト


【形状・構造等】

1) 成分

- ① 軸部および基材部：ステンレス鋼
- ② 作業部：シリコンゴム結合剤
ダイヤモンド砥粒

2) 構造

- ① 軸部
- ② 作業部

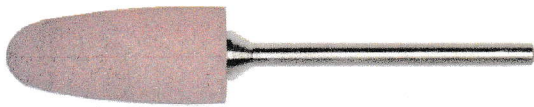

【性能、使用目的、効果又は効能】

歯科用レジン、金属製作物への研削により、効率の良い研磨効果を得られる。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着して通常の研削工程に適用する。

【使用上の注意】

- (1) 歯科用レジン、合金以外に使用しないこと。
- (2) 予備回転を励行し、低速回転5,000rpm以下から、対象の材料に適した工程のエンジン回転数を超えないこと。（適正回転数：5,000rpm以下）
- (3) 研削作業に伴う粉塵の人体への影響を避けるため、局所的吸塵装置、公的機関の認可した防塵マスク等の措置を講じること。
- (4) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- (5) 反復使用による劣化、変質に注意し、適宜新品と交換使用のこと。

【作動・動作原理】

比較的大きな直径を有する研磨頭部により、広い平面への効率

的な研磨効果が得られる。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け常温で保管。

有効期間：消耗、劣化により適宜新品交換。

【取り扱い上の注意】

- (1) 使用時、保管時に過度の応力を加えないこと。
- (2) 急激な高速回転を行わないこと。

【保守・点検にかかわる事項】

マンドレールの変色劣化に注目し、原因となる薬液、湿気から分離点検する。

【包装】

包装単位は6本入り、12本入り、100本入り
(12, 100本入りはケンポイントのみ)。

【製造販売業者の名称及び住所等】

有限会社ハナケン
〒113-0034 東京都文京区湯島4-6-12 B-804
TEL03-5802-0490
輸入先国名：リヒテンシュタイン
輸入先企業名：エデンタ エタブリスマン社