


オリンパス エンドカッター

【形状、構造及び原理等】

- 1.原材料:ステンレス鋼
- 2.形状・構造
代表的な1種類を掲載する。

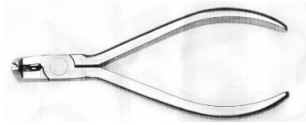

○ー.020インチ
□ー.021x.028インチ

- 3.原理
用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いる。

【使用目的又は効果】

用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いる。

【使用方法等】

別に届ける矯正用結紮ワイヤを切断するのに本器を使用する。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
 - 1)本品を使用中に口腔内を傷つける恐れがあるので注意をすること。
 - 2)変形や変質、異常を発見した場合は、使用を中止すること。また、破損、欠け、曲りの原因になるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 2..その他の注意事項
 - 1)破損や事故等の原因になるので、2次加工、改造(曲げ、切削、打刻等)は絶対に行わないで下さい。
 - 2)本品を使用する前、使用した後に、必ず洗浄、滅菌処理を行って下さい。
 - 3)本品は【使用方法等】に記載されていない使い方による破損、欠け、脱落、曲がり等の不具合は全て術者の責任となります。
 - 4)チューブ等の金属片を切ると、先端の刃がかかる恐れがあります。欠けた刃が口腔内に残っていないか使用後確認をし適切に撤去して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.外圧、水分等製品に影響を与えない環境で保管する。
- 2.歯科従事者以外が触れない様に適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】*

1. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
2. 使用後はただちに洗浄液浸漬して血液、体液、組織等の付着物を除去し、感染防止の為に洗浄、滅菌すること。
3. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用して下さい。
4. 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意をすること。
5. 洗剤の残留がないように充分すすぎをし、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
6. 高圧蒸気滅菌は精製水を使用し、135℃以下*で行うようにし、滅菌器メーカーの指示に従い本品を器内に配置すること。
*(115～118℃では30分 121～124℃では15分 126～132℃では10分)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者氏名:有限会社バルビゾン
連絡先電話番号 :047-460-7818
製造業者氏名:ジーアンドエイチワイヤーカンパニー／フレックスメディックス
(G&H Wire Company/FlexMedics)

国名:アメリカ