

再使用禁止

Silkonブラケット



【禁忌・禁止】*

- ・再使用禁止
- ・使用状況により脱落・破折・摩耗が起こる場合がある。その際はただちに歯科医師の診断を受けさせること。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は、次の原材料で構成する。
- ・ポリカーボネート(グラスファイバー入り)

(構造等)

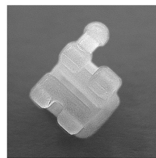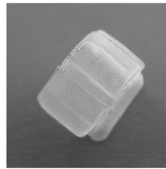

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

- (1)接着する歯面の位置、方向を確認する。
- (2)接着剤の指示に従って、歯面の清掃、接着前処理を行う。
- (3)ボンディングベースに汚れが付着していないことを確認し、歯面に接着する。
- (4)接着剤が十分に硬化したのち、カラーコードを取り除き、ワイヤーを装着する。

【使用上の注意】**

- 1)使用注意
 - (1)本品の脱落・破折・摩耗を防ぐため、対合歯に接触しないように接着すること。
 - (2)脱落・破折・摩耗が起こった場合は、使用せず新しいものに交換すること。
 - (3)ディボンディングの際は、撤去専用のプライヤーを使用し、慎重に行うこと。
 - (4)ポリカーボネートは、唾液などの影響により、ビスフェノールA(BPA)が微量溶出するおそれがあります。なお、厚生労働省の「内分泌かく乱物質の健康影響に関する検討会の報告」などによると、ポリカーボネートから溶出するレベルのBPAが人の健康に重大な影響を与えるという科学的知見は得られていません。
- 2)重要な基本的注意
 - (1)本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - (2)口腔内での脱落は、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。また、診療後にも脱落があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかかるよう伝えておくこと。
 - (3)本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。(自己認証による)**

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス