

再使用禁止

FLBリンガルブラケット

【禁忌・禁止】
・再使用禁止**【形状・構造及び原理等】**

本品は、次の原材料で構成する。
チタン合金

(構造等)

**【使用目的又は効果】**

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

- (1) 接着する歯面の位置、方向を確認する。
- (2) 接着剤の指示に従って歯面の清掃、接着前処理を行う。
- (3) ボンディングベースに汚れが付着していないことを確認し、歯面に接着する。
- (4) 接着剤が十分に硬化したのち、ワイヤーを装着する。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - (1) 本品の脱落や歯の摩耗を防ぐため、対合歯に接触しないように接着すること。
 - (2) 脱落・変形が起こった場合は、使用せず新しいものに交換すること。
 - (3) ディボンディングの際は、撤去専用のプライヤーを使用し、慎重に行うこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - (1) 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - (2) 口腔内での脱落は、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。また、診療後にも脱落があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかかるよう伝えておくこと。
 - (3) 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560



取扱説明書を必ずご参照ください。

FLB

Lingual Bracket

リンガルブラケット

- 素材：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
- スロットサイズ：.018×.025 インチ
- 包装単位：1 粒

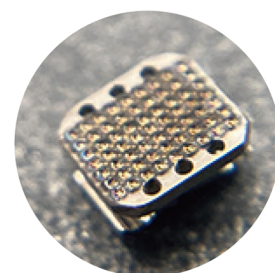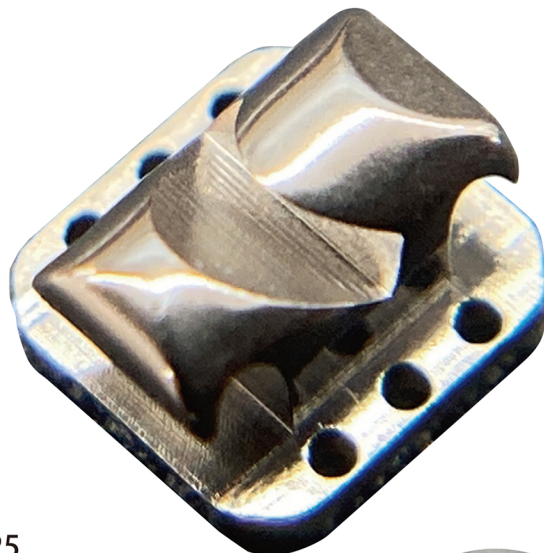


ベース面


		Torq	Ang	Rot	R/L	.018×.025
上顎	1 1	+54	0	0	R/L	No.WVIWS-0001
	2 2	+50	0	0	R/L	No.WVIWS-0002
	3 3	+37	+9	0	R L	No.WVIWS-0004 No.WVIWS-0005
下顎	21 12	+41	0	0	R/L	No.WVIWS-0003
	3 3	+37	+3	0	R L	No.WVIWS-0006 No.WVIWS-0007

幅 (全サイズ) : 2.1mm


ID マーク

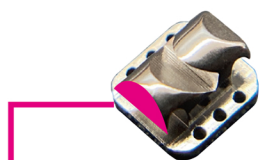

この部分に
ID マークがあります

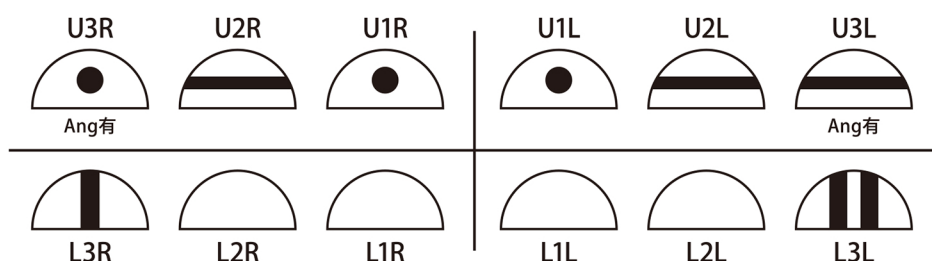


セットアップの際のボンディングについて

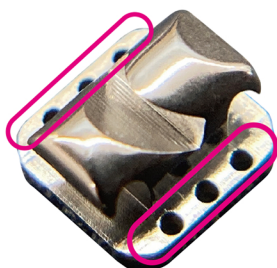

近遠心のボンディングホール (ボンディング力強化)

FLB リンガルブラケットにはボンディング維持力強化のため、ベース近遠心にボンディングホールが設計されています。

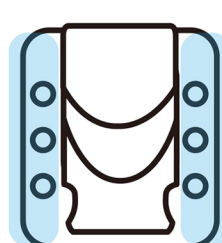

ボンディング時、圧接する際は、ホールにレジンを溢れさせ、ベースの上部をレジンで一層覆ってください。