

再使用禁止

HM-O101 電極

【禁忌・禁止】

併用医療機器


- ・時期共鳴画像診断装置（MRI装置）
- ・除細動器
- ・電気手術器（電気メス）

使用方法

- ・本品はディスプレイ品のため再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状

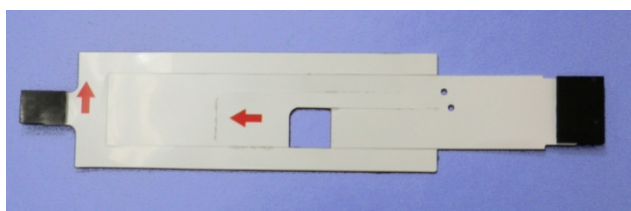

寸法：全長 180mm×全幅 35mm

原理

本品は単回使用の体表面電極であり、電気刺激と生体電位を収集する機能を併せ持つ導体です。

【原材料】

ベース：ポリエステル

粘着剤：ハイドロゲル

【使用目的又は効果】

- ・表に設置し、体表の電気信号を処理機器へ伝達する。

【使用方法】

準備

- ・電極装着部位を決める。
- ・電極装着部位を消毒液で拭く。
- ・包装から本品を取り出し部位に装着する。
- ・適用機種取扱説明書に従い電極を接続する。

使用方法

- ・本品が適用となる弊社が販売する誘発反応測定装置（筋電計）と合わせて使用する。
- ・終了後は、皮膚の損傷が無い様、電極の端からゆっくりと剥がす。
- ・使用後は医療廃棄物として処理する。

【使用目的又は効果】

重要な基本的注意

- ・本品を変形したり加工したりしないこと。

- ・心臓ペースメーカーや生命維持装置を利用している人には使用しないこと。
- ・皮膚の弱い者（アレルギー体質の者等）皮膚の形成が未熟および皮膚の弱い箇所には使用しないこと。
- ・傷口や炎症、皮膚障害のある部位には使用しないこと。
- ・皮膚に発赤、腫れ等の症状が現れた場合は、使用中止のこと。（皮膚びらんを起こし、まれに瘢痕をのこすおれがある。）
- ・本品が適用となる弊社が販売する機器以外には接続しないこと。
- ・電極の適切な接着性と感度を確実にするため、装着部は皮膚表面は完全に清掃すること。
- ・本品の取外しは慎重に行い、急激に取外さないこと。
- ・皮膚と電極との間の伝導性を損なわない様、装着時に粘着剤に触れないこと。
- ・検査の準備が整うまで、本品を開封しないこと。一度開封したら素早く使用すること。

【相互作用 併用しないこと】

併用禁忌

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険分子
磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）	MRI検査を行うときは、本品を患者から取外すこと	誘導起電力により局部的な発熱で患者が熱傷を負う事がある
除細動器	除細動を行うときは本品を患者から取外すこと	通電により電極に過度な電流が流れ、局部的な発熱で患者が熱傷を負う事がある
電気手術器（電気メス）	電気手術器を使用する場合、適用機種の説明書に従うこと	電気メスにより誤動作する危険性がある また、発熱で患者が熱症を負う事がある

【保管方法及び有効期限】

保管方法

- ・直射日光及び火気を避け、高温、多湿に成らない清潔な場所に保管すること。

有効期限

- ・包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

株式会社ハーメック

TEL 0276-30-4020

FAX 0276-30-4021

製造業者

APK Technology Co.Ltd（中国）