

【警告】

- 重度の局所環境障害を持つ患者への適用は医師の医学的知見を必要とする。
- 長時間の使用は身体が高熱状態に成る可能性がある。

【禁忌・禁止】

植込み型電子機器（例えばペースメーカー）を装着した患者も専門医の医学的知見がない場合は適用しない。


温度感覚の鈍い患者には適用しない。

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、家庭用温熱治療機器として使用するものである。ドームの中に横たわり着衣又は被着衣で使用する。治療温度をMAX60℃の範囲内で設定し、治療時間を最大60分まで設定することができる。発熱は、電熱により行う。

【構成】

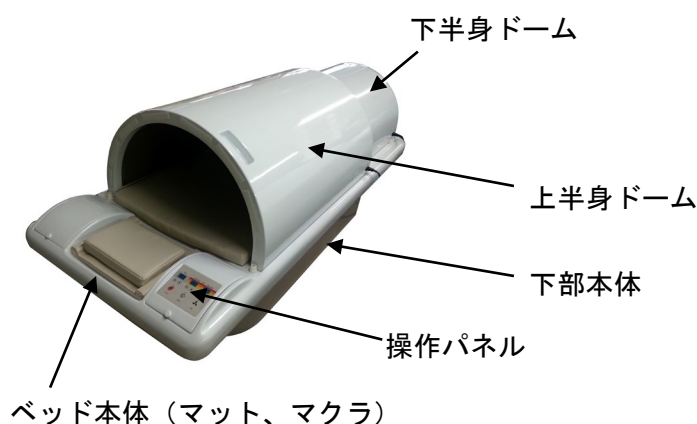

電源入力：250W 電源電圧：100V

電源周波数：50／60Hz

水の侵入に対する保護：IPX1

電撃に対する保護：クラスⅡ、BF形装着部

本体外装部の材質：FRP

本体の重量：96Kg

本体の寸法：長2300mm×幅900mm×高980mm

【原理】

電源を入れると耐熱の被覆の抵抗線が熱を発生し、発熱部が温くなる。温度センサーが組み込まれているので設定温度と実際の温度を比較し、温度制御する構造になっている。

【使用目的、効能、又は効果】電熱による温熱効果

一般家庭で使用する。こと。

【包装】 1台／1梱包

【品目仕様等】

項目	仕様（定格）
治療時間	5分～60分
治療温度	40℃～60℃

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前の準備

電源プラグをコンセントに差し込みます。

内部に異物等ないか上半身ドームをスライドさせ確認する。

患者はベットに横たわります。（仰向き、横向、うつ伏せ）

電源スイッチをNOにします。

2. 使用中

治療時間を設定（▲▼を押すと数値が変わります）します。

治療温度（上半身ドーム）を設定（▲▼を押すと数値が変わります）します。


治療温度（下半身ドーム）を設定（▲▼を押すと数値が変わります）します。

スタートボタンをONにして治療を開始します。

治療終了1分前にブザーが鳴ります。

治療が終わると時間設定表示が「00」に成り終了します。

【部位】

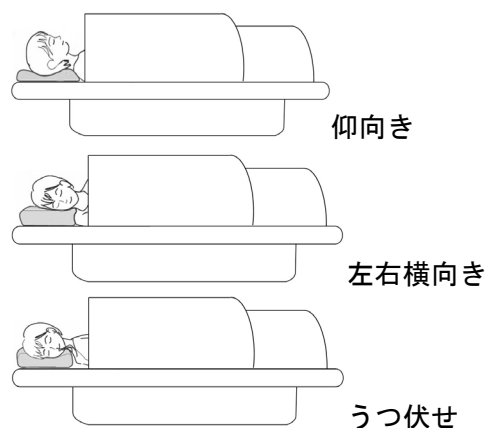

【使用上の注意】

- ・故障の原因になりますのでスチーム等で加湿して使用しない
- ・稼働中はドーム内部に直接肌を付けない。また、終了直後も同様に完全に冷えるまで触れない。
- ・稼働中は長時間にわたり上半身ドームを下半身ドーム側へスライドしたままの状態にしない。（滞熱の恐れあり）
- ・水平な場所に設置し、上に物を置かない。
- ・機器は鋭利なもの（カッター等）で傷を付けない。
- ・体調に合わせて使用する。
- ・改造、修理や分解等はしない。（保証期間中でも保証対象外）
- ・故障した時は製造販売元へ連絡のこと。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布を固く絞って拭き取り、必ずから拭きをする。（化学薬品は使用しない）

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・保管場所は、直射日光、高温多湿な場所を避ける。
- ・使用期間は5年間（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社 ハーメック
〒群馬県太田市由良町956-2
電話番号 0276-30-4020
製造業者 株式会社ハーメック