

2021 年 6 月(第 1 版)


類別及び一般的名称等 医 05 副木／16210000 手・指用副木  
一般医療機器

**オルフィットイーズ**(届出番号 27B2X00262000117)

---

【形状・構造及び原理等】

シート形状。最も硬く、耐久性に優れている。強度が必要なスプリント製作時に最適。

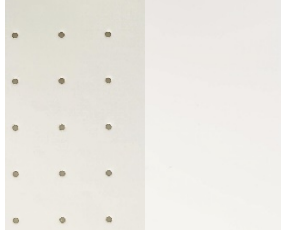

【使用目的又は効果】

60℃のお湯に入れることによって、製品が軟化し、患部へ容易に適合できる。温度が低下することによって、硬化し、製品が完成する。再度製品をお湯に入れることによって、100%の形状復帰が可能となる。

【使用方法等】

**\* 取扱説明書を必ず参照すること**

〔使用方法〕

- 1、60℃のお湯の中に、約 2～5 分間入れる。
- 2、製品が軟化し、患部へモールディングできる状態になる。
- 3、製品を患部に沿わせ、ご希望の形にする。
- 4、温度が低下することによって、硬化し、製品が完成する。

【使用上の注意】

1. 本製品は医師の処方により使用すること。使用にあたっては取扱説明書に従うこと。
2. 十分な換気がなされている場所で作業を行うこと。
3. 温めた製品で装着者が熱傷を負わないように充分注意すること。
4. 製品を直火で加熱しないこと。
5. 真夏の自動車の中や暖房器具の傍、サウナなどではスプリントが形状を失うので注意すること。
6. 製品を装着した状態で、長時間 50℃以上の環境にいる場合、皮膚がアレルギー反応を示す場合があるので注意すること。
7. 250℃以上加熱しないこと。
8. 取扱時に、静電気が発生する場合があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

室温 10℃から 30℃の乾燥した場所に元包装のままで水平に保管。また、直射日光に当たらない場所にて保管。

〔有効期間〕

3 年間

〔使用期間〕

医師の処方に従うこと

【取扱い上の注意】

1. めるめのお湯と液体せっけん、天然洗剤または練りはみがきを使用して、汚れを落とし、よくすすぐこと
2. 製品で製作した装具はオートクレーブ(加圧滅菌器)では滅菌できない。ガスで滅菌可能
3. 絶対に洗剤を使用しないこと
4. 洗剤や酸性の液体などに長時間製品を浸けておかないこと。コーティングフィルムに悪影響が及ぶ
5. 1 日に 1 度は手入れすること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

パシフィックサプライ株式会社  
072-875-8008(代)  
外国製造所  
Orfit Industries n.v.／ベルギー

取扱説明書等を必ずご参照下さい。