

添付文書

類別 : 機械器具 06 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用圧モニター JMDN コード : 70565000

デジタルマルチメーター

【禁忌・禁止】

- 本書に記載してある以外の目的で使用しないこと。
- 本品には 150cmH₂O を超える圧をかけないこと。
[破損のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

本品は人工呼吸器用回路の圧力を測定し、液晶ディスプレイに表示する圧モニターです。



外観図

<寸法および重量>

- 外観寸法 : $\phi 70.2 \text{ mm} \times 32.4 \text{ mm}$
- 重量 : 233g

<構造>

本品は「モニター本体」・「取付金具」から構成されています。

<電気的定格>

電撃に対する保護の形式による分類 : 内部電源機器
電源電圧 : DC 6V (3V リチウム電池 2 本)

【使用目的又は効果】

本品は、治療又は診断中に人工呼吸器用回路の圧力を測定する。

【使用方法】


人工呼吸器への取付けに際しては、必ず本品の取扱説明書を参照してください。

- 電池交換方法
電池残量が少なくなると【電池マーク】が表示されます。電池マークが表示された時は、新しい電池に交換して下さい。
 1. ハウジングから PDM ベゼル(枠)を外します。
 2. 極性に注意して、リチウム乾電池 (3.0V 1500mAh) を 2 個電池カセットに挿入します。

3. PDM ベゼルをハウジングに取付けます。
4. 電池を挿入すると自動的に電源が入ります。

● 使用方法

1. 圧力ポートに圧モニター用チューブを接続します。
2. 圧センサーが「10 cmH₂O 以上のサンプルを 1 回」もしくは「5 cmH₂O 以上のサンプルを 5 回」感知すると測定が開始されます。測定を開始すると LCD に「パルス振幅」「平均気道内圧」「頻度」「使用タイマー」が表示されます。
3. 「吸気圧 : 2.5 cmH₂O 以下」・「頻度 : 0 回」が 2.5 秒間継続すると自動的にスリープモード (表示が消えます) に切り替わります。

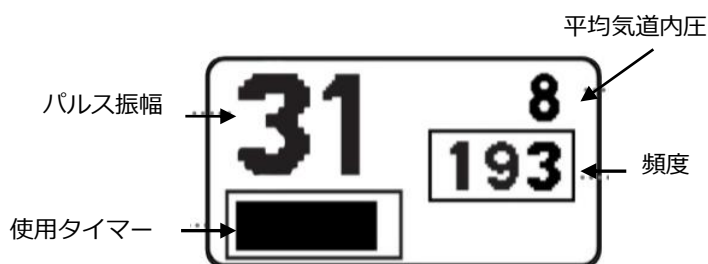

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品は、患者の診断において付加的に使用されるものです。臨床所見ならびに症状により総合的に判断してください。
- LCD 表示器が壊れている場合は使用を中止し、取扱いに注意してください。また、速やかに修理を依頼してください。
- 電池残量が少ない時は、電池マークが表示されます。新しい電池に 2 本とも交換してください。
- 圧モニター用チューブ内に水滴がある場合は除去してください。水滴でチューブ内が閉塞され、圧力が正しく測定できない恐れがあります。
- 分解・改造を一切しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管環境条件>

温度範囲 : $-20 \sim 55^{\circ}\text{C}$
湿度範囲 : 10 ~ 95% (結露なきこと)

- 水のかからない場所、傾斜、振動、または衝撃などのない場所に保管してください。

【取扱い上の注意】

- 落下等の衝撃によりセンサーが破損することがあります。破損したセンサーは使用しないでください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

- 本品を正しく使用するために、1 年に一度必ず定期点検(校正)を実施してください。
- 本品を、水や洗剤の中に浸けないでください。
- 使用する前に、ひびや変形等がないか点検してください。異常が認められる場合は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

パーカッショネア・ジャパン株式会社

〒108-002 東京都港区芝浦二丁目 3 番 31 号

TEL03-6722-6785 FAX03-6722-6786

製造業者

パーカッショネア・コーポレーション (米国)

PERCUSSIONAIRE CORPORATION