

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル 34077000


meeta（ミータ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

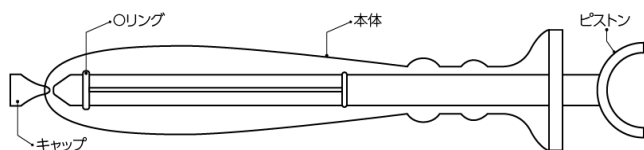

各部の名称及び成分

名称	成分
本体・ピストン・キャップ	ABS 樹脂
O リング	シリコン樹脂

【使用目的又は効果】

1. 本品は膈内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【使用方法】

(A) または (B) の方法にて行うこと

(A)

1. 本体にキャップが付いていることを確認し、精液を流し込む。
2. O リングが装着されているピストンを本体に差し込む。
3. キャップを上に向けてから開け、開口部から精液が見えるまでピストンをゆっくり押し込む。
4. カテーテルを膈内に挿入する。
5. 精液の注入後、カテーテルを抜去する。

(B)

1. 本体からキャップをはずし、本体に O リングが装着されているピストンを差し込み最後まで入れ込む。

2. 精液をゆっくり吸引する。
3. カテーテルを膈内に挿入する。
4. 精液の注入後、カテーテルを抜去する。

【使用上の注意】

- 使用目的以外の使用はしない。
- 本品は添付文章を読み、指示に従って使用する。
- 開封は使用直前に行うこと。
- 万一、包装が破損している場合は使用しないこと。
- 本品は単回使い捨て商品なので、1 回限りに使用のみで再使用しない。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しない。
- 精液は採取し液状化（10～20 分程度放置）後、速やかに注入する。
- 痛みを感じるときは無理せずに使用を中止する。
- 使用に不安を感じる場合は、使用前に専門医に相談する。

【保管方法及び有効期間】

<保管方法>

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 本品は指示された方法で保管すること。不適切な保管は劣化や破損の原因になる。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

<廃棄方法>

使用後は各自治体のルールに従って分別し捨てること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

パスクリエイト株式会社 ベビーライフ研究所

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-8-4 近鉄新宿御苑ビル 9 階

TEL：0120-905-147（ベビーライフ研究所カスタマーセンター）

E-mail：info@babylife-lab.com