

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 (13929001)

再使用禁止

Magellan シリンジ


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は外筒、プランジャ、キャップで構成する。筒先は雄嵌合のルーアロックテーパーである。

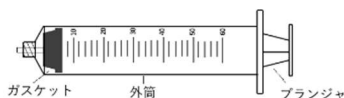

*2. 原材料

ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、
MBS 樹脂、ポリイソブレン、スチレンブタジエンゴム、
シリコーン

【使用目的又は効果】

本品は、液体又はガスを注射・注入または引き抜くために用いる。

【使用方法等】

- ① 包装を開封し、本品を取り出す。
- ② 必要に応じ筒先に注射針やチューブを接続し、プランジャを引き液体(薬剤又は血液など)又はガスを引き抜く。
- ③ 本品内に充填した薬剤等を投与又は別の容器に注入する場合は、プランジャを押し筒先から薬剤等を放出させる。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・ 本品の容量以上の液体を注入しないこと
- ・ プランジャは目盛線を超えて引き抜かないこと [液漏れが生じる可能性があります]
- ・ プランジャはまっすぐ引くこと [斜めに引いた場合、ガスケットの密着性が悪くなり、液漏れが生じる可能性があります]
- ・ 併用する医療機器との接合において、緩みがないよう注意すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 薬液の吸引後は速やかに使用すること [薬液の結晶化により、詰まる可能性があります]
- ・ 造影剤の高圧注入には使用しないこと [破損する可能性があります]

2. 併用注意

- ・ シリンジポンプに使用する場合は、予め適合性を確認すること [正しく作動できない場合があります]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに中止、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業社及び製造業社の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ハイレックスメディカル

TEL 03-6659-3428

製造業者

Arteriocyte Medical Systms, Inc (米国)