

類別: 器具器械 5 8 整形用器具器械
一般医療機器 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具(JMDNコード 70965001)

ディプスゲージ2710


*【禁忌・禁止】

本品はインプラントホール形成のためのイニシャルホールを形成する際に他の器具と共に使用する。従って、本品を初めて使用する場合には、必ず事前に講習を受講し術式を十分に把握し取扱い方法等に習熟した上で使用すること。

*【形状・構造及び原理等】

品番: DG2710-1

DG2710-2

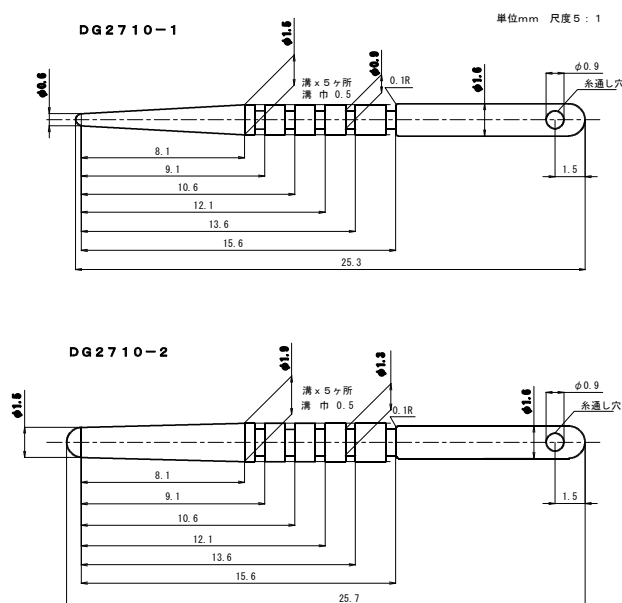

母材の材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、再使用可能である。

*【使用方法等】

インプラントイニシャルホール形成後、ディプスゲージ2710を挿入し、レントゲン写真を撮影し、残存歯や骨の解剖学的形態及び他のインプラントの位置関係を確認する。

*【使用上の注意】

1. 誤飲の予防: 誤飲を防止するため、ゲージ端部の糸通し穴に縫合糸を結びつけ、安全を確保した上で器具を使用すること。
2. 使用前の注意: 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
3. 洗浄、消毒、滅菌上の注意:
 - ・使用後は、超音波で洗浄した後加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器など)等で適切な滅菌処理を行うこと。
 - ・加熱滅菌器の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥

は、器具が変質または変色することがある。

・乾熱滅菌及び塩素系の消毒液に浸漬しての滅菌は行わないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- ・電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- ・「もらいさび」を防ぐため、下記のことにも注意すること。
 - ①錆びている器具と一緒に保管しないこと。
 - ②化学薬品と一緒に保管しないこと。
 - ③消毒器、滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆や汚れに注意すること。
- ・本品は歯科医療従事者が適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名: 株式会社日向和田精密製作所

製造業者名: 株式会社日向和田精密製作所

緊急連絡先: TEL0428-24-3711