


類別: 歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 一般の名称: 歯科用ダイヤモンドバー (JMDNコード 16670000)

T. K. ロングバー

* 【禁忌・禁止】

1. 増速FGコントラを使用すること。それ以外の器具では絶対に使用しないこと。通常のエアータービンハンドピースでは、タービンが破損したり、バーが抜けたりする恐れがあるので使用しないこと。
2. ハンドピースにバーを挿入する場合、ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクをチャックの奥底まで確実に挿入すること。
途中で止めての使用は危険なので、絶対にしないこと。
3. 器具を落下させないこと。又、強い衝撃を与えないこと。

【形状・構造及び原理等】

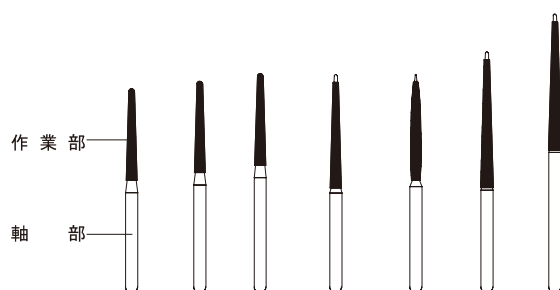

品番	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
全長(mm)	27.0	28.0	29.0	29.0	29.0	32.0	37.0
ダイヤモンド長(mm)	12.0	12.0	12.0	15.0	14.0	18.0	18.0
先端径(mm)	0.8	0.8	0.8	0.4	0.15	0.4	0.4
元径(mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	(最大)1.3	1.7	1.7
用途	根管形成 支台歯形成 埋伏智歯切断		根管形成				

軸の規格: FG 径 1.6mm

ダイヤモンド粒度: #140/170 (天然ダイヤモンド)

【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具。

* 【使用方法等】

使用器具: 増速FGコントラハンドピース

使用最高回転数: 使用目的に合わせて使用最高回転数を選択し、使用器具を正しく設定して使用すること。

根管形成: 10,000回転 (min⁻¹) 以下で使用する。

支台歯形成: 80,000回転 (min⁻¹) 以下で使用する。
埋伏智歯切断

【使用上の注意】

- 1 誤飲の予防: 器具そのもの、破折片等の誤飲を防止するための処置を取った上で器具を使用すること。

2. 装着後の注意: 装着後はバー先端部への軽微な接触でもハンドピース等の荷重が加わり、大きな曲げの力がバーに掛かるので装着後の取扱いには十分に注意すること。
3. 使用前の注意: 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
使用前に、あらかじめ患者の口腔外で回転させブレの無いことを確認すること。
4. 使用時の注意: 発熱により火傷する恐れがあるので、発熱を避けるため十分な注水下、フェザータッチで断続的に使用し、強く押しつけて使用しないこと。
5. 保護眼鏡等の使用: 使用時は目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。
6. 洗浄、消毒、滅菌上の注意:
 - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・オートクレーブ滅菌器を用いて滅菌をする。
 - ・加熱滅菌器 (オートクレーブ滅菌器など) の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法、用量を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・乾熱滅菌及び塩素系の消毒液に浸漬しての滅菌は行わないこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

- ・洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- ・滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、滅菌の有効保管期間の管理をすること。
- ・電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- ・「もらいさび」を防ぐため、下記のことには注意すること。
 - ①錆びている器具と一緒に保管しないこと。
 - ②化学薬品と一緒に保管しないこと。
 - ③消毒器、滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆や汚れに注意すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名: 株式会社日向和田精密製作所
製造業者名: 株式会社日向和田精密製作所
緊急連絡先: TEL0428-24-3711

文書番号: 添9003