


【警告】

- ・装置、被滅菌物は高温になるため やけどに注意の事。
- ・温度が異常に上昇した時、電源を切る事。


【禁忌・禁止】

- ・装置内に引火性、爆発性物質を入れて使用しない事。
- ・密閉された物はいれない事。
- ・水分を取除いてから入れる事。

【形状・構造及び原理等】

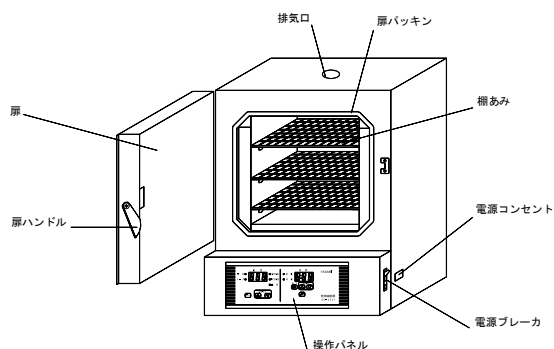

本体外観

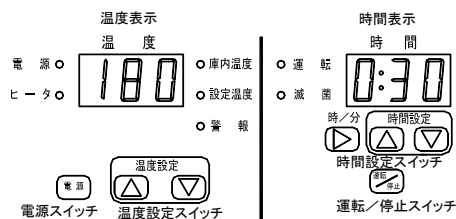

操作パネル

本器は、本体及び附属品で構成されている。附属品として棚あみ、棚あみ用のフック及び電源コードがある。操作パネル上のスイッチにより、滅菌温度及び時間の設定ができる。

運転が開始されると、庫内下部のヒータが加熱され、同時に循環ファンにより、加熱空気を、庫内を循環させる。庫内の温度が滅菌温度に到達すると、その温度を一定に保もち、設定時間維持する。設定時間が経過すると、時間表示部に「END」が表示され滅菌が終了した事を知らせる。ヒータは、OFFとなり、循環ファンは作動し続け、槽内を冷却する。

【使用目的、効能又は効果】

微生物を不活性化する滅菌剤として湿気の不在下で高温を利用し、手術器具等の医療用具を滅菌するために用いる。

【品目仕様等】

電氣的

定格電源電圧及び周波数： AC100V±10%，単相，50/60Hz
最大定格電力： 800W（8A）
電磁両立性（EMC）規格に適合

寸法及び重量

外寸法： 410Wx535Hx365D mm
内寸法： 250Wx250Hx250D mm
重量： 22 kg

【操作方法又は使用方法等】

手順の詳細は、取扱説明書の第3章操作方法を参照の事。

- ① 電源を入れる。
- ② 扉を開き、被滅菌物を間隔を空け入れる。
- ③ 扉を閉じる。
- ④ 滅菌温度 及び 滅菌時間を設定する。
- ⑤ 「運転/停止」スイッチを押す。

滅菌運転が始りまる。滅菌が完了すると、時間表示部に「END」が表示され終了を知らせる。

- ⑥ 放置して、庫内温度の冷却を待つ。
- ⑦ 冷却後、扉ハンドルを引き、扉を開ける。
- ⑧ 被滅菌物を取り出し、扉を閉める。
- ⑨ 電源を切る。

【使用上の注意】

注意事項の詳細は、取扱説明書を参照の事。

設置環境

- ・温度5～35℃，湿度 10～85%の結露のない室内
- ・本器の上側、後側及び左右は各10cm以上開ける。
- ・液体がかかったり、腐食又は可燃性ガスの発生のない所

使用上の注意

- ・装置、被滅菌物は高温になるため、やけどに注意の事。
- ・装置内に引火性、爆発性物質を入れて使用しない事。
- ・密閉された物はいれない事。
- ・水分を取除いてから入れる事。
- ・必要な滅菌条件は、バイオロジカルインジケータにより決定の事。
- ・運転ごとにケミカルインジケータの変色により滅菌状態を確認の事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法

- ・温度5～35℃，湿度 10～85%の結露のない室内
- ・液体がかかったり、腐食又は可燃性ガスの発生のない所
- ・ほこりを防ぐためにカバーをする。
- ・電源コードのプラグはコンセントから外す。

取扱説明書を必ず参照の事

耐用期間

販売後 8 年間 [自己認証による]

ただし、使用状況、管理状況により異なる。

【保守・点検に係る事項】

詳細は、取扱説明書第 4 章を参照の事。

ー庫内は常に清潔に保つ事。

ー汚れは、柔らかい布で拭取る事。

ー汚れがひどい場合、中性洗剤で拭取り、その後湿った布で洗剤分を拭取る事。

【包装】 1 台

【製造販売業者及び製造業者者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社 平山製作所

〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5

電話番号 048-735-1241

ファックス 048-733-2384

サービス部

電話番号 048-735-1222

ファックス 048-733-2384

製造業者 GEMMY INDUSTRIAL CORP.

製造国 台湾