

チャンネルクリーナーカートリッジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】**


- ・再使用禁止

使用方法

- ・2 チャンネル内視鏡、側視型内視鏡、斜視型内視鏡、超音波内視鏡、起上台を有する内視鏡及びその他特殊形状の内視鏡には使用しないこと。[特殊形状部分の洗浄が十分に行えないとともに、内視鏡の故障原因となる可能性がある。]
- ・内視鏡チャンネル内に裂け、穴、狭窄等の傷及び変形を有する内視鏡には使用しないこと。[傷付近では洗浄が十分に行えない可能性があり、また、狭窄部付近においては球状ブラシが詰まる可能性がある。]
- ・吸引口にキズ又は変形がある内視鏡には使用しないこと。[吸引圧が落ち吸引できない可能性がある。]
- ・汚染物（粘液・血液等）が乾燥状態で付着している内視鏡には使用しないこと。[洗浄が十分に行えない可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】**


球状ブラシが、スコープ固定部先端の球状ブラシ固定部に充填されている。

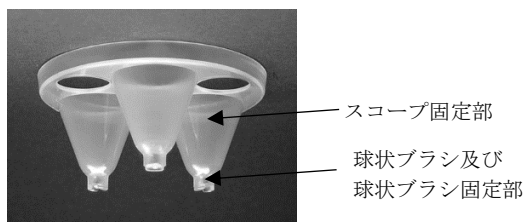

型 名	適用可能な内視鏡チャンネル口径	カートリッジカラー
CEB-1120	2.0mm	グリーン
CEB-1124	2.4mm	ブルー
CEB-1128	2.8mm	イエロー
CEB-1132	3.2mm	オレンジ

<原理>

内視鏡検査直後に、球状ブラシを内視鏡洗浄用の酵素洗剤液等（以下、洗剤液という）とともに吸引することで、内視鏡チャンネル内表面をブラッシングする。

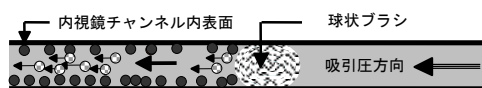

- チャンネル内表面に付着した汚染物
- ⊗ 球状ブラシにより剥がされた汚染物

【使用目的又は効果】

再使用可能な手術器具の除染のために用いる。

【使用方法等】**

<準備>


1. 本品に変形や破損がないこと、球状ブラシ固定部に球状ブラシがそれぞれ 1 個充填されていることを確認する。

2. 専用カップ（別売品）に割れや穴がないことを確認する。



<本品の組立>

1. 専用カップの底を上向きにして置く。
2. 本品に付属しているカートリッジ押さえ（薄白色）を専用カップの底にのせる。
3. カートリッジ押さえの上に、本品をのせる。
4. 別の専用カップを上を被せる。被せた専用カップの底から 2 段目の線まで静かに挿入し、本品を専用カップに固定する。

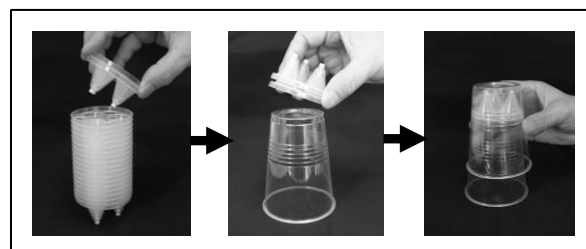


（カートリッジ押さえの上に本品をのせ、専用カップを被せることで、球状ブラシの離脱を防止し、また、本品の専用カップ装着を補助する。）

5. 1. の組立に使用した専用カップを取り外す。
6. 組立に使用した専用カップ及び本品を装填した専用カップに、それぞれ 200ml 以上の洗剤液をゆっくりと注ぐ。

<確認用トラップ（別売品）の設置>


1. 内視鏡ビデオスコープ（以下、スコープという）のコネクタ部の吸引口金と吸引ピンの間に確認用トラップを設置する。
2. 本品を使用する際は、確認用トラップのダイヤルを流入/排出口に対し直角にする。

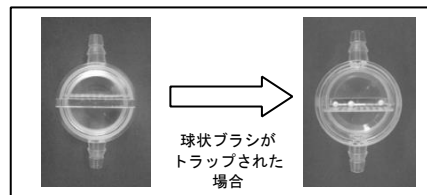

<使用方法（ベッドサイド洗浄）>

1. スコープの挿入部の外表面についた汚れを、洗剤液を含んだ清潔なガーゼ等で拭き取る。
2. スコープの挿入部先端を組立に使用した専用カップの中に入れ、スコープの操作部の吸引ボタンを押し込み、洗剤液を 200ml 以上吸引して、吸引・鉗子チャンネル内のフラッシュを行う。（洗剤液は、5～6 回に分けて断続的に吸引を行うことで、除染効果が高まる。）
3. 本品のスコープ固定部にスコープの挿入部先端を挿入し、軽く押し当て、スコープの操作部の吸引ボタンを押し込み、1 個目の球状ブラシを吸引する。
4. 球状ブラシが吸引・鉗子チャンネル内を通過し、確認用トラップに回収されたことを確認する。

5. 同様に、2 個目の球状ブラシを吸引する。
6. 3 個目の球状ブラシを吸引し、専用カップ内の洗剤液をすべて吸引する。
7. 最後に、吸引ボタンを押して約 10 秒間空気を吸引して吸引洗浄を終了する。

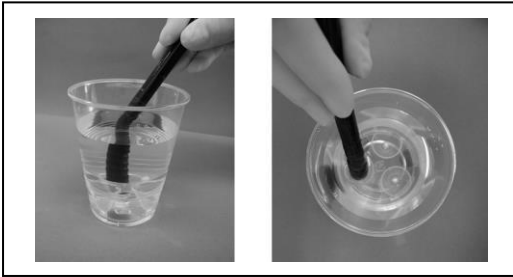

8. 吸引したすべての球状ブラシが吸引・鉗子チャンネル内から排出されたことを確認する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・直視型内視鏡にのみ使用すること。
- ・使用する際は、スコープ吸引圧を最大にすること。－40kPa 以上を推奨する。[吸引圧が弱いと、球状ブラシが吸引・鉗子チャンネル内に詰まる可能性がある。]
- ・球状ブラシを吸引する際には、本品のスコープ固定部にスコープの挿入部先端を奥までしっかりと押し込むこと。[押し込みが十分でない場合には、球状ブラシが詰まる可能性がある。]
- ・洗剤液を注いだ後の専用カップは、丁寧に扱うこと。衝撃や振動により、球状ブラシが球状ブラシ固定部から脱落したり、外れて浮きあがることがある。(但し、球状ブラシ固定部から脱落したり、浮きあがった状態の球状ブラシを吸引しても、洗浄効果に問題はない。)

【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・使用する際には、併用する内視鏡用器具の添付文書等を参照し、適合性を確認すること。

<不具合・有害事象>

- ・洗浄不良

【保管方法及び有効期間等】**

使用期限:外箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社平田精機
〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17
TEL 047-386-2101

製造業者:株式会社カミノ