


機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡固定具 37090030

ホープ カメラホルダー 手動式

【形状・構造及び原理等】

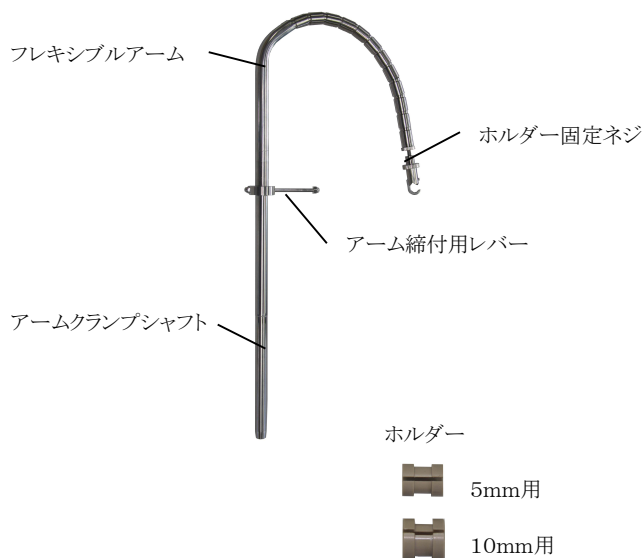

＜原理＞

手術台等に固定したアームの先端部に内視鏡等を取り付けることにより、意図する位置に保持する。

【使用目的又は効果】

手術時に腹腔鏡、又は各種内視鏡、処置具等を意図する位置に保持又は調整する。

【使用方法等】

＜使用前＞

- ・本品は未滅菌品のため、使用に際しては【保守・点検に係る事項】を参照して、必ず洗浄を行い、所定の方法で滅菌する。
- ・手術前に【保守・点検に係る事項】を参照して、点検を行う。

＜使用方法＞

1. 手術台等のレールに取り付けられたレール固定金具にアームクランプシャフトを挿入し、レール固定金具を固定する。
2. フレキシブルアーム先端にホルダーを取り付け、内視鏡等を差し込み、ホルダー固定ネジを反時計方向に回し固定する。
3. フレキシブルアームを固定したい位置に誘導し、アーム締付用レバーを反時計方向に回し固定する。

【保管方法及び有効期間等】*

- ・滅菌済の状態での保管する際には、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に動作及び外観を点検し、異常が認められるときは使用しないこと。
- ・故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
- ・使用後は、速やかに洗浄し、高圧蒸気滅菌またはエチレンオキシドガス滅菌すること。
- ・洗浄にあたっては院内の規定に従い、また、滅菌にあたっては滅菌器の取扱説明書を必ず参照すること。
- ・修理点検のために本品を返送する場合は、必ず洗浄・滅菌してから発送すること。

＜洗浄方法＞

1. 使用後速やかに、洗浄溶液に浸漬する。(時間、濃度、温度については、洗浄剤の製造販売元の指示に従うこと。)
2. 医療用中性洗剤を用いて、柔らかいスポンジでよく洗い、血液や微細組織片など、こびりついた成分を全て取り除く。
3. 管内には適切な洗浄ブラシ・シリンジ等を用いて洗浄する。
4. 完全に清掃されていることを確認する。
5. 洗浄剤の残留がないよう蒸留水・脱イオン水で十分にすすぐ。
6. 必要に応じて自動洗浄器で洗浄する。(洗浄方法については、自動洗浄器の製造販売元の取扱説明書を必ず参照すること。)
7. 格納できない場合は、アームクランプシャフトを回し、フレキシブルアームと分解する。
8. 適切なラックを使用し、他の器具と重なり合わないように入れる。
9. 強アルカリ性または強酸性の化合物を含有する薬剤は、本品を腐食させる恐れがあるため使用しないこと。

＜滅菌方法＞

- ・高圧蒸気滅菌(オートクレーブ滅菌)またはエチレンオキシドガス滅菌する。(時間、温度及び圧力の設定は、滅菌器の製造販売元の取扱説明書を必ず参照すること。)

オートクレーブ滅菌 プレバキューム式 134℃ 5分 推奨

＜点検項目＞

- 手術前に必ず作動チェックをして、器具の安全性を確認すること。
- ・汚れ、曲がり、傷、錆、がたつき等がないか

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17

TEL 047-386-2101