


機械器具(53) 医療用消息子
一般医療機器 手術用消息子 32870001

ネオレクタプローブ

【形状・構造及び原理等】

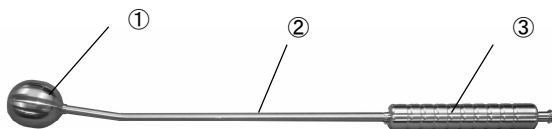

	名 称	材 料
①	プローブ	ステンレス鋼
②	シャフト	ステンレス鋼
③	ハンドル	

<原理>

洞、瘻、その他の空洞又は創部に本品を挿入して組織等を探り、診断及び治療を行う。

【使用目的又は効果】

洞、瘻、その他の空洞又は創部を探索するために用いる。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- 使用前に、【保守・点検に係る事項】を参照して、洗浄及び滅菌する。
- 使用前に、【保守・点検に係る事項】を参照して、点検を行う。
- ハンドルを手に持ち、プローブを挿入して組織等を探索する。
- ハンドルに付属された活栓にシリンジを装着し、空気や造影剤等を組織内に注入し、組織損傷の有無を確認する。
なお、空気や造影剤等を注入する際は、組織内の圧が高くなりすぎないように注意すること。

【使用上の注意】*

- 本来の使用目的以外に使用しないこと。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時無理に過度な力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】*

- 滅菌済の状態では保管する際には、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に動作及び外観を点検し、異常が認められるときは使用しないこと。
- 使用後は、速やかに洗浄し、高圧蒸気滅菌またはエチレンオキシドガス滅菌すること。
- 洗浄にあたっては院内の規定に従い、また、滅菌にあたっては滅菌器の取扱説明書を必ず参照すること。

<洗浄・滅菌方法>

- 洗浄溶液に浸漬する。(浸漬時間や濃度については、洗浄剤の製造元の指示に従うこと。)
- 洗浄液は、医療用中性洗剤を使用する。アルカリ性、酸性の洗浄剤を使用する場合には、残留物が残らないように純水にて十分にすすぎを行うこと。
- 柔らかいスポンジでよく洗い、血液や微細組織片など、こびりついた成分を全て取り除く。
- 洗浄剤の残留がないよう洗浄剤の残留がないよう蒸留水・脱イオン水で十分にすすぐ。
- すぐに乾燥させる。
- 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ滅菌)またはエチレンオキシドガス滅菌する。(時間、温度及び圧力の設定は、滅菌器の製造販売元の取扱説明書を必ず参照する。)

オートクレーブ滅菌 プレバキューム式 134℃ 5分 推奨

<点検方法>

使用前に必ず器具の安全性を確認すること。

- ・プローブにがたつきや不具合がないか
- ・汚れ、曲がり、傷、がたつき等がないか

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社平田精機
〒273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 2-10-17
TEL 047-386-2101