


器68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器（コード：10201000）

コスパ 平均値咬合器

【形状・構造及び原理等】

1)形状

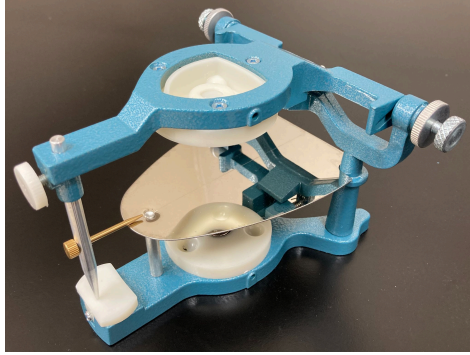

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106

2)原材料

アルミニウム合金、スチール、ステンレス鋼、ABS樹脂、他

【使用目的又は効果】

予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を取り付け、下顎運動の一部又は全部をシミュレートするのに用いる。

【使用方法等】

通法に従い上下顎模型を本品に装着し、下顎運動をシミュレートする。

【使用上の注意】

【使用方法】

- 使用前に、製品の点検（【保守・点検に係る事項】参照）を行い、異常が確認された場合は使用しないこと。
- 破損等の原因となるので、本品に対して二次加工(改造)は、絶対に行わないこと。
- 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししない事。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、塵やホコリのない清潔な場所に保管すること。
- “もらいさび”を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 電気分解を要因とした錆が発生する可能性があるため化学薬品及び材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に、以下について点検を行い、異常が確認された場合は使用しないこと。
 - 石膏やワックス等の付着物がないか。
 - 破損、ヒビ、傷、腐食（錆）等がないか。
 - 各部品の動きは正常か。
- 腐食（錆）の原因となるので、洗浄の際は研磨剤、金属ウール、金ブラシを使用しないこと。