

器67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム（コード：11155010）

ラテックス ラバーダム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞

- 本品に使用されている材質（天然ゴム）に対し、アナフィラキシー症状や発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者

＜使用方法＞

- 本品に使用されている材質（天然ゴム）に対し、アナフィラキシー症状や発疹、皮膚炎などの既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- 再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】


直射日光や高温多湿を避け、室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ビーディーアール
愛知県名古屋市中白区原4-106

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

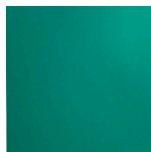

サイズ	厚さ	色調
5×5インチ (約127×127cm)	薄手	ブルー・グリーン
	中厚手	
	厚手	
6×6インチ (約152×152cm)	薄手	
	中厚手	
	厚手	

2.原材料

天然ゴムラテックス

3.原理

本品にラバーダムパンチで穴をあけ、歯牙に被せることにより、口腔内の手術野を隔離する。

【使用目的又は効果】

歯科治療中の口腔内における手術野の隔離に用いる。

【使用方法等】

- ラバーダムパンチで本品に穴をあける。
- 本品にクランプを装着して歯牙に固定する。
- ラバーダムフレームで本品を張り広げた状態で固定する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 本品の使用により、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品の使用により、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 破損、変形等のあるものは使用しないこと。
- 薬品や溶剤によっては、本品に付着すると膨潤したり浸透したりする場合があるので、注意して使用すること。