

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001


イリゲーションチューブ シロプロ L 用

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

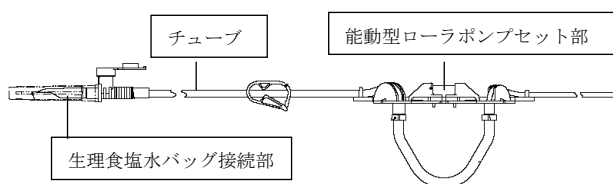

2. 作動原理

能動型医療機器のローラポンプがチューブを押し潰しながら回転することにより、チューブ内に満たされた生理食塩水がチューブ先端に押し出される。押し出された生理食塩水は、チューブ先端を通じて専用の能動型医療機器のハンドピース等に供給されて、患者の身体の特定の部分又は部位への注水・洗浄を行うことができる。

3. 原材料

ポリ塩化ビニル/シリコーンゴム/プラスチック

【使用目的又は効果】

本品は、患者・ユーザーの身体の特定の部分又は部位への注水・洗浄を行うために、専用の能動型医療機器とともに用いるパッケージ品である。

【使用方法等】

- 汚染されないよう慎重に包装から取り出す。
- キャップを外し、生理食塩水バッグ接続部を生理食塩液バッグに接続する。
- **** 生理食塩水バッグはゴム栓タイプを使用し、ゴム栓の○印箇所につっくり、まっすぐいっぱいの深さまで刺通し、漏れの無いことを確認する。(開栓型タイプは水漏れの原因となるため使用しない事)
- チューブを能動型医療機器のローラポンプにセットする。
- チューブの先端を能動型医療機器のハンドピース等にセットする。
- 能動型医療機器を操作し、患者の特定部位へ注水・洗浄を行う。
- 本品は一回限りの使用で再使用はできない。使用後は感染に注意しながら廃棄する。

* 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 本品は一回限りの使用で再使用はできない。
- ローラポンプを備えた専用の能動型医療機器と接続すること。
- 能動型医療機器の操作方法を確認してから使用すること。
- 医療従事者以外使用をしないこと。
- 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。

- 万一、包装材料、製品に破損・汚損等の異常が認められた場合は使用を中止すること。
- 開封後の操作は無菌的に行うこと。
- 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

〔使用注意〕

- 本品は一回限りの使用で再使用はできない。
- 接続部からの漏れがないか常に確認すること。漏れが認められた場合は使用を中止し、新しい製品に交換すること。
- 使用時に強く引っ張ったりせず、ゆるみ、ねじれに注意を払うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

** 有効期間

外箱または個別包装の表示を参照。(自己認証による)

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビエン・エア・アジア株式会社
東京都豊島区池袋 2-40-12
西池袋第一生命ビルディング 10F
電話：03-5954-7661

製造業者：

Bien-Air Dental SA Le Noirmont factory (スイス)
Rue de l'Ouest 2b 2340 Le Noirmont Switzerland
Tel：+41(0)32 953 3535

取扱説明書を必ず確認してください。