

機械器具 12 理学診療用器具
高度管理医療機器 自動植込み型除細動器
高度管理医療機器 デュアルチャンバ自動植込み型除細動器

JMDN コード：35852000
JMDN コード：37265000

イリヴィア Neo 7 ICD ProMRI

（条件付 MRI 対応）

再使用禁止

**【警告】

1. 併用医療機器

- 1) 本品を植込んだ患者に【使用上の注意】2. 相互作用 2) 併用注意の項に記載されている医療機器を使用した場合は、使用後に本品の機能が正常であるかを確認すること。[電磁干渉等による機能不全が生じている可能性がある。]
- 2) 本品の植込み時に閾値測定等リードを介して使用するテスト装置は CF 形のものを使用すること。また、患者周辺の AC 電源から電気を供給している機器は、必ず正しくアースを接続すること。[外部装置からの漏れ電流により、心筋の損傷や不整脈が生じることがある。]

2. 使用方法

- 1) MRI 設定中は VT/VF の検出及び治療（抗頻拍ペーシング及びショック治療）が行われない。MRI 設定中は除細動が必要な不整脈が発生した際に体外式除細動器が直ちに使用可能となるように準備しておくこと。
- 2) ペーシングと自己脈が競合していないことを確認すること。[ペースメーカ起因性不整脈が発生することがある。]
- 3) 患者毎に適切な間隔にてフォローアップを行い、ペーシング閾値、センシング閾値、リードインピーダンス等を測定すること。また、フォローアップの結果によっては、頻拍検出パラメータの再評価を行うこと。[閾値の上昇、リード固定位置の移動、リード損傷等によるペーシング不全やセンシング不全、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが発生することがある。]
- 4) 速い心拍によって虚血性心疾患等の増悪が予想される患者に対し、必要以上に高いレートでペーシングしないこと。[虚血性心疾患等を誘発することがある。]
- 5) 本品植込み術中、又は摘出術中は、ショック治療をオフ（「VT/VF 検出（Detection）」及び「治療（Therapy）」の状態が「無効（Disabled）」）に設定すること。[本品又は除細動電極に触れている時に除細動ショックが出力されると強力な電気ショックを受けることがある。]
- 6) 体外式除細動器を準備し、心肺蘇生術を遅滞なく実施できる準備が整っていない限り本品の試験、植込み又は植込み後の試験を行ってはならない。
- 7) 磁気共鳴画像診断装置（MR 装置）は BIOTRONIK 社の条件付き MRI 対応機器のみを植込んだ患者に対して、特定の条件下において使用可能である。MRI 検査の実施にあたっては【使用方法等】4. MRI 撮像可能条件（1. 5T 装置を使用する場合）又は 5. MRI 撮像可能条件（3. 0T 装置を使用する場合）を満たす場合のみとすること。
- 8) MRI 検査は、関係学会の定める施設基準を満たす施設のみで可能であり、検査にあたっては実施条件を厳格に遵守すること。
MRI 検査を実施するにあたり、循環器医師、放射線科医師、診療放射線技師（または臨床検査技師）、ならびに臨床工学技士（または臨床検査技師、あるいは看護師）の各々は所定の研修を受けること。
- 9) MRI 対応植込み型デバイスに関する情報や注意事項について、患者への教育を徹底すること。

【禁忌・禁止】

1. 適用対象（患者）

- 1) 房室伝導障害を有する患者に対する心房単腔ペーシング（AAI（R）ペーシング）を行わないこと。[ペーシングによる効果が発現しない。]
- 2) 自己調律とペーシングが競合するような場合の非同期ペーシングを行わないこと。[ペースメーカ起因性不整脈が発生することがある。]
- 3) off モードは、ペースメーカに依存している患者や、僅かな期間でもペースメーカの機能が停止すると影響を受ける可能性のある患者には使用しないこと。[ペーシングが行われない。]
- 4) 慢性心房粗動、慢性心房細動を有する患者、PMT（Pacemaker Mediated

Tachycardia）を引き起こす緩慢な逆行性伝導を有する患者に対する DDD（R）/VDD（R）ペーシングを行わないこと。[同期して高レートの心室ペーシングとなる。（心房トラッキング）]

- 5) ペースメーカ症候群の患者、逆行性伝導又は心室ペーシングの開始と共に動脈圧が低下する患者に対する心室単腔ペーシング（VVI（R）モードによるペーシング）を行わないこと。[適切な血行動態を維持できない。]

2. 併用医療機器（【使用上の注意】2. 相互作用 1) 併用禁忌の項参照）

- 1) MRI 撮像可能条件を満たさない場合の MRI 検査。[本品の故障、非同期モードへの移行、ペーシングの抑制、ペーシングレートの上昇、不適切な頻拍の検出、不適切な頻拍の治療などが起きる可能性がある。]
- 2) 鍼電極低周波治療器（電気利用の鍼治療）[オーバーセンシングによりペーシングが抑制されることがある。]
- 3) 高周波/低周波治療器の実施。[ペーシングの抑制、あるいは基本レートによる非同期ペーシングへの移行となることがある。エネルギーが高いと本品が破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼することがある。]
- 4) 低周波治療器（経皮的電気刺激装置：TENS）[ペーシング出力が抑制されたり、本体のモードが非同期モードに移行する可能性がある。]
- 5) マイクロ波治療器（ジアテルミー）[発生する熱によって故障する場合がある。]
- 6) 超音波治療器の実施。[本品、リードは音波を集中させる場合がある。]
- 7) 植込み型心臓ペースメーカ[単極ペーシングパルスは本品の作動に影響し、不適切な治療を誘発することがある。]

3. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止
- 3) 本品の植込みやフォローアップ時に専用のプログラマ以外を使用しないこと。[電磁干渉等により、本品の動作異常等が生じることがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体	Ilivia Neo 7 VR-T DX DF-1 ProMRI（刻印は Ilivia Neo 7 VR-T DX）
	Ilivia Neo 7 VR-T DF-1 ProMRI（刻印は Ilivia Neo 7 VR-T）
	Ilivia Neo 7 DR-T DF-1 ProMRI（刻印は Ilivia Neo 7 DR-T）
付属品	トルクレンチ
	ブラインドプラグ（DF-1 用）

2. 寸法等

型式	Ilivia Neo 7 VR-T DX DF-1 ProMRI
リードコネクタ様式	IS-1 型×2 / DF-1 型×2
寸法（mm）（幅×高さ×厚さ）	65×55×11
重量（g）	82
容積（mL）	33
X 線マーカ	⊕ NK

型式	Ilivia Neo 7 VR-T DF-1 ProMRI
リードコネクタ様式	IS-1 型×1 / DF-1 型×2
寸法（mm）（幅×高さ×厚さ）	65×55×11
重量（g）	82
容積（mL）	33
X 線マーカ	⊕ NK

型式	Ilivia Neo 7 DR-T DF-1 ProMRI
リードコネクタ様式	IS-1 型×2 / DF-1 型×2
寸法（mm）（幅×高さ×厚さ）	65×55×11
重量（g）	82
容積（mL）	33
X 線マーカ	⊕ NK

3. 形状・主な原材料



Ilivia Neo 7 VR-T DX DF-1 ProMRI



Ilivia Neo 7 VR-T DF-1 ProMRI



Ilivia Neo 7 DR-T DF-1 ProMRI

トルクレンチ



ブラインドプラグ (DF-1 用)



主な原材料：チタン、エポキシ樹脂、シリコーン

4. 作動・動作原理

本品は患者の心調律を連続的に監視し、不整脈を心拍数及び調整可能な検出アルゴリズムに従って分類して、抗徐脈治療、抗頻拍治療及び除細動治療を行う。

5. 予測電池寿命

Ilivia Neo 7 VR-T DX DF-1 ProMRI：

12.1 年 (0%ペースিং)、10.6 年 (100%ペースিং)

モード VVI、ペースングレート 40 ppm、パルス幅 0.4ms、パルス振幅 2.5V、ペースングインピーダンス 500Ω、ショック回数 2 回の場合

Ilivia Neo 7 VR-T DF-1 ProMRI：

13.1 年 (0%ペースিং)、11.4 年 (100%ペースিং)

モード VVI、ペースングレート 40 ppm、パルス幅 0.4ms、パルス振幅 2.5V、ペースングインピーダンス 500Ω、ショック回数 2 回の場合

Ilivia Neo 7 DR-T DF-1 ProMRI：

12.1 年 (0%ペースিং)、8.5 年 (100%ペースিং)

モード DDD、ペースングレート 60 ppm、パルス幅 0.4ms、パルス振幅 2.5V、ペースングインピーダンス 500Ω、ショック回数 2 回の場合

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

心室頻拍又は心室細動の治療を目的として、胸部又は腹部に植込み、センシング、ペースング、抗頻拍ペースング治療及び除細動を行う自動植込み型除細動器であって、徐脈ペースング機能及びレート応答機能を有する。

また、併用機器であるテレメトリー式データ送信機/心電図電話伝送装置と組み合わせて使用することにより、自宅療養中に予定された定期外来より早い時期に治療の必要性を判断することを可能にするため、不整脈及びデバイスシステムの異常に関する情報を自動的に送信できる。本体は、撮像可能条件に適合する場合のみ限定的に MRI 検査が可能となる機器である。

**【使用方法等】

1. 使用方法

本品の使用方法是「自動植込み型除細動器」の一般的な植込み手順による。

2. 一般的な植込み手順（詳細は取扱説明書参照）

- 1) 経静脈的にリードを挿入し、心内腔や冠状静脈内の所定の位置にリードを固定する。
- 2) 閾値、心内電位、リードインピーダンスをペースングシステムアナライザ (PSA: Pacing System Analyzer) 等で測定する。
- 3) 静脈への挿入部にリードを固定する。
- 4) 全てのリードのコネクタを、本品のコネクタポートに挿入する。
- 5) 本体に使用しないコネクタポートがある場合は、ブラインドプラグを差し込む。
- 6) 付属のトルクレンチを使用し、リードもしくはブラインドプラグを固定ネジで締め、本体を皮下に植込む。

- 7) プログラムを用いて閾値、心内電位、リードインピーダンスを測定後、除細動閾値とショックインピーダンスの測定を行う。
- 8) 創部を縫合する。
- 9) プログラムを用いて最終プログラミングを行う。

本品との適合性が確認されているリード

本品は、ISO 5841-3 に適合する IS-1 コネクタを有するペースメーカーリード及び ISO 5841-3 に適合する IS-1 コネクタと ISO 11318 に適合する DF-1 コネクタを有する右心室ショックリードが使用可能である。

本品に使用可能な体外無線制御設備（テレメトリー式データ送信機/心電図電話伝送装置）

販売名	認証番号	製造業者名
カーディオメッセンジャー	22100BZX00052000*	BIOTRONIK 社

※バイオトロニックジャパン株式会社が組合せ医療機器として製造販売した、本品以外の CIEDs の構成品である本認証品を使用することもできる。

本品に使用可能なプログラム

販売名	承認番号	製造業者名
リナミック	22300BZX00338000	BIOTRONIK 社
リナミック Neo	30300BZX00082000	BIOTRONIK 社

3. MRI 検査手順

MRI 検査は、条件付き MRI 対応 ICD 専用の ID カード（確認カード）と ICD 手帳を所持し、医師に提示した患者で、特定の条件を全て満たしていると医師が判断した場合に限り、特定の医療機関で MRI 検査を受けることができる。

- 1) 確認カード及び ICD 手帳によって、ICD 及びすべてのリードが BIOTRONIK 社製の MRI 対応製品であることを確認する。
- 2) MRI 設定の時間を最短にするために、プログラムを立ち上げた状態で隣接する部屋（前室や操作室等）に用意し、設定変更を行うこと。
- 3) プログラムを用いて本品をインタロゲートし、ペースング閾値・リードインピーダンス値・残存電池容量が、MRI 撮像可能条件を満たしていることを確認する。
- 4) プログラムの「Follow-up」画面から「MRI」を選択、もしくは「Parameters」画面から「MRI」を選択し、MRI 設定画面から MRI Program を ON 又は Auto にして、MRI 設定中のモード等を選択する。
- 5) MRI 撮像可能条件がすべて満たされることを確認した上で MRI 設定を行う。MRI 設定中は、患者の心拍を継続的にモニターする。
- 6) MR 装置の使用
MRI 設定後、MRI 室に患者を移動させ、使用する MR 装置の仕様及び設定を確認後、以下を実施する。
 - (1) 患者を患者テーブル（寝台）上に寝かせる。
 - (2) 患者の血行動態を監視するモニターを患者に取り付ける。
- 7) MR 装置の使用後
 - (1) 患者を MRI 室から退室させ、プログラムを用いて本品のインタロゲートを行う。
 - (2) MRI 設定解除用の画面から「Deactivate MRI」を選択して、MRI 設定前の設定に戻す。もしくは、「Parameters」画面から「MRI」を選択し、MRI 設定画面から MRI program の OFF を選択し、設定する。
 - (3) 「ICD Therapy」が ON になっていることを確認する。
 - (4) ペースング閾値やリードインピーダンス値等の測定値やパラメータに異常がないことを確認する。
 - (5) 必要があれば、他のパラメータに再設定する。

4. MRI 撮像可能条件（1.5T 装置を使用する場合）

1) 植込み医師/担当医師の確認事項

- (1) 遺残リードやアダプタ類など、MRI 非対応の植込み機器等が体内にないこと。
例：- 植え込まれているデバイス以外の植込み型デバイス
- 遺残リード（使用されていないリード）
- リードアダプタ
- リードエクステンション
- (2) 他の植込み型医療機器が植込まれている場合、MRI 対応であることが当該機器の製造業者によって確認されていれば MRI 撮像は可能である。ただし、植込まれている全ての医療機器に係る撮像可能条件が満たされている場合に限る。
- (3) 当該 ICD システムが胸部に植え込まれていること。
- (4) 本品とリードの組み合わせ
本品と組み合わせて MRI 対応が確認されているリードは下表のとおりである。事前に、リードの種類毎にそれぞれ 1 本が本品に接続されて植込まれていること。これら以外のリードが接続されている場合には MRI 検査は不可となる。

・Ilivia Neo 7 VR-T DX DF-1 ProMRI

リードの種類	販売名	型式	承認番号	製造業者名
右心室ショックリード ^{※1}	ブレクサ ProMRI S	Plexa ProMRI DF-1 S DX 65/15	22800BZX00239000	BIOTRONIK 社
	リノックス スマート Pro S DX	Linix Smart ProMRI S DX 65/15	22500BZX00289000	
	リノックス スマート S DX	Linix Smart S DX 65/15	22400BZX00265000	

注1：DF-1 SVC ポートにDF-1 ブラインドプラグを使用することになるが、この場合はMRI 対応となる。

・Ilivia Neo 7 VR-T DF-1 ProMRI

リードの種類	販売名	型式	承認番号	製造業者名	
右心室ショックリード ^{※1}	ブレクサ ProMRI S	Plexa ProMRI DF-1 S 65	22800BZX00239000	BIOTRONIK 社	
	ブレクサ ProMRI SD	Plexa ProMRI DF-1 SD 65/18	22800BZX00240000		
	リノックス スマート Pro S	Linix Smart ProMRI S 65	22500BZX00287000		
	リノックス スマート Pro SD	Linix Smart ProMRI SD 65/18	22500BZX00288000		
	リノックス S	Linix Smart S 65	21900BZX01133000		
		Linix Smart S 75			
	リノックス スマート SD	Linix Smart SD 65/18	22200BZX00751000		
Linix Smart SD 75/18					

注1：シングルコイルのリードを選択した場合、DF-1 SVC ポートにDF-1 ブラインドプラグを使用することになるが、この場合はMRI 対応となる。

・Ilivia Neo 7 DR-T DF-1 ProMRI

リードの種類	販売名	型式	承認番号	製造業者名
右心房リード	ソリア S	Solia S 45	22500BZX00050000	BIOTRONIK 社
		Solia S 53		
		Solia S 60		
	ソリア JT	Solia JT 53	22500BZX00275000	
	シエロ S	Siello S 45	22200BZX00783000	
		Siello S 53		
		Siello S 60		
	シエロ T	Siello JT 53	22200BZX00782000	
	サフィオS	Safio S 53	22600BZX00250000	
セトロックス S	Setrox S 53	22000BZX00126000		
デクストラス	Model 4136	22000BZI00006000		
右心室ショックリード ^{註1}	ブレクサ ProMRI S	Plexa ProMRI DF-1 S 65	22800BZX00239000	
	ブレクサ ProMRI SD	Plexa ProMRI DF-1 SD 65/18	22800BZX00240000	
	リノックス スマート Pro S	Liniox Smart ProMRI S 65	22500BZX00287000	
	リノックス スマート Pro SD	Liniox Smart ProMRI SD 65/18	22500BZX00288000	
	リノックス S	Liniox Smart S 65	21900BZX01133000	
		Liniox Smart S 75		
	リノックス スマート SD	Liniox Smart SD 65/18	22200BZX00751000	
		Liniox Smart SD 75/18		

注1：シングルコイルのリードを選択した場合、DF-1 SVC ポートにDF-1 ブラインドプラグを使用することになるが、この場合はMRI 対応となる。

2) デバイス管理医師^{※3}の確認事項

- 患者が確認カードと ICD 手帳の両方を所持していること。
- リードの植込み又は再固定後 6 週間を経過していること（42 日目は撮像不可）。

3) デバイス管理医師^{※3}/プログラマ操作者^{※3}の確認事項（MRI 検査当日）

- MRI 検査前のペーシング閾値が 2.0V（パルス幅 0.4ms）以下であること。
- MRI 検査前のリードインピーダンス値が 200～1,500Ω の範囲内であること。
- バッテリーステータスが ERI（選択的交換指標：Elective Replacement Indication）又は EOS（サービス期間終了：End of Service）ではないこと。
- MRI 検査前に MRI 設定を行うこと。
- MRI 検査終了後に MRI 設定を解除し、かつ、ペーシング閾値、リードインピーダンス値、残存電池容量等が正常であることを確認すること。また、ICD 治療の設定を含め、検査前の設定に戻すこと。

4) 放射線医師^{※3}/MRI 検査実施者^{※3}の確認事項

- MRI 検査を実施するのは、1.5T の円筒型ボア装置であること。
- 最大傾斜磁場スルーレートが 1 軸あたり 200T/m/s 以下であること。
- 局所送受信コイルを胸部に使用しないこと（局所受信専用コイルは使用可能である）。

(4) SAR（比吸収率）が、頭部 3.2W/Kg 以内、全身 2.0W/Kg 以内であること。

(5) MRI 検査中は、原則として MRI 対応のバルスオキシメーターあるいは心電図モニターを用いた心拍の連続監視をすること。

(6) AED 等、心肺蘇生に必要な体外式除細動器を隣接する部屋（前室や操作室等）に用意し、直ちに使用できるよう備えること。

※1：デバイス管理医師、プログラマ操作者、放射線科医師、MRI 検査実施者とは、所定の研修を修了し、認定を受けた医療関係者のことを指す。

5. MRI 撮像可能条件（3.0T 装置を使用する場合）

1) 植込み医師/担当医師の確認事項

- 身長が 1.4メートル以上あること。
- 遺残リードやアダプタ類など、MRI 非対応の植込み機器等が体内にないこと。

例：- 植え込まれているデバイス以外の植込み型デバイス
- 遺残リード（使用されていないリード）
- リードアダプタ
- リードエクステンション

(3) 他の植込み型医療機器が植込まれている場合、MRI 対応であることが当該機器の製造業者によって確認されていれば MRI 撮像は可能である。ただし、植込まれている全ての医療機器に係る撮像可能条件が満たされている場合に限る。

(4) 当該 ICD システムが胸部に植え込まれていること。

(5) 本品とリードの組み合わせ

本品と組み合わせる MRI 対応が確認されているリードは下表のとおりである。事前に、リードの種類毎にそれぞれ 1 本が本品に接続されて植込まれていること。これら以外のリードが接続されている場合には MRI 検査は不可となる。

・Ilivia Neo 7 VR-T DX DF-1 ProMRI

リードの種類	販売名	型式	承認番号	製造業者名
右心室ショックリード ^{※1}	ブレクサ ProMRI S	Plexa ProMRI DF-1 S DX 65/15	22800BZX00239000	BIOTRONIK 社
	リノックス スマート Pro S DX	Linix Smart ProMRI S DX 65/15	22500BZX00289000	
	リノックス スマート S DX	Linix Smart S DX 65/15	22400BZX00265000	

注1：DF-1 SVC ポートにDF-1 ブラインドプラグを使用することになるが、この場合はMRI 対応となる。

・Ilivia Neo 7 VR-T DF-1 ProMRI

リードの種類	販売名	型式	承認番号	製造業者名	
右心室ショックリード ^{※1}	ブレクサ ProMRI S	Plexa ProMRI DF-1 S 65	22800BZX00239000	BIOTRONIK 社	
	ブレクサ ProMRI SD	Plexa ProMRI DF-1 SD 65/18	22800BZX00240000		
	リノックス スマート Pro S	Linix Smart ProMRI S 65	22500BZX00287000		
	リノックス スマート Pro SD	Linix Smart ProMRI SD 65/18	22500BZX00288000		
	リノックス S	Linix Smart S 65	21900BZX01133000		
		Linix Smart S 75			
	リノックス スマート SD	Linix Smart SD 65/18	22200BZX00751000		
Linix Smart SD 75/18					

注1：シングルコイルのリードを選択した場合、DF-1 SVC ポートにDF-1 ブラインドプラグを使用することになるが、この場合はMRI 対応となる。

・Ilivia Neo 7 DR-T DF-1 ProMRI


リードの種類	販売名	型式	承認番号	製造業者名
右心房リード	ソリア S	Solia S 45	22500BZX00050000	BIOTRONIK 社
		Solia S 53		
		Solia S 60		
	ソリア JT	Solia JT 53	22500BZX00275000	
	シエロ S	Siello S 45	22200BZX00783000	
		Siello S 53		
		Siello S 60		
	シエロ T	Siello JT 53	22200BZX00782000	
	サフィオS	Safio S 53	22600BZX00250000	
セトロックス S	Setrox S 53	22000BZX00126000		
デクストラス	Model 4136	22000BZI00006000		
右心室ショックリード ^{※1}	ブレクサ ProMRI S	Plexa ProMRI DF-1 S 65	22800BZX00239000	
	ブレクサ ProMRI SD	Plexa ProMRI DF-1 SD 65/18	22800BZX00240000	
	リノックス スマート Pro S	Linix Smart ProMRI S 65	22500BZX00287000	
	リノックス スマート Pro SD	Linix Smart ProMRI SD 65/18	22500BZX00288000	
	リノックス S	Linix Smart S 65	21900BZX01133000	

リノックス スマート SD	Linux Smart S 75	22200BZX00751000
	Linux Smart SD 65/18	
	Linux Smart SD 75/18	

注1：シングルコイルのリードを選択した場合、DF-1 SVC ポートにDF-1 ブラインドプラグを使用することになるが、この場合はMRI 対応となる。

2) デバイス管理医師^{※1}の確認事項

- (1) 患者が確認カードと ICD 手帳の両方を所持していること。
- (2) リードの植込み又は再固定後 6 週間を経過していること（42 日目は撮像不可）。
- (3) MRI 検査の実施領域が次のイラストを遵守できること。
ICD システムには次に示すアイソセンタ配置領域及びスキャン除外領域が適用される。アイソセンタは肢の末端から恥骨結合の二横指上及び頭蓋骨頂部から眼に位置させること。

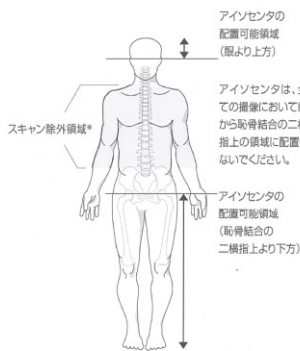

※スキャン除外領域は参考であり、実際はMR装置のFOV、および患者の身長に依存します。

3) デバイス管理医師^{※1}/プログラマー操作者^{※2}の確認事項 (MRI 検査当日)

- (1) MRI 検査前の患者に発熱がないこと（37.8℃未満）。
- (2) MRI 検査前のペーシング閾値が 2.0V（パルス幅 0.4ms）以下であること。
- (3) MRI 検査前のリードインピーダンス値が 200～1,500Ω の範囲内であること。
- (4) バッテリステータスが ERI（選択的交換指標：Elective Replacement Indication）又は EOS（サービス期間終了：End of Service）ではないこと。
- (5) MRI 検査前に MRI 設定を行うこと。
- (6) MRI 検査終了後に MRI 設定を解除し、かつ、ペーシング閾値、リードインピーダンス値、残存電池容量等が正常であることを確認すること。また、ICD 治療の設定を含め、検査前の設定に戻すこと。

4) 放射線医師^{※3}/MRI 検査実施者^{※1}の確認事項

- (1) MRI 検査を実施するのは、3.0T の円筒型ボア装置であること。
- (2) 最大傾斜磁場スレーレートが 1 軸あたり 200T/m/s 以下であること。
- (3) 局所送受信コイルを胸部に使用しないこと（局所受信専用コイルは使用可能である）。
- (4) SAR（比吸収率）が、頭部 3.2W/Kg 以内、全身 2.0W/Kg 以内であること。
- (5) 撮像時の体位が仰臥位であること。
- (6) MRI 検査中は、原則として MRI 対応のパルスオキシメーターあるいは心電図モニターを用いた心拍の連続監視をすること。
- (7) AED 等、心肺蘇生に必要な体外式除細動器を隣接する部屋（前室や操作室等）に用意し、直ちに使用できるよう備えること。
- (8) 一度の MRI 検査におけるスキャンタイムが 30 分以内であること。30 分を超えるスキャンが必要な場合には、30 分のスキャンの後、最低 4 分間、RF パルスを追加しないこと。
- (9) アイソセンタは、配置可能領域を遵守すること。

※1：デバイス管理医師、プログラマー操作者、放射線医師、MRI 検査実施者とは、所定の研修を修了し、認定を受けた医療関係者のことを指す。

6. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 本品を冷所で保管した後は室温に戻してからキャパシタの充電、本品のプログラミング、植込みを行うこと。本品の温度が低いと、初期機能に悪影響が生じることがある。
- (2) 植込み時に体外式除細動器を準備すること。
- (3) ショック電極間距離が 6cm 以上であること。
- (4) ショック電極とペーシング電極が接触しない位置に固定すること。
- (5) 本品にリードを接続するときは次のことに注意すること。
 - (1) リードのコネクタ部にシリコーンオイルをつけないこと。
 - (2) リードのコネクタ部に血液等がついていないこと。
 - (3) 本品のコネクタ内部に血液等が浸入していないこと。
 - (4) 本品のコネクタポートにリードのコネクタ部を挿入する前に固定ネジを締めないこと。
 - (5) リードをねじらないこと。
 - (6) トルクレンチは BIOTRONIK 社製を使用すること。

- (7) トルクレンチを斜めに差し込まず、シーリングプラグ中央部へまっすぐに挿入すること。[トルクレンチが斜めの状態ではしっかりと固定ネジが締められないだけでなく、ねじ穴が削られてトルクレンチが空回りする可能性がある。]
- (8) リードコネクタを本品のコネクタポートに挿入する前に、コネクタポートの開口部から固定ネジの先端が見えなくなるまで付属のトルクレンチを用いて、固定ネジを緩めること。[固定ネジがコネクタポート内に突出していること、接続の妨げになったり、リードコネクタの絶縁体を損傷したりすることがある。また、緩め過ぎると固定ネジがコネクタブロックから外れたり、固定ネジでシーリングプラグを損傷したりすることがある。]
- (9) リードのコネクタ部が本品のコネクタポートにしっかりと奥まで挿入されたことを確認してから固定ネジを締めること。
- (10) 付属のトルクレンチで時計方向に回し、カチカチという音が数回鳴るまで、固定ネジを締めること。
- (11) トルクレンチを抜く際には、誤ってネジを緩めることのないように真直ぐ慎重に抜くこと。不要なトルクが加わると接続不良になることがある。
- (12) リードが間違いなく各チャネルに接続されているかどうかを確認すること。A/RV のポートの見分け方は、本体に表示されている。
- (13) 未使用のコネクタポートには、血液等が流入しないようブラインドプラグを挿入すること。
- (14) リードを外科的機器と一緒に持ちたり、スタイレットをリードに挿入する際に過度の力をかけたり外科的機器を用いたりしないこと。
- (15) クロススレッド（ネジ割の噛み合わせ不良）を防ぐため、固定ネジが完全にネジ穴から出るまで引き戻さないこと。リードが挿入されている間は、トルクレンチを固定ネジのスロットに残しておくこと。
- (16) リードを直接接続しないこと。必ず、固定スリーブを使用して固定すること。また、その際に固定スリーブは腕の動き等がリードに伝わらない位置で固定すること。
- (17) 使用を中止したリードを留置する場合は、リードキャップをして絶縁しておくこと。リードを途中で切断した場合は、その端をシールして周囲の組織に固定し、心臓内にリードが入り込まないようにすること。
- (18) リードを接続した際にペーシングが確認できる設定にし、設定どおりペーシング及びキャプチャ（捕捉）していることを心電図で確認すること。
- (9) 本品を植え込む前の手に持った状態では、ノイズによりオーバーセンシングを起こしペーシングしないことがあるため、設定や動作の確認は本品がポケットに収納された状態で行うこと。
- (7) 本品はポケット内の筋組織に適切に固定すること。
- (8) 本品のパラメータは患者の特異的な不整脈や状態に基づく適切な値にプログラムすること。
- (9) 最大追従レート及び最大センサレートは患者に適した値に設定すること。
- (10) 本品の植込み終了前に、輸送モードを必ず無効にすること。輸送中はバッテリーのエネルギー消費を抑えるため、輸送モードに設定されている。インピーダンス測定などの電気生理学的試験を実施後すぐに、輸送モードは自動的に無効となる。
- (11) プログラマーが原因でインタロゲートできなかったり意図した設定にプログラムできないことがある。
- (12) テレメトリー不全や中断などのデバイスとプログラマー間の通信エラーによって、プログラマー上に誤ったデータが表示される可能性がある。ペーシングの有効性及び試験結果の妥当性を継続的にモニターするため、試験中は常に体外式心電図デバイスを使用すること。
- (13) 一時的なプログラム（フォローアップテストや除細動閾値試験など）の実施中では、電磁干渉等の相互作用またはテレメトリーの切断が患者に不適切なペーシングを引き起こすことがある。電磁干渉等の相互作用またはテレメトリーの切断はプログラムエラーまたはタッチスクリーンの不具合の原因となり、プログラマーの操作ができなくなったり、一時的なプログラムを終了できなくなることがある。テレメトリーが切断された場合には、患者の安全性を確保するため、一時的なプログラムを終了すること。または、干渉源と考えられるものの電源を切る。一時的なプログラムを終了するには、プログラミングヘッドを使用したテレメトリーの場合は、本品よりプログラミングヘッドを 30cm 以上持ち上げると、自動的にシーマメントプログラムに切り替わる。ワンドレステレメトリー（以下 RF テレメトリー）を使用したテレメトリーの場合は、プログラマーの電源スイッチをオフにするか、本品の使用範囲外（3m 以上）まで移動させると自動的にシーマメントプログラムに切り替わる。
- (14) 一時的なプログラムのパルス振幅やパルス幅が有効でない場合には、患者は血行動態的に危険な状態に陥ることがある。テレメトリー誤作動がある場合、振幅の修正ができず、危険に陥る可能性がある。心電図と患者の状態を継続的にモニターすること。
- (15) 本品の上にマグネットを置くと、頻拍検出及び治療の通電が一時停止するため、本品の上にマグネットを置かないこと（徐脈ペーシング機能には影響しない）。
- (16) 非同期モードでは頻拍性不整脈の検出がオフの場合のみ使用することができ、患者は頻拍性不整脈に対しては適切な保護がなされない。非同期モードを選択する場合は、患者を継続的にモニターし、常に体外式除細動器を使用できるような状態にしておくこと。
- (17) 本品は ICD 治療をオフ（Disabled）にすると、検出および治療パラメータに設定されている値に関係なく、デバイスは VT/VF 治療を行わない。ICD 治療をオン（Enabled）にした場合、検出ゾーンおよび治療が効果的にプログラムされているかを確認すること。

- 18) 患者の容態、薬物投与方法等の因子に変動があった場合には、除細動閾値が変化する場合がありますので、除細動試験を実施して本品が患者の頻拍性不整脈を感知し、停止できることを確認すること。
 - 19) 本品が正常に作動していても不適切作動が発生する場合があります。以下にその要因及び対処方法を例示するが、それらに限定されるものではなく、個々の病態、設定状況等に応じて適切な対処を行うこと。
 - (1) T波のオーバーセンシングが見られ、不適切作動が発生する場合、センシングの設定を変更しT波のオーバーセンシングを回避すること。設定変更後は、除細動試験を実施して本品が患者の頻拍性不整脈を感知し、停止できることを確認すること。
 - (2) ワイドQRSによりダブルカウントが発生し、不適切作動が発生する場合、センシングの設定を変更しダブルカウントを回避すること。設定変更後は、除細動試験を実施して本品が患者の頻拍性不整脈を感知し、停止できることを確認すること。
 - (3) 心室リードのノイズにより不適切作動が発生する場合、センシングの設定変更を行い、回避できない場合はリードの位置を変更すること。
 - (4) VT-1又はVT-2ゾーンにおける上室性頻拍であるにもかかわらず、VTと診断され不適切作動が発生する場合、各SVT識別の設定を変更しVTと診断されることを抑制すること。
 - (5) センシング設定を高感度に設定している場合、EMI（電磁干渉）を受ける可能性があることを考慮すること。
 - (6) 「確認（コンファメーション）」を「OFF」にプログラムすると、本品による不適切なショックの発生が増加することがある。
 - (7) 心室からの電位が心房でセンシングされないことを確認すること。心房オーバーセンシングが引き起こされる可能性がある。その場合は設定の変更を行い、オーバーセンシングを回避すること。回避できないときは、右心房リードの位置を変更すること。
 - (8) ファーフールドプロテクションを変更する場合は、IBGMを必ず確認すること。
 - 20) EP Test 画面で、プログラミングヘッド上でのセーフプログラム（Safe Program）キーを押してもすぐにはセーフプログラムが本品に送信されない。セーフプログラムを押すと緊急画面が起動するが、セーフプログラムを本品に送信するためには、さらに画面をタッチする必要がある。
 - 21) 除細動閾値試験において、短いインターバルのATPは心室性不整脈が停止しなかったり、亢進される可能性がある。また、デバイスからのショックエネルギーが不十分な場合、心室性不整脈が停止しない可能性がある。テスト前にVT検出およびVF検出を作動させてあるか、十分な治療を設定してあるかを確認すること。誘発の前に必ず体外式除細動器を準備しておくこと。
 - 22) レート及び振幅が非常に高く設定され、同時にパルス幅が非常に長く設定されている場合、電池電圧は一時的に著しく低下し、実際のパルス振幅が選択したレベルを大きく下回ることがある。心電図をモニターしてペーシングが有効であるかを連続的に確認すること。
 - 23) 基本レートが高い状態で高出力にプログラムすると本品は早期にERIに達する。
 - 24) キャパシタの充電頻度が少ないと、本品の充電時間が長くなることがある。キャパシタは約6か月毎に自動的にリフォメーションを行うが、手動でリフォメーションすることができる。
 - 25) 本品が手動コマンドの処理中、あるいはバッテリーステータスが低い場合、ユーザコマンドによるショックが保留されることがあるので、設定やバッテリーステータスに注意すること。
 - 26) 高エネルギーショックの準備段階では、20秒後にチャージ回路によりキャパシタの充電が停止し、ショックとして保存されたエネルギーが通電される。本品が選択的交換指標（ERI）に達した後は、1回のショックに対する保存されるエネルギーは最大エネルギーに満たない場合がある。
 - 27) ショックインピーダンスが30Ω未満の場合、リードの位置を変更し、電極の間の距離を広くとるようにすること。30Ω未満のショックインピーダンスが測定されたリードシステムを用いて本品の植込みを行わないこと。本品が損傷する場合がある。
 - 28) ディスロジ等によりリードを再固定した場合は、製造販売業者に届出ること。[MRI撮像には再固定日から6週間を経過している必要があるため。]
- (2) 身体に通電したり、強い電磁波を発生する機器（肩コリ治療器等の低周波治療器、電気風呂、医療用電気治療器等、高周波治療器、筋力増強用の電気機器（EMS）、体脂肪計等）は使用しないよう指導すること。
 (3) 空港等で使用されている金属探知器（設置型・携帯型）に関する注意：ICD手帳を係官に提示し、金属探知器を用いない方法で検査を受けるよう指導すること。
 (4) 小型無線機（アマチュア無線機（ハンディタイプ・ポータブルタイプ及びモータービルタイプ）、パーソナル無線機及びトランシーバ（特定小電力無線局のものを除く）等）は使用しないよう指導すること。
 (5) 店舗や図書館等公共施設の出入口等に設置されている電子商品監視機器（EAS）に関する注意：電子商品監視機器は分からないように設置されていることがあるため、出入り口では立ち止まらないで中央付近を速やかに通り過ぎるよう指導すること⁸²⁾。
 (6) 物流・在庫管理や商品等の精算、盗難防止等の目的で使用されるRFID（電子タグ）機器に関する注意：以下の事項を守るよう患者に指導すること⁸³⁾。
 ① ゲート型RFID機器⁸²⁾：ゲート付近では立ち止まらないで中央付近を速やかに通り過ぎること。ゲート周囲に留まったり、寄り掛かったりしないこと。
 ② 据置き型のRFID機器（高出力950MHz帯パッシブタグシステムに限る。）：RFID機器が設置されている場所の半径1m以内に近づかないこと。
 ③ ハンディ型、据置き型（高出力950MHz帯パッシブタグシステムを除く。）及びモジュール型のRFID機器：植込み部位をRFID機器のアンテナ部より22cm以内に近づけないこと。
 ※2：ここでは公共施設や商業区域などの一般環境下で使用されるRFID機器を対象としており、工場内など一般人が入ることができない管理区域でのみ使用されるRFID機器（管理区域専用RFID機器）については対象外としている。
 (7) 誘導型溶鉱炉、各種溶接機、発電施設、レーダー基地、強い電磁波を発生する機器等には絶対に近づかないよう指導すること。
 (8) IH炊飯器やIH調理器等の電磁気家電製品は強力な電磁場を作り出すため、患者は使用中の電磁気家電製品近くにいる時間を短くするよう指導すること。特にIH炊飯器は使用開始から終了まで「保温中」も含めて、使用中は常に強力な電磁波を放出するため、植え込まれた本品をそのような炊飯器に近づけないよう指導すること⁸⁴⁾。
 (9) 携帯電話端末等（スマートフォン等の無線LANを内蔵した携帯電話端末を含む）を使用する場合は以下の事項を守るよう指導すること⁸⁵⁾。
 ① 携帯電話端末等を本品植込み部位から15cm程度以上離すこと。
 ② 携帯電話端末等を使用する際には、本品の植込み部位と反対側の耳を使用する等すること。
 ③ 携帯電話端末等を携帯する場合、常に15cm程度以上本品から離して携帯するか電波を発射しない状態に切り替えること（電源をOFF又は、電波をOFF（電波をOFF可能な携帯電話端末等の場合）にする）。
 (10) キーを差し込む操作なしでドアロックの開閉やエンジン始動・停止ができるシステムを搭載している自動車等の場合、当該システムのアンテナ部から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の出力を一時的に抑制する場合がありますので、以下の点に注意するよう患者に指導すること⁸⁶⁾。
 ① 本品を植え込まれた患者が当該システムを搭載した車両へ乗車する場合には、車両に搭載されたアンテナ部から植込み部位を22cm以上離すこと。なお、ドアの開閉時には、アンテナ部から電波が一時的に発信されるので、必要以上にドアの開閉を行わないようにすること。
 ② 運転手等が持つ車載アンテナとの通信機器（以下「携帯機」という。）を車外に持ち出すなど車両と携帯機が離れた場合、アンテナ部から定期的に電波が発信される車種があるので、本品を植え込まれた患者が乗車中には、携帯機の車外への持ち出しを行わないようにすること。
 ③ 駐車中においてもアンテナ部から定期的に電波が発信される車種があるので、車外にいても車に寄り掛ったり、車内をのぞき込む又は車に密着するような動作を避けること。
 ④ 他の者が所有する自動車に乗車する場合は、当該システムを搭載した車種かどうか確認すること。
 (11) 非接触型ICカード（各種交通機関の出札システムやオフィス等の入退出管理システムで使用される）システムの読み取り機（アンテナ部）から植込み部位を12cm以上離すよう指導すること⁸⁶⁾。
 (12) 全自動麻雀卓等での遊戯は避けるよう指導すること。
 (13) 磁石又は磁石を使用したもの（マグネットクリップ、マグネット式キー等）を植込み部位に近づけないよう指導すること。
 (14) 磁気治療器（貼付用磁気治療器、磁気ネックレス、磁気マット、磁気枕等）を使用する場合、植込み部位の上に貼るもしくは近づけることは避けるよう指導すること。
 (15) エンジンのかかっている自動車のボンネットを開けて、エンジン部分に近づかないよう指導すること。
 (16) 農機（草刈り機、耕運機等）、可搬型発電機、オートバイ、スノーモービル、モーターボート等を操作・運転する場合、露出したエンジン付近には近づかないよう指導すること。また、電動工具等は使用中に近づかないよう指導すること。
 (17) 下記の電気機器は使用しても心配ないが、頻繁にスイッチを入れたり、切ったりしないよう指導すること。
 電気カーペット、電気敷布、電子レンジ、電気毛布、テレビ、ホット

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意事項

1) 植込みの適応

本品の植込み適応は、「不整脈治療の非薬物治療ガイドライン」⁸¹⁾又はこれと同等以上のガイドライン等を参照のこと。

2) 家電製品・周辺環境等に関する注意

次のような家電製品や電気機器等の使用やこれらへの接近、周辺環境によって電磁干渉等が生じ、ペーシングが抑制されて危険を伴うことがある。受攻期でのペーシングはより高い危険を伴い、連続した干渉波が発生した場合、干渉を検知している間、基本レート、センサ指示レート又はレストレートのいずれかが有効なレート、あるいはマグネットレートで非同期モードペーシングをする。さらにエネルギーが高くと、本体が破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼する場合もある。これらのように本品の機能が影響を受けることがある。これらが原因と思われる異常が認められたときは、これらから離れるか、使用を中止するよう患者に指導すること。

- (1) 漏電している電気機器（通常使用して問題のない電気機器も含む）には絶対に触れないよう指導すること。

- プレート、エアコン、空気清浄機、加湿器、電気コタツ、電気洗濯機、電気掃除機、トースタ、ミキサー、ラジオ、ステレオ、ビデオ、DVDプレーヤー、ブルーレイディスクプレーヤー、ハードディスクレコーダー、コンピュータ、無線LAN、コピー機、ファックス、補聴器等。
- 3) 磁気等が発生する医用電気機器・周辺環境等に関する注意
医用電気機器治療又は診断に使用する医療機器の影響は、装置のタイプや使用するエネルギーレベルによって異なるので、これらの機器を使用している間は本品が正しく機能しているかをモニターし、使用後は本品をチェックすること。2. 相互作用の項に記載の医療機器が干渉源になる可能性がある。
- (1) 施設等の周辺環境によって電磁干渉が生じ、ペースキングが抑制されて危険を伴うことがある。受孕期でのペースキングはより高い危険を伴い、連続した干渉波が発生した場合、干渉を検知している間、基本レート、センサー指示レート又はレストレートのいずれか有効なレート、あるいはマグネットレートで非同期モードペースキングをする。さらにエネルギーが高いと、本体が破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼する場合もある。また、プログラマを使用している際ノイズ等が見られ、プログラマが正常に機能しないことがある。周辺に存在する医用電気機器等が原因と思われる異常が認められたときは、これから離れるか、医用電気機器等の使用を中止すること。
- (2) 本品を植込んだ患者のX線CT検査に際し、本体にX線束が連続的に照射されるとオーバーセンシングが起り、適切な治療の一時的な抑制又は不適切な頻拍治療を行う可能性があるため、本体にX線束を照射しないよう十分注意すること。(2. 相互作用の項参照)
- (3) 本体の植込み部位にパルス状の連続したX線束が照射されるとオーバーセンシングが起り、本品が適切な治療の一時的な抑制又は不適切な頻拍治療を行う可能性があるため、本体の植込み部位にX線束を照射しないよう十分に注意すること(2. 相互作用の項参照)
- 4) MRI 検査及びMRI 設定について
- (1) MRI 検査は患者又はICDシステムに対して望ましくない影響を与える可能性があるが、反対に植込み型医療機器がMRI 検査に対して悪影響を及ぼす場合もある。植込み型医療機器が撮像視野に含まれる場合、又はその近くにある場合、アーチファクト、歪み、及び障害が発生する可能性がある。撮像パラメータ等を設定する際は、上記について考慮すること。
- (2) MRI 検査時に設定するMRI 設定により電池の消費が増加する可能性があるため注意すること。
- (3) MRI AutoDetect 機能が有効に設定されている間、予期しないパラメータの設定変更を防ぐため、植込み部位近傍に磁力源を近づけないよう患者に指導すること。
- (4) ベースメカ依存患者においてMRI AutoDetect 機能を利用する場合、キャプチャコントロールを有効に設定することが望ましい。
- (5) MRI 設定中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置することが望ましい。
- (6) プログラマを用いるより、AED等の体外式除細動器を使用した方が短時間で治療が行えることから、緊急時はAED等の体外式除細動器を使用すること。
- 5) ホームモニタリング
- (1) 本品の適用及び禁忌は、ホームモニタリングシステムの使用の如何には影響されない。診断ツールとしてのホームモニタリング機能は、デバイスの診断及び治療に影響を及ぼさない。ホームモニタリングの使用には医師がインターネット等を利用してホームモニタリングデータベースへアクセスできる環境が必要である。また、患者は電話回線やインターネット回線などの通信回線を利用してホームモニタリングサービスセンターへデータ送信できるように、適切なホームモニタリング機器(カードイオメッセンジャー)の設置が必要となる。
- ホームモニタリングは不整脈及びデバイスシステムの異常を定期的な通院によるフォローアップと比較し早期に発見することが可能である。医師はホームモニタリングデータに基づき、患者に早期の通院を依頼することもあるが、医師から患者への適時連絡を約束するものではない。患者が体に不調を感じた場合、必ず医療機関に連絡を行い、適切な指示を受けることを指導すること。
- 6) その他患者への指導事項
- (1) 本品を植込んだ患者に次の注意を促すこと。
- ① 本品やリードに損傷を与えたり、植込み位置が移動してしまう可能性があるため、植込み部位を圧迫したり、叩いたり、むやみにいじったりしないこと。
 - ② 加速度センサーがONにプログラムされている場合(Rモード)、衝撃や振動が繰り返されるような動き(乗馬、手持ち削岩機の使用等)をするとペースングレートが上昇する可能性があるため、このような行動を控えること。
 - ③ 患者向けガイドブック(「ICDのことはなし」)を熟読すること。
 - ④ 自動車運転及び免許取得に関して、道路交通法に基づき患者に十分に指導すること。
- 7) フォローアップ (詳細は取扱説明書参照)
- (1) 本品を植込んだ後は少なくとも3~4ヵ月毎に、プログラマを用いた対面もしくは遠隔モニタリングにてフォローアップを実施し、電池の消耗、作動状況、患者診断情報等を確認すること。対面でのフォローアップの間隔は、前述の確認項目に加え、病態や患者の自覚症状等を考慮し設定すること。
- (2) 本品に使用されている電池の一般的な特性として、予想寿命に近い場合、電池電圧が急激に低下する場合等があるので、フォロー

アップ時に注意すること。予想寿命に近い場合、対面フォローアップ期間の短縮等を検討し、注意すること。

- (3) 選択的交換指標(ERI: Elective Replacement Indication)に達したら本品を直ちに交換すること。ERIに到達した時点で、バッテリーには少なくとも3ヵ月間標準プログラムで動作し、また最大エネルギーのショックを最低6回通電が可能で、エネルギーが残されている。EOS(End of Service)到達時、頻拍性の不整脈の検出および治療機能は無効となる。
- (4) 本品を交換する前にEOSが表示された場合、患者のVI及びVFの検出ならびにすべての抗頻拍治療が正常に働くことに注意し、直ちに本品を交換すること。交換するまで、患者を継続的にモニタリングすること。
- (5) 本品の交換時にはリードシステムの評価により、リードの使用継続の可否を検討すること。
- (6) プログラマによるペースング閾値測定中のパルス振幅のエネルギーが不十分な場合、患者の血行動態が危険な状態になることがある。プログラミングヘッドがデバイス上にある時に干渉を受けると、振幅の補正が妨げられる可能性がある。
- ① プログラミングヘッドを高さ30 cm以上もち上げるとデバイスが自動的にパーマナントプログラムに切り替わる。
- (7) 高レート的心房調律あるいは両性頻脈に同期した非生理的な心室ペースングを回避するため下記のパラメータを設定すること。
- ① 必要に応じて、モードスイッチをオンにする。
 - ② 心室レートの突然の変化を防止するために、上限レートと不応期を設定する。
 - ③ 2:1ブロック様現象を回避し、ウェンケバッハ様現象となる選択をする。
 - ④ モードスイッチが働くことで非生理的調律になることを防止するために、モードスイッチが継続しないように全てのパラメータを設定すること。
- (8) 患者自身に点検して頂くこと: 患者向けガイドブックを参照すること。
- (9) フォローアップ時に異常なリードインピーダンスの上昇や低下等を認めた場合には、ペースング極性の変更等の措置を講じ、インピーダンスが正常化するかを確認すること。必要に応じ追加の設定変更を行うこと。
- (10) 併用する薬剤によりペースング閾値が変化する場合があるため、適切な間隔にてペースング閾値を測定すること。閾値変化に伴うペースング治療の効果が得られない可能性がある場合には、患者の閾値に応じた設定変更を行い、ペースング効果が得られていることを確認すること(2. 相互作用の項参照)
- (11) 併用する薬剤の追加投与又は投与量の変更に伴い、患者の心機能状態に影響を及ぼす可能性があるため、頻拍検出条件の再評価を行い、除細動試験を実施すること等により除細動効果が得られることを確認すること(2. 相互作用の項参照)^{※10}。

2. 相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

1) 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MR装置) (MRI 撮像可能条件下に 適合しない場合)	本体交換	強い磁場の影響により本体が故障する可能性がある。
	プログラマによる再設定	電磁干渉により、非同期モードへの移行、ペースングの抑制、ペースングレートの上昇、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが生じる可能性がある。
鍼電極低周波治療器 (電気利用の鍼治療)	治療器の使用中止	オーバーセンシングによるペースングの抑制、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全が生じる可能性がある。
高周波/低周波治療器	高周波/低周波治療器の使用中止	電磁干渉により、非同期ペースングへの移行、ペースングの抑制、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが生じる可能性がある。
低周波治療器 (経皮的電気刺激装置: TENS)	治療器の使用中止	ペースングの抑制、非同期ペースングへの移行、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが生じる可能性がある。
マイクロ波治療器 (ジアルテルミー)	本体交換	発生する熱によって故障する可能性がある。
	治療器の使用中止、体外式除細動	電磁干渉による非同期ペースングによって心室細動を誘発する可能性がある。
	治療器の使用中止	ペースングの抑制、非同期ペースングへの移行、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが生じる可能性がある。
超音波治療器	治療器の使用中止	リードが植込まれている場合は、そのリードが使用されているかどうかにかかわらず、短波及びマイクロ波により、電極周囲が熱せられて心臓組織を損傷させる可能性がある。
	併用不可	本体、リードは音波を集中させることにより故障する可能性がある。

植込み型心臓ペースメーカー	併用不可	単極ペーシングパルスにより、不適切なショックや治療を誘発する可能性がある。
---------------	------	---------------------------------------

2) 併用注意（併用に注意すること）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
一般電気手術器（電気メス）※1	本体交換	ペーシング出力が永久に停止する可能性がある。
	治療器の使用中止、体外式除細動	心室細動が誘発される可能性がある。
	治療器の使用中止/頻拍の検出機能オフ	ペーシングの抑制、非同期ペーシングへの移行、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが生じる可能性がある。
	治療器の使用中止	ペーシングレートが上限レートまで上昇する可能性がある。
	プログラマによる再設定	ある状況下では、本体が電気的にリセットされたり、交換指標が表示される可能性がある。
	末梢脈を絶えず触診したり、末梢動脈圧、心内圧をモニターして心臓の動きを把握する。	ECG モニター装置が干渉される。
体外式衝撃波結石破碎装置※2	本体交換	ビームの焦点にあると、本体が破壊される可能性がある。
	治療器の使用中止、体外式除細動	電磁干渉により、非同期ペーシングへの移行、ペーシングの抑制、不適切な治療の施行、不整脈の検出不全などが生じる可能性がある。
	センサオフ	ペーシングレートの不適切な上昇。
	ペーシングに同期した衝撃波	心房細動や心室細動等が生じる可能性がある。
放射線照射治療装置※3	本体が直接被曝しないようにする。 一時的体外ペーシング及び体外式除細動器の準備をする。	高線量の電離放射線（癌治療の目的で行われるコンソリド照射や直線加速器により生ずる）は、本体内部の CMOS 回路に影響する可能性がある。また、不適切な治療の施行が生じる可能性がある。
	もし放射線照射をする組織が植込み部位に近い場合、本体の位置を移動することを推奨する。	
除細動装置※4	本体交換	本体保護回路の故障が生じる危険がある。
	本体交換	体外式除細動器の放電により、永久的なペーシング閾値の上昇を招く可能性がある。
	リード交換	電極遠位端の心筋線拘が生じる可能性がある。
	プログラマによる再設定	本体が電気的にリセットされたり、交換指標が表示されたりする可能性がある。
	プログラマによる再設定又は体外式ペースメーカーの使用	体外式除細動器の放電により、一時的なペーシング閾値の上昇を招く可能性がある。
X 線 CT 装置及び X 線 CT 装置を組み合わせた医療機器※5	プログラマによる再設定又は体外式ペースメーカーの使用	X 線束が連続的に照射される CT 検査に際し、本体内部の CMOS 回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起こり、ペーシング出力が一時的に抑制されたり、不適切な頻拍治療を行うことがある。
X 線診断装置・X 線透視診断装置・X 線発生装置等※6	プログラマによる再設定、体外式除細動器又は体外式ペースメーカーの使用	パルス状の連続した X 線束が照射された場合、本体内部の CMOS 回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起こり、ペーシングパルス出力が一時的に抑制されたり、不適切な頻拍治療を行うことがある。
抗不整脈薬（アミオダロン塩酸塩等）※7	〔頻拍検出をレート設定にした場合〕 頻拍検出レートの再評価	抗不整脈薬の徐拍化作用により、治療対象の不整脈のレートが、設定された ICD の頻拍検出レートを下回る可能性がある。
	〔頻拍検出をインターバル設定にした場合〕 頻拍検出機能インターバルの再評価	抗不整脈薬の徐拍化作用により、治療対象の不整脈のインターバルが、設定された ICD の頻拍検出インターバルを上回る可能性がある。
	除細動パラメータの再評価	抗不整脈薬による心内電位波形の変化や除細動閾値の変化により、治療対象の不整脈により、治療対象の不整脈に対して適切な除細動効果が得られない可能性がある。
	プログラマによる再設定	抗不整脈薬の作用により、ペーシング閾値が変化する場合がある。
高周波アブレーション※8	治療器の使用中止、体外式除細動	心室性頻脈性不整脈が誘発される可能性がある。

併用注意の相互作用の低減方法

※1 電気メスを使用する場合、ペースメーカー依存等の患者は必要に応じ

て非同期モードにプログラムすること。電気メスとその不閉電極との電流経路を本品及びリードからできる限り遠ざけること。電気メスによる影響の度合は、電気メスの種類、止血電流と切開電流、電流経路及び本品とリードの状態によって変わるが、電気メスの出力は必要最小限に止め、短期間に、間欠的に、不規則パーストで行うこと。可能な限り双極型電気メスを使用すること。体外式ペースメーカー及び除細動装置を使用できるようにしておくこと。

※2 結石破碎装置を使用する場合、本品を結石破碎ビームの焦点から十分離すこと。本品が腹部に植込まれていない限り、碎石術に伴う危険性は限られるが、心房細動や心室細動の危険性をさけるために衝撃波はペーシングに同期させること。

※3 放射線照射治療の場合、放射線からの距離に関わらず、本体を放射線が透過しない物質にて遮蔽する。もしくは直接本体に照射しない等の対応をとること。本品の作動状態を心電図で継続的に確認し、治療後は本品の機能が正常に動作していることを確認すること。結果として生ずる損傷は、被曝後すぐに分からないことがあるので注意すること。被曝の前には頻拍検出機能をオフにすること。

※4 除細動装置を使用する場合、本品や心筋の損傷の危険性を減らすため、パドルの位置は本品から十分離し、パドルとパドルを結ぶ軸が本品とリード先端を結ぶ軸に直角になるようあてること。

※5 X 線束が連続的に照射される CT 検査に際しては、植込み部位に X 線束を照射しないようにする。やむを得ず、植込み部位に X 線束を照射する検査を実施する場合には、患者に「両腕挙上」をさせる等して本体の位置を照射部分からずらすことができないか検討すること。それでも植込み部位に X 線束を照射する場合には、検査中、頻拍検出機能をオフにした後、脈拍をモニターすること。又は、一時的体外除細動器や一時的体外ペーシングの準備を行い、使用すること。

※6 ・パルス状の連続した X 線束を照射する透視・撮影（数秒以内での連続した撮影、パルス透視、DA 撮影、DSA 撮影、シネ撮影等）を行う場合、不適切な頻拍治療を行う可能性がある。

・パルス状の連続した X 線束を照射する場合には、本体の植込み部位に X 線束を照射しないようにすること。

・やむを得ず、本体の植込み部位に X 線束の連続した X 線束を照射する場合には、患者に「両腕挙上」をさせる等をして本体の位置を照射部分からずらすことができないか検討すること。それでも本体の植込み部位に X 線束の照射をさせられない場合には、検査中、競合ペーシングをしない状態で固定ペーシングモードに設定するとともに、頻拍検出機能をオフにした後、脈拍をモニターすること。又は一時的体外除細動器や一時的ペーシングの準備を行い、使用すること。

※7 ・（頻拍検出パラメータをレート設定にした場合）抗不整脈薬の追加投与、増量、もしくは投与薬剤の変更を行った場合には、本品による治療が行なわれない可能性があるため、本品の頻拍検出レートの再評価を考慮すること。

・（頻拍検出パラメータをインターバル設定にした場合）抗不整脈薬の追加投与、増量、もしくは投与薬剤の変更を行った場合には、本品による治療が行なわれない可能性があるため、本品の頻拍検出インターバルの再評価を考慮すること。

・抗不整脈薬の追加投与、増量、もしくは投与薬剤の変更を行った場合には、本品による治療が行なわれない、あるいは治療効果が得られない可能性があるため、本品の除細動パラメータの再評価を考慮すること。

・抗不整脈薬の作用により、ペーシング閾値が変化し、ペーシング効果が得られない可能性があるため、閾値に応じてペーシング設定の変更を考慮すること。

※8 高周波アブレーションを施行する前に、不適切な検出や治療の実施を回避するために、頻拍検出をオフに設定すること。また、オーバーセンシングの影響を最小限に抑えるようなペーシングモードに設定すること。アブレーションを行う際、アブレーションカテーテルと本品又はリードとの直接的な接触を避け、対極板は電流経路が本品システムの上又は近くにならないように配置すること。術中及び術後は患者の血行動態をモニタリングし、体外式ペースメーカー及び除細動装置を使用できるようにしておくこと。アブレーション手技後は、本品の設定を元に戻し、正常に動作することを確認すること。

3. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合

- 出力停止を含む機能不全：本品等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的な回路構成部品あるいは電池の故障により適切な治療ができなくなることがある。
- 電池早期消耗：本品等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的な回路構成部品あるいは電池の故障により電池早期消耗が発生し、適切な治療ができなくなることがある。〔電池が消耗してきている（電池早期消耗を含む）場合には、電池内部抵抗値、電池電圧又はマグネットレートを測定することによりその度合いを確認することができるため、本品植込み後はフォローアップを行うこと。〕
- ショック治療の誘発や抑制：本品等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的な回路構成部品あるいは電池の故障により、またリードとの接続不良あるいはリードに発生した不具合によりショック治療の誘発や抑制が発生し、適切な治療ができなくなることがある。

- (4) ペーシング不全及びセンシング不全：本品等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的に回路構成部品あるいは電池の故障により、またリードとの接続不良あるいはリードに発生した不具合によりペーシング不全及びセンシング不全が発生し、適切な治療ができなくなる可能性がある。
- 2) その他の不具合
- (1) テレメトリー不全：本品等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的な回路構成部品あるいは電池の故障によりテレメトリー不全が発生することがある。
- (2) テレメトリー不全：医療機関内での検査の際、他の医療機器や測定機器、電源事象等による電磁干渉の影響により通信が不能となるテレメトリー不全が発生することがある。[テレメトリー不全が起きた場合には、電磁干渉の影響を受けない環境下での動作確認を実施すること。改善が見られない場合には、速やかに製造販売業者又は販売業者に連絡すること。]
- (3) MRI 検査に伴う不具合：ディスクロジ、CIEDs の移動、CIEDs 及びリードの振動、不適切なプログラミング、不適切な治療、回路又は電池の予測できない故障、CIEDs とプログラムの通信不良、一時的な電池電圧の低下
- 3) 重大な有害事象
- (1) 死亡：出力停止又はペーシング不全により心停止状態が持続し、死亡につながる可能性がある。
- (2) 死亡：センシング不全又は持続的なノイズのセンシングにより非同期ペーシングに移行し、心室細動を誘発することにより死亡につながる可能性がある。
- (3) アダムス・ストークス発作：出力停止又はペーシング不全により心停止状態が数秒間以上持続するために卒倒することがある。卒倒が原因になり二次的な被害が発生する恐れがある。
- (4) MRI 検査に伴う有害事象：ペーシング不全及びセンシング不全（リード発熱による電極付近の組織損傷による）、ポケットの組織損傷（CIEDs の発熱による）、VT/VF 及び AT/AF（競合ペーシング及び誘導電流のセンシングによる）、循環虚脱
- 4) その他の有害事象
- 心室頻拍・心室細動の検出不全、心室頻拍・心室細動の停止不能、心室不整脈が発生していないときの治療出力による心室頻拍・心室細動の誘発、不適切な除細動ショック、心室不整脈の促進、除細動ショック発生後のペーシング不全、収縮性心膜炎、疼痛、電極部の組織ないし筋肉の熱傷及び損傷、ペースメーカー起因性不整脈、横隔膜刺激、横膈神経刺激、大胸筋攣縮（トゥイッチング）、不快感、生体反応（アレルギー等）、線維化組織形成、刺激閾値の上昇、ペースメーカー症候群、皮膚腐爛、皮膚のただれ・発赤、血液浸出、圧迫壊死、体液滞留、足首や手のはれ、血栓症、血腫、空気塞栓、気胸、感染

【保管方法及び有効期間等】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

- 保管方法
 - 本品は 5℃～30℃の環境で保管すること。短期的には -10℃～45℃での保管が可能である。
 - 本品に衝撃を与えないこと。
 - 本品は、マグネットや電磁干渉 (EMI) 源から離れた場所に保管すること。
- 有効期間
 - ラベルに表示された使用期限内に使用すること。

【承認条件】

- 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施者基準を設け、安全性を確保できる施設及び本品に関する十分な知識を有する医療従事者により本品の使用及び MRI 検査が行われるよう、適切な措置を講ずること。
- MRI 検査を行うための条件について、医療従事者に対する研修及び患者に対する教育を徹底し、十分なサポート体制を構築し、安全性の確保に努めること。

【主要文献及び文献請求先】

- 主要文献
 - 日本循環器学会／日本不整脈心電学会合同ガイドライン：不整脈非薬物治療ガイドライン（2018 年改訂版）。
 - 厚生労働省医薬食品局：盗難防止装置等による電波の医用機器への影響。医薬品・医療用具等安全性情報 No.203, 2004。
 - 厚生労働省医薬食品局：UHF 帯 RFID 機器及び新方式携帯電話端末の心臓ペースメーカー等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について。医薬品・医療機器等安全性情報 No.237, 2007。
 - 厚生労働省医薬局：IH 式電気炊飯器等による植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器及び脳・脊髄電気刺激装置（ペースメーカー等）への影響について。医薬品・医療用具等安全性情報 No.185, 2003。
 - 厚生労働省医薬食品局：使用上の注意の改訂について（その 175）植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器（いわゆるスマートキーシステムとの相互作用）。医薬品・医療機器等安全性情報 No. 224, 2006。

- 厚生労働省医薬局：ワイヤレスカードシステム等から発射される電波による植込み型の医用機器（心臓ペースメーカー及び除細動器）への影響について。医薬品・医療用具等安全性情報 No.190, 2003。
- 厚生労働省医薬食品局：X 線 CT 装置等が植込み型心臓ペースメーカー等へ及ぼす影響について。医薬品・医療機器等安全性情報 No.221, 2006。
- 厚生労働省医薬食品局：使用上の注意の改訂について（その 210）植込み型除細動器（X 線診断装置等との相互作用）。医薬品・医療機器等安全性情報 No.263, 2009。
- 総務省：各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針。平成 28 年 11 月。
- 厚生労働省医薬食品局：使用上の注意の改訂について（その 191）塩酸アミオダロン（経口剤）、塩酸アミオダロン（注射剤）。医薬品・医療機器等安全性情報 No.241, 2007

2. 文献請求先

バイオトロンニックジャパン株式会社
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19
恵比寿ビジネスタワー
TEL (03) 3473-7485

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： バイオトロンニックジャパン株式会社

外国製造業者： バイオトロンニック欧州合資会社
(BIOTRONIK SE & Co. KG)
ドイツ連邦共和国