

I E C G 接続ケーブル C I Y

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- ※・高圧酸素患者治療装置内で使用しないでください。
「爆発または火災を引き起こす恐れがあります。」「相互作用の項参照」
- ※・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。
「MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。」「相互作用の項参照」


使用方法

- ※・可燃性麻醉ガスおよび高濃度酸素雰囲気内では絶対に使用しないでください。
「爆発または火災を引き起こす恐れがあります。」

【形状・構造及び原理等】


※構造

CIY-06CRN5、CIY-06CRN10

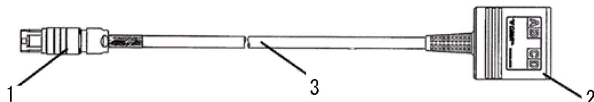

番号	名称	番号	名称
1	EPS ユニット接続部	3	ケーブル部
2	信号接続部	—	—

CIY-07CRC0.2

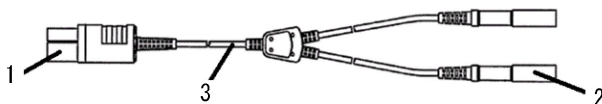

番号	名称	番号	名称
1	信号接続部	3	ケーブル部
2	コネクタ部	—	—

種類

番号	型式	備考
1	CIY-06CRN5	ケーブル長：5m
2	CIY-06CRN10	ケーブル長：10m
3	CIY-07CRC0.2	ケーブル長：0.2m

動作保証条件

次の条件を満たしている環境下で使用してください。
温度：10～35℃
湿度：30～75%（結露しないこと）

作動・動作原理

本装置は、CIY-06CRN5、もしくは CIY-06CRN10 と、CIY-07CRC0.2 を接続することで、心内心電図アンブー心臓電気刺激装置間の電気信号を伝達する導体である。

【使用目的又は効果】

使用目的

本装置は、心臓電気刺激装置と、指定する心内心電図アンブ間の信号を中継するケーブルである。

【使用方法等】

※準備

1. CIY-06CRN5、もしくは CIY-06CRN10 の信号接続部と、CIY-07CRC0.2 の信号接続部を接続します。
- ※2. CIY-06CRN5、もしくは CIY-06CRN10 の EPS ユニット接続部を EPS メインユニットに接続します。
3. CIY-07CRC0.2 のコネクタ部（赤・黒）を、それぞれ心臓電気刺激装置の信号出力部に接続します。

※組み合わせて使用する医療機器

※本装置には、以下に示す心臓カテーテル用検査装置、および相当品が接続できます。

一般的名称（販売名）	医療機器承認番号	製造販売業者
心臓カテーテル用検査装置（FCL-2000 ポリグラフシステム）	22600BZX00348000	フクダ電子株式会社

【使用上の注意】

※詳しくは本装置を接続する「FCL-2000 ポリグラフシステム」の取扱説明書をご覧ください。

重要な基本的注意

- ・水のかかる場所、ネブライザや加湿器からの加湿空気が直接本装置にかかる場所では使用しないでください。
- ・本装置および患者に異常が無いことを絶えず監視してください。
- ・指定の機器以外、接続しないでください。
「本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。」
- ※・ケーブルを折ったり、曲げたり、束ねたり、重いものを乗せたり、はさみ込んだり、加熱や加工しないでください。
「ケーブルが損傷し、感電や火災、故障の原因となることがあります。」

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
*高圧酸素患者治療装置	使用禁止	*爆発または火災を引き起こす恐れがあります。
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	使用禁止	*MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

併用注意（併用に注意すること）

1. 複数の ME 機器との併用
複数の ME 機器を併用するときは、機器間に電位差が生じないように等電位化接地をしてください。
「筐体間にわずかでも電位差があると、患者および操作者が電撃を受けることがあります。」

取扱説明書を必ずご参照ください。

2. 除細動器

除細動を行うときは、患者に装着した電極およびトランスデューサのコードや中継コードが装置に確実に接続されていることを確認してください。

〔はずれているコードの金属部に触ると放電エネルギーによる電撃を受けることがあります。〕

3. 電気メス

電気メスを併用する場合は、電気メスの対極板の全面積を適切に装着してください。

〔装着が不適切な場合、電気メスの電流が本装置に接続された電極カテーテルに流れ、心内に熱傷を生じます。詳細は電気メスの取扱説明書の指示に従ってください。〕

4. 高周波心筋焼灼器（アブレーション装置）

アブレーション装置を併用する場合は、アブレーション装置の対極板の全面積を適切に装着してください。

〔装着が不適切な場合、アブレーション装置の電流が本装置に接続された電極カテーテルに流れ、心内心電図への雑音混入の原因になります。詳細はアブレーション装置の取扱説明書の指示に従ってください。〕

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所に保管しないでください。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、および硫黄分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所、水のかからない場所、傾斜、振動、または衝撃（運搬時を含む）などのない場所に保管してください。
- ・次の条件を満たしている環境下で保管してください。
温度：-10～50℃
湿度：20～90%（ただし結露しないこと）

耐用期間

2年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

※詳しくは「FCL-2000 ポリグラフシステム」の取扱説明書をご覧ください。

※使用者による保守点検事項

※日常点検

※日常点検は、「FCL-2000 ポリグラフシステム」の取扱説明書の日常点検表に従って毎日行ってください。

※業者による保守点検事項

※定期点検

※定期点検は、故障や事故を未然に防ぎ、安全性、有効性を維持するために不可欠な作業です。1年に一度行う必要がありますので、詳しくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

電話番号：03-3815-2121(代)