

アキュローデ G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）


- ・新生児および低出生体重児へ使用しないでください。
[本製品は、新生児および低出生体重児にはサイズが対応していないことから電極同士が重なる恐れがあるため、使用できません。]

使用方法

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構成品と種類

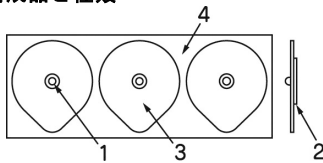

No.	名称
1	ホック
2	電解質
3	基材
4	ライナー

種類

型式 (全て X 線透過型)	基材
COL-ECGE-ACGF	フォーム
COL-ECGE-ACG	不織布

型式末尾に包装形態を表す記号が入ることがあります。

作動・動作原理

体表に設置し、体表の電気信号を心電波形処理装置（心臓の活動電位（1mV 程度の微弱な電圧）を波形グラフで表示する）に伝達する導体です。この活動電位を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）です。

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は体表に設置し、体表の電気信号を心電計や生体情報モニタなどに伝達する導体です。
本製品は単回使用です。

【使用方法等】

1. ECG モニタリングおよび検査手順に従って、電極の貼付部位を選択し、皮膚の前処理をしてください。
2. 皮膚の前処理は、電極の貼付部を清潔にし乾燥させ、脂分を取り除いてください。体毛が多く濃いまたはカールしていると、電極の貼付の妨げになりますので、除毛してください。
3. 本製品の包装をあけ、電極を取り出します。

**4. ライナーから電極を剥がし、前処理した皮膚上にのせて、粘着テープにしろがよらないよう指で上から円を描くように押さえて肌に密着させます。その際、貼付部位の皮膚がなるべく伸びた状態になるよう、仰向け等の姿勢で電極を貼付してください。また、貼付時には中心部を強く押さないように注意してください。

5. 患者に電極を貼付した後、リード線を電極に接続します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

**・検査前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。

**・指定された製品以外、接続しないでください。指定の製品については、接続する製品の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。[正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあります。]

- ・除細動を行うときは、装着した電極から離れた箇所に除細動器のパドルを当ててください。除細動器のパドルが電極に触れると、放電エネルギーにより熱傷が起こります。
 - ・皮膚障害のある部位への装着は行わないでください。
 - ・使用中、皮膚に発赤、腫れなどの症状が現れたときは使用を中止してください。
 - ・皮膚処理後は、皮膚が乾燥していることを確認して、電極を貼ってください。[電極はがれの原因となります。]
 - ・万が一、誤飲すると体内で滞留する可能性があるため、取り扱いに注意してください。
 - ・本製品にて長時間測定する場合、患者コード類が患者の体の下に配置されないようにしてください。
 - ・長時間測定する場合、誘導コード、電極等が押さえつけられ、患者を圧迫していることが無いことを適宜確認してください。[血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。]
 - ・使用する際は、アルミ包装に記載されている使用期限を確認してください。
 - ・アルミ包装を開封した後は、ゲルが乾燥しやすいので早めに使用してください。
- **・電極を剥がす際は、皮膚の損傷を最小限に抑えるために、電極の端よりゆっくりと剥がしてください。[皮膚の痛みや剥離等を生じる恐れがあります。]
- ・他の型式の電極と一緒に使用すると、安定した波形を得られないことがあります。
 - ・本製品は、滅菌できません。

*  MR Conditional

本製品は非臨床試験によって MR Conditional であることが示されています。本製品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することができます。[自己認証（当社データ）による]

静磁場強度	1.5 T 又は 3.0 T
静磁場強度の勾配	128 T/m 以下
MR 装置が示す全身最大 SAR	2.0 W/kg 以下（通常操作モード）

*上記条件で 15 分のスキャン時間において本製品に生じる最大の温度上昇は 2.1℃（背景温度上昇 1.6℃）以下です。

*3.0 T の MR 装置使用時、グラディエントエコー法による撮像で生じるアーチファクトは本製品の実像から 1.5mm です。[指定外の条件で MR 検査を行った場合、磁気共鳴画像診断装置（MR 装置）への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]

***その他の注意**

- * 本製品は未開封状態で 65℃もしくは-30℃の環境に 72 時間曝されても品質を維持することを確認していますが、品質劣化を防ぐために当文書に記載の保管方法を守って保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所を避けて、涼しい場所に保管してください。
- ・特に湿度、塩分、硫黄分の多い雰囲気には放置しないでください。
- ・アルミ包装を開封した後は、残りの電極が空気に触れて乾燥しないよう、ジッパー部を確実にしめて保管してください。

****** 保管温度：-10～40℃

使用期限

アルミ包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社

****** 電話番号：03-5802-6600（お客様窓口）

***販売業者の連絡先**

- *フクダコーリン株式会社
- *カスタマーサポートセンター
- *電話番号：0120-088-203