

機械器具 12 理学診療用器具
管理医療機器 汎用超音波画像診断装置 40761000

特定保守管理医療機器 **FFソニック UF-4000**

【警告】

- ・可燃性麻酔ガスなどを使用している場所に設置しないでください。
[爆発や火災の恐れがあります。]
- ・接地コードは、ガス管に接続しないでください。
[爆発の恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

- ・眼球には使用しないでください。
[超音波出力により、眼球を損傷する恐れがあります。]

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本装置は、以下のユニットにより構成されます。

- (1) 診断装置本体
- (2) 付属品
- (3) 超音波用プローブ (オプション)
- (4) 周辺機器 (オプション)

装置の詳細な構成は装置付属の取扱説明書の「操作の前に」を参照してください。

2. 各部の名称

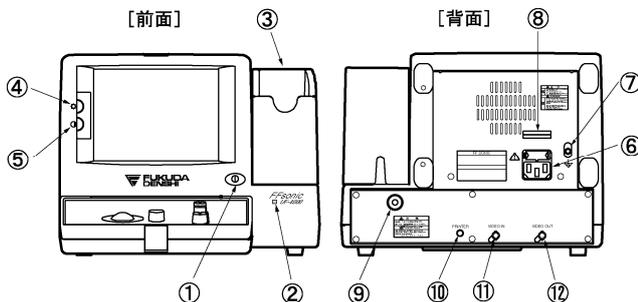

- | | |
|-----------------|------------------|
| ①POWER スイッチ | ⑥電源コード用接栓 |
| ②POWER LED | ⑦等電位化端子 |
| ③プローブホルダ | ⑧ヒューズホルダ |
| ④BRIGHTNESS ツマミ | ⑨内蔵プローブ |
| ⑤CONTRAST ツマミ | ⑩PRINTER 用リモート接栓 |
| | ⑪VIDEO IN 接栓 |
| | ⑫VIDEO OUT 接栓 |

3. 電氣的定格

定格電圧	AC100V, 50/60Hz
電源入力	約 85VA
電撃に対する保護の形式	クラス I
電撃に対する保護の程度	使用するプローブによる

4. 本体寸法及び質量

寸法(mm)	332(W)×496(D)×260(H)
質量	約 10kg

<付属品>

1. 医療機器

名 称	型 式	承認番号
3.5MHz 96mm リニアプローブ	FUT-L101	20200BZZ01239000
7.5MHz 38mm リニアプローブ	FUT-L106	20200BZZ01239000
3.5MHz R60 コンベックスプローブ	FUT-C111A	20900BZZ00399000
5.0MHz R12 経腔コンベックスプローブ	FUT-TV35-5	20200BZZ01239000
5.0MHz R15 経腔コンベックスプローブ	FUT-TV36-5	20200BZZ01239000

2. 非医療機器

- ・電源コード CS-20
- ・接地コード CE-12
- ・UF クリアゲル OJ-20
- ・プローブホルダ
- ・ケーブルハンガー
- ・予備ヒューズ 239 003
- ・オメガリング OLS-115
- ・取扱説明書
- ・コネクタキット1 UF-4000-CK1
- ・トrolley (台車) OT-104
- ・ビデオプリンター
- ・ビデオテープレコーダー

<作動・動作原理>

本装置はリニア走査及びコンベックス走査方式をもつ汎用超音波診断装置です。

1. 動作モード

- (1) Bモード
超音波を走査し、2次元の画像として表示します。
- (2) Mモード
超音波の方向を同一にし、その反射波の時間変化として表示します。

2. 超音波画像表示部

- (1) リニア走査
多数 (n 個) 振動子を直線上に並べ、その内の m 個 (n>m) の振動子から超音波パルスを生体内へ送信し、反射された超音波エコーを一定時間受信し、その間のエコーの振幅の強弱として表示画面の一本の線上に表示します。順次送信する方向を変えて同様のことを行います。
- (2) コンベックス走査
凸状に振動子を配列し、リニア走査と同様に走査します。

3. 超音波ビームの収束方法

- (1) 送信ビームの電子フォーカス
探触子内の複数の振動子を、それぞれ異なったタイミングで駆動することにより実現します。
- (2) 受信ビームの電子フォーカス
探触子内の複数の振動子で感知した信号を、それぞれ異なった時間遅延して加算することにより実現します。
- (3) 音響レンズ
生体と異なる音響インピーダンスの材料で、レンズの形状を形成することにより実現します。

4. 画像処理方法

表示画面を1フレーム毎の相関により処理します。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的、効能又は効果】

<使用目的>

本装置は、腹部・産婦人科領域の診断を主体として、胸部、循環器等領域の断面画像をリアルタイムで観察することのできる汎用超音波装置です。

【品目仕様等】

<仕様>

動作モード	Bモード、B/Mモード、Mモード									
走査方式	電子走査									
超音波ビーム	音響レンズと電子フォーカスの併用									
探触子の種類	電子コイル、電子コイルボックス、電子マイクロコイルボックス									
探触子の適用部位	胸部、腹部、産婦人科									
性能 総合感度	80dB以上（1MHz以上 7.5MHz以下） 60dB以上（7.5MHzを超える場合）									
分解能	<table border="1"><thead><tr><th>モード</th><th>距離</th><th>方位</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bモード</td><td>2mm以下</td><td>3mm以下</td></tr><tr><td>Mモード</td><td>2mm以下</td><td>7mm以下</td></tr></tbody></table>	モード	距離	方位	Bモード	2mm以下	3mm以下	Mモード	2mm以下	7mm以下
モード	距離	方位								
Bモード	2mm以下	3mm以下								
Mモード	2mm以下	7mm以下								
超音波周波数	送信周波数に対して±20%以内									
超音波出力	Ispta 94 (mW/cm ²) 以下 Isppa 190 (W/cm ²) 以下									
距離計測精度	計測距離 1cm以上5cm以下 ±5%以内 (Bモード) 計測距離5cmを超える場合 ±2.5%以内									
計測項目	一般計測、産科計測、循環器計測									

【操作方法又は使用方法等】

- 組立て・据え付け
移動・設置方法の詳細については、FF ソニック UF-4000 取扱説明書の「使用前の準備」を参照してください。
- 操作手順
 - 電源コード、等電位化線を接続します。
 - プローブを装着します。
 - キーボードを開き、正面にある POWER スイッチを押して電源を入れます。
 - 電源が入ると、正面の POWER LED（緑）が点灯します。
 - モニタ画面にメッセージが表示されます。続いて自己診断が行われ、問題がなければ正常動作状態になります。
 - 周辺装置の電源を入れます。
 - 取扱説明書に従い、診断画像を出します。
 - POWER スイッチを押して電源を切ります。

その他詳細は、FF ソニック UF-4000 取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

次の注意事項を熟読され、機器を正しくお使いください。

- 機器の取扱いには、その機器の操作を十分に熟知してからご使用ください。
- 機器の設置と保管場所は、次の事項に注意してください。
 - 水のかからない場所に設置、保管してください。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置、保管してください。
 - 傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意してください。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置、保管しないでください。
 - 電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意してください。
 - 付属の電源コードを使用して、確実に医用接地極付きの3ピンコンセントに接続してください。
- 機器を使用する前には、次の事項に注意してください。
 - スイッチの接触状況、極性、ダイヤル設定などの点検を行い、機器が正確に作動する事を確認してください。
 - アースが完全に接続されている事を確認してください。
 - すべてのコードの接続が正確で、かつ、完全であることを確認してください。
 - 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがあるので十分注意してください。
 - 患者に直接接続する外部回路を再点検してください。

- 機器の使用中は、次の事項に注意してください。
 - ①診断、治療に必要な時間、量をこえないように注意してください。
 - ②機器全般及び患者に異常がないことを絶えず監視してください。
 - ③機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなどの適切な処置を講じてください。
 - ④機器に患者が触れる事のないよう注意してください。
- 機器の使用後は次の事項に注意してください。
 - ①定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ってください。
 - ②コード類のとりはずしに際しては、コードを持って引き抜くなど、無理な力をかけないでください。
 - ③付属品、コード、接続端子などは洗浄したのち、整理してまとめてください。
 - ④機器は次回の使用に支障のないよう必ず清掃してください。
- 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、弊社までご連絡ください。
- 機器は改造しないでください。
- 保守・点検
 - ①機器及び部品は必ず定期点検を行ってください。
 - ②しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<保管方法>

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

- (1) 周囲温度：-10～60℃
- (2) 相対湿度：30～95%（結露なきこと）

<使用期間>

耐用期間 6年[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

点検方法については、UF-4000 取扱説明書「11. 保守・点検」を参照してください。

<定期点検>

定期点検は各医療機関で実施されるか、又は「保守点検契約」を結ぶことにより当社の販売会社、営業所あるいは第三者にて業務を代行することができます。詳しくは最寄りの販売会社、営業所までお問い合わせください。

点検時期	点検内容
1年毎	バックアップ電池の交換

【包装】

1台単位で梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

電話番号：03-3815-2121（代）

製造業者

フクダ電子株式会社