

機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
管理医療機器 血圧脈波検査装置 70045000 (多機能心電計 11407020)

特定保守管理医療機器 **バセラ VS-1500シリーズ**
VS-1500E VS-1500N*

【警告】

- ・麻酔薬、酸素、水素など可燃性および引火性の気体・液体を使用する
ところでは使用しないでください。
[爆発または火災を引き起こす恐れがあります。]
- ・可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内では絶対に使用しないで
ください。
[爆発または火災を引き起こす恐れがあります。]
- ・高血圧酸素治療用タンク内では絶対に使用しないでください。
[爆発または火災を引き起こす恐れがあります。]
- ・MRI 検査を行うときは、本装置から患者に接続されている電極およびト
ランスジュサ類を取り外してください。
[誘導起電力による局所的な発熱で患者(被検者)に熱傷を負わせる恐
れがあります。]

【禁忌・禁止】

【原則禁忌】(次の患者には適用しないことを原則とするが、特に必要と
する場合には慎重に適用してください。)



- ・上腕にむくみがあったり、出血傾向がある場合。
- ・血液のうっ帯が血栓を作る可能性がある場合。
- ・血液のうっ帯が末梢循環障害を生じる可能性がある場合。
- ・人工透析シャントがある腕での測定。

【形状・構造及び原理等】

＜機種構成＞*

型式	血圧脈波検査	標準 12 誘導心電図検査
VS-1500E	あり	あり
VS-1500N	あり	なし

VS-1500N に心電パッケージ VSC-150 (標準 12 誘導心電図検査ソフト
ウェア)を搭載することで、標準 12 誘導心電図検査が可能となります。

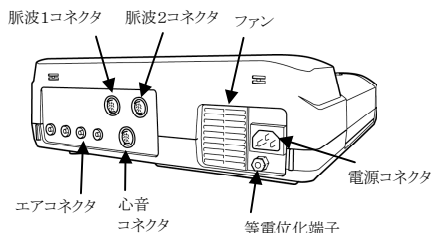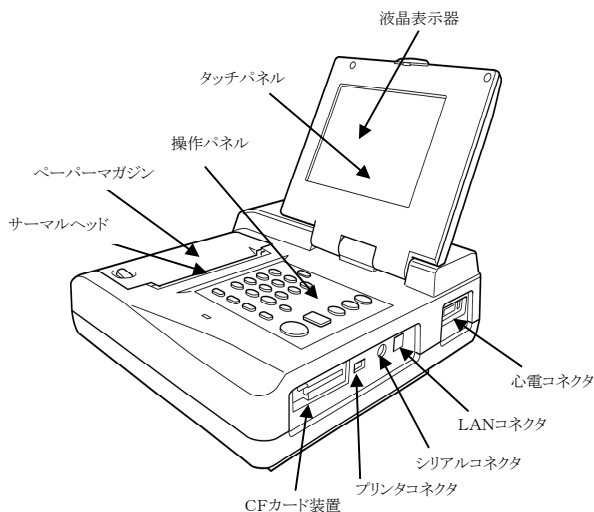

外形寸法:

340 mm (W) × 342 mm (D) × 109 mm (H) (LCD 閉時)

340 mm (W) × 342 mm (D) × 314 mm (H) (LCD 開時)

質量：約8kg

＜機器の分類＞

保護の形式による分類	: クラス I 機器
保護の程度による装着部の分類	: 非観血血圧部 CF 形装着部
	: 心電入力部 CF 形装着部
	: 心音入力部 CF 形装着部
	: 脈波入力部 CF 形装着部

＜電気的定格＞

定格電圧	: AC100V
周波数	: 50/60Hz
電源入力	: 120VA

＜作動・動作原理＞

血圧脈波検査

- ・本装置は、オシロメトリック法により四肢に巻いたカフを用いて血圧
を計測し、カフの加圧によりカフ容積脈波を計測します。心電図は、
体表面に装着した心電図用電極と誘導コードにより入力された信号
を増幅し表示又は記録します。心音は、心音マイクにより計測し
ます。脈波は、脈波センサにより計測し、表示又は記録します。こ
れらのアナログ信号は、A/D 変換器によりデジタル化され、マイクロ
コンピュータ (CPU) により処理され、脈波伝搬速度 (PWV)、各種学
説から計算される各種心足首血管指数 CAVI が計測されます。

心電図検査

- ・本装置は標準 12 誘導の心電図を計測記録すると共にマイクロコ
ンピュータによって心電図を解析する装置で、心電入力部、心電
波形処理部、心電計コントロール及び解析処理部により構成され
ています。
- ・心電信号は従来と同様に心臓の活動電位 (1mV 程度の微弱な電
圧) を体表面につけた電極より誘導コードを通して入力されます。こ
の活動電位は差動増幅器を通り、同相信号を十分除去し増幅され
ます。
- ・増幅器で心電図の解析処理に必要な一定のレベルまで増幅され
た心電信号は、A/D 変換器に入ります。ここで、アナログ信号はデ
ジタル信号に変換されます。デジタル化された信号は心電計部で
自動的に基線と感度を調整されます。またデジタル化された信号
は、解析処理部で始め入力された各誘導部位のデータから期外収
縮、基線動揺などを含まない最良の心拍 (ドミナント波形) を選び波
形認識を行います。次にメモリにあらかじめ記憶されている解析プ
ログラムの基準値を基に、計測データの解析を行います。さらにそ
の解析結果は記録部へ送出されます。
- ・CPU は各部の自動機能を動作させたり、心電図の測定解析、記録
部の動作開始、終了を制御します。また測定中に電極はずれ、紙
切れなどの異常が発生した時、それを自動検出し、警報で知らせ
る機能を持っています。

＜付属品＞

付属品の詳細は VS-1500 シリーズの取扱説明書をご覧ください。

【使用目的、効能又は効果】

＜使用目的＞

血圧脈波検査

本装置は、四肢の非観血血圧を計測し、心電図、心音図、頸動脈脈
波図、股動脈脈波図、四肢の脈波図を同時に採取することにより、患
者の動脈の伸展性及び下肢血管の血流障害の程度を検査することを
目的とします。

心電図検査

本装置は、診療所、病院等で心電図及び解析結果等を記録して、心
臓疾患のスクリーニング等、一般の心電図検査等に使用することを目
的とする。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【品目仕様等】

項 目	仕 様
カフ内圧力表示の誤差	±3mmHg 以内
漏えい	6mmHg/min 以下
急速排気	260mmHg から 15mmHg に急速排気するために要する時間は 10 秒以下
最大圧力	カフ内最大圧力 300mmHg
PWV 計測用 心音フィルタ特性	165Hz：-3dB 以内 280Hz：-3dB 以内
心音フィルタ L 特性	30Hz：-6dB 50Hz：-3dB 80Hz：-1dB 許容差±3dB 以内
脈波1, 脈波2 周波数特性	0.5 Hz：90%～105%以内 20Hz：71%～105%以内
脈波1, 脈波2 過渡特性	2秒後の振れが 37%以上
誘導の極性	IEC 60601-2-51 51.101.1 要求事項を満たす。
誘導選択器／誘導選択	誘導ネットワーク：5%以下 復帰時間：2 秒以内
入力インピーダンス	50MΩ 以上
校正電圧	IEC 60601-2-51 51.103.1 要求事項を満たす。
校正電圧の出力	5%未満
要求される感度	2.5、5、10、20mm/mV
感度の安定性	最大変化 3%以下
感度の精度	5%以下
同相信号の抑制	103dB 以上
過負荷許容電圧	1Vp-p
フィルタ リングノイズ	25 μV 以下
基線 位置調整	有効記録幅の 10%以内
基線 温度ドリフト	0.5mm/℃以下
基線 安定性	5 分以内にドリフト 5mm 未満
基線 雑音レベル	入力換算 30 μVp-p 以下
記録線速度及び記録線の太さ	スルースレート 3200mm/s が記録可能
多チャネル心電計のチャネル間干渉	0.5mmp-p 以下
周波数応答	IEC 60601-2-51 の 51.107.1 の要求事項を満たす。
直線性とゲインミッドレンジ	ダイナミックレンジ:5mV 直線性：有効記録幅で±5%未満
最小検知電圧	0.2mmp-p
データ収集中のサンプリング及び振幅の量子化	IEC 60601-2-51 の 51.107.4 の要求事項を満たす。
記録の識別	IEC 60601-2-51 の 51.108.1 の要求事項を満たす。
患者の識別	IEC 60601-2-51 の 51.108.2 の要求事項を満たす。
記録時間	IEC 60601-2-51 の 51.108.3 の要求事項を満たす。
記録紙の心電図記録	IEC 60601-2-51 51.108.4 要求事項を満たす。
ペースメーカの用心電図のひずみ	IEC 60601-2-51 51.109.1 要求事項を満たす
ペースメーカパルスの可視	IEC 60601-2-51 51.109.2 要求事項を満たす

【操作方法又は使用方法等】

操作方法又は使用方法の詳細は取扱説明書を参照してください。

＜準備＞

1. 本装置に付属の3ピン電源コードを接続して、反対側を医用コンセントに接続します。
2. 本装置に誘導コード、ホース、心音マイク、脈波センサを接続し、誘導コードの先に心電電極、ホースの先にカフを接続します。
3. 本装置に記録紙をセットします。

＜血圧脈波検査＞

1. 電源を入れます。
2. ID、被検者氏名、性別、年齢、身長などの被検者情報を入力します。
3. カフ、心電電極、心音マイク、脈波センサを取付けます。

4. 波形が安定していることを確認後、スタートキーを押して測定を開始します。
5. 測定中に被検者が痛みなど身体の異常を訴えた場合は、ストップキーを押して検査を中止して下さい。
6. 測定終了後、測定結果が表示/印字されます。
7. 測定が全て終了していることを確認後、被検者から全ての電極、センサ類を外し、電源を切ってください。

＜標準12誘導心電図検査＞

1. 電源を入れます。
2. ID、被検者氏名、性別、年齢、身長などの被検者情報を入力します。
3. 電極を四肢及び胸部に取付けます。
4. 波形が安定していることを確認後、スタートキーを押して測定を開始します。
5. 測定終了後、測定結果が表示/印字されます。
6. 測定が全て終了していることを確認後、被検者から全ての電極類を外し、電源を切ってください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞＊

- 電源コードは交流 100V 医用コンセントに接続してください。
- カフのエアホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。
- ガス管を接地として利用しないでください。
- 誘導コードは必ず指定のコード（CP-104J,CPV-01AKP）を使用してください。
- 心音マイク、アモルファス脈波センサ、エアバッグ脈波センサは、必ず指定の物（MA-300、MA-300HDS(V)、TY-501A、TY-100、TY-101）を使用してください。
- 本装置の電極及び結合されたコネクタの導電部に接触しないでください。接触により、患者に危険がおこる恐れがあります。
- 本装置および他の電気器具、金属などに患者が触れないようにしてください。
- 被検者および機器に異常がないことを絶えず監視し、異常が発見された場合は、ただちに被検者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。
- 検査中は被検者を安静状態に保ち、会話したり、カフを圧迫したり、叩いたり、手足を動かしたり、力を入れたりしないようにしてください。正しい計測値が得られなかったり、再加圧による計測時間が延長したりします。
- カフ装着部が心臓と異なる高さの場合、血圧値に誤差が生じます。
- 本装置の周囲に限度を超えた強い電磁波や磁界、静電気などが存在すると、波形に雑音が混入したり、誤動作を起こすことがあります。VS-1500 シリーズ取扱説明書の「EMC に対するガイダンス」に記載の推奨分離距離を保って設置してください。
- 通風口はふさがらないでください。
- 強い衝撃、振動を与えたり、落下させないでください。
- 液晶表示器上に強い衝撃を与えないでください。
- 水のかかる場所で使用、保管しないでください。
- 本装置を分解または改造しないでください。
- 本装置および付属品を廃棄する際は、専門業者に委託してください

＜相互作用＞（併用禁忌・禁止）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
可燃性および引火性の気体・液体を使用するところ	使用禁止	爆発または火災を引き起こす恐れがあります。
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内	使用禁止	爆発または火災を引き起こす恐れがあります。
高気圧酸素治療用タンク	使用禁止	爆発または火災を引き起こす恐れがあります。
磁気共鳴画像診断装置(MRI)	MRI 検査を行うときは、本装置から患者に接続されている電極およびトランスジューサ類を取り外してください。	誘導起電力による局部的な発熱で患者（被検者）に熱傷を負わせる恐れがあります。

＜相互作用＞（併用注意）

- 本装置を高周波外科手術装置（電気メス）と併用する際には、対極板を適切に装着してください。
[装置が不適切な場合、電極貼付部に熱傷を負わせる恐れがあります。]
- 本装置を除細動器と併用する際には、必ず付属の誘導コード（CPV-01AKP, CP-104J）を使用してください。
[装置の破損および安全性が保てないことがあります。]
- 除細動中は本装置に触れないでください。
- 本装置を安全にお使いいただくために、また本装置の性能を十分に発揮させるために、当社指定外の機器を本装置に接続しないでください。
- 本装置と他の機器と併用する場合は、機器間に電位差が生じないように等電位化接続をしてください。
- いくつかの機器の電源コードが同じコンセントに接続されている場合には、その機器の漏れ電流の増加にともなって、患者に危険がおこる恐れがあります。
- 本装置に接続する装置（プリンタ、イーサネットハブ、マスタ台、カードリーダーなど）は、必ず当社指定の装置、接続方法で使用してください。
- 機器に接続するコードやケーブルは、弊社の指定品を使用してください。
- ネットワークへ接続する機器は、患者環境外（JIS T0601-1-1:2005）に設置してください。
- ネットワークの設定／接続は、当社と打ち合わせの上、当社指定の方法で使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜保管方法＞

- 水のかからない場所に設置、保管してください。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置、保管してください。
- 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意してください。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置、保管しないでください。
- 次の条件を満たしている環境内で保管してください。
温度：－10～60℃
湿度：10～95%（ただし結露しないこと）

＜使用期間＞*

- VS-1500E, VS-1500N
耐用期間：以下の保守点検を行った場合に限り6年
[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

＜日常点検＞*

日常点検は、日常点検記録表に従って毎日行ってください。
日常点検については、VS-1500 シリーズ取扱説明書「保守点検」「日常点検記録表」をご覧ください。

＜定期点検＞

定期点検は、医用電子機器の場合、故障や事故を未然に防ぎ、安全性・有効性を維持するために不可欠な作業です。3～4ヶ月に1度、コードや装置・付属品の損傷、動作状態をチェックしてください。また、すべてのラベルが確実に判読できることを確認してください。そして、これらの定期点検の記録を残してください。定期点検は、各医療機関で実施されるか、または、「保守点検契約」を結ぶことにより当社の販売会社、営業所あるいは第3者にて業務を代行することが可能です。詳しくは最寄りの販売会社、営業所までお問い合わせください。

【包装】

1台単位で梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号：03-3815-2121(代)

製造業者

フクダ電子株式会社