

特定保守管理医療機器

和温療法器

【警告】

適用対象（患者）

以下の患者への適用は、専門医の医学的知見を必要とします。

- ・植込み型電子装置（例えばペースメーカー）を装着した患者。

使用方法

- 1.本装置を使用する際は、必ず付属の取扱説明書に従い操作してください。
- 2.本装置は医師の管理下にて、操作方法を熟知した者が使用してください。
- 3.本装置に異常が発見された場合には、直ちに使用を中止して電源を切ってください。
- 4.本装置を長期間使用しない場合は、感電や火災の防止のために電源プラグをコンセントから取り外してください。

【禁忌・禁止】


適用対象（患者）

- 1.急性心筋梗塞
- 2.活動性の細菌感染症
- 3.重度の高血圧症〔代謝亢進により、心臓の負担増大が懸念されます。〕
- 4.妊婦や生理中の方
- 5.重症の貧血、紫斑病（出血性要因のある方）

【形状・構造及び原理等】

形状

CTW-5000

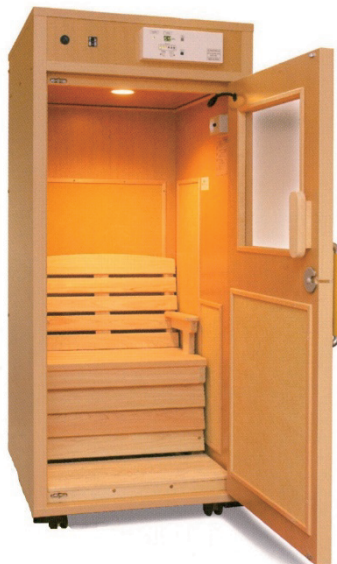

寸法： 1892(H) × 835(W) × 927(D) [mm]
(キャスター含む)
質量： 約 155kg

電氣的定格

- ・定格電圧 : AC100V
- ・周波数 : 50/60Hz
- ・電源入力 : 1300W
- ・保護の形式による分類 : クラスⅠ機器
- ・保護の程度による装着部の分類 : B形装着部

動作保証条件

周囲温度：10～35℃
湿度：25～65%（ただし結露しないこと）

作動・動作原理

本装置は患者が装置内部の座面に座り、背面、両側面、下面、前面に配置したパネルヒーターから体全体を包み込むように赤外線を与える。温度センサによって指定温度を維持するように制御する。

【使用目的又は効果】

温熱効果

【使用方法等】

準備

- 1.本装置の外部および室内に損傷がないか確認してください。
- 2.本装置の電源スイッチ（ブレーカ）が「OFF」になっていることを確認してから、本装置の電源プラグを商用電源 AC100V の医用コンセントに接続します。

操作方法

- 1.電源投入
電源スイッチを「ON」にしてください。電源が入り電源ランプが点灯していることを確認します。
- 2.呼び出しブザー動作確認
室内の呼び出しブザーボタンを押し、ブザーが鳴ることを確認してください。
- 3.温浴開始、温度設定
運転開始ボタンの押下により室内灯が点灯します。
温浴が開始されます。
温度設定ボタンで室内温度を設定します。
設定した温度の温度設定ランプが点灯したことを確認し（設定温度に到達したことを確認）、患者を入室させてください。
治療時間は15分以内です。
- 4.温浴終了
終了は運転停止ボタンを押します。患者を退室させます。

使用後

- 1.電源断
電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプ、室内灯が消灯します。

【使用上の注意】

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1.発熱した患者〔深部体温の上昇がより強くなる恐れがあるため〕
- 2.頻脈あるいは頻脈発作中の患者〔心拍数が増加するため〕
- 3.脱水状態時の患者〔発汗を伴うため脱水状態が悪化する恐れがあるため〕

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 4.閉塞性肥大型心筋症〔脱水の伴う循環血流量の減少や頰脈により悪化する恐れがあるため〕
- 5.重症大動脈弁狭窄症〔心拍出量の増加に伴い圧較差が増加する恐れがあるため〕

重要な基本的注意

詳しくは、取扱説明書を参照してください。
次の注意事項を熟知して、本装置を正しく使用してください。

- 1.本装置の取扱、操作を十分に熟知してから使用してください。
- 2.体重制限
座面への体重制限： 135kg
- 3.設置
(1)水のかからない場所に設置してください。
(2)気圧・温度・湿度・風通し・日光に留意し、ほこり・塩分・硫黄分などを含む空気等により、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置してください。
(3)傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意し、設置後キャスター（4 輪）をロックしてください。さらに付属品のアジャスターフットを装着し、水平に固定して、安定状態を確認してください。
(4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないでください。
(5)【形状・構造及び原理等】に記載の電氣的定格を満たした電源コンセントであることを確認してから設置してください。
- 4.使用する前の準備
(1)本装置が正常でまた安定に作動することを確認してください。
(2)コード類の接続が正確でまた完全であることを確認してください。
(3)他の機器との併用は、十分な治療効果が得られなくなる恐れがありますので十分注意してください。
- 5.使用中の注意
やけどの恐れがあるので、室内灯、ヒーター一面には触れないでください。
- 6.使用後の注意
やけどの恐れがあるので、消灯後 10 分以内に室内灯には触れないでください。
- 7.故障したときは、適切な表示を行い、最寄りの販売会社、営業所に連絡してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、水のかかる場所、ほこりの多い場所、塩分・硫黄分などを含む空気等による悪影響を受ける場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所、火気の近く、振動や衝撃の加わりやすい場所には保管しないでください。
- 2.次の条件を満たしている環境内で保管してください。
温度：0～40℃
湿度：10～75%（ただし結露しないこと）

耐用期間

以下の保守点検を行った場合に限り 6 年間。
〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

清掃・消毒の手順

- 1.電源を切って、電源プラグをコンセントから外します。
- 2.血液・薬剤・汚物などの汚れを水または中性洗剤で拭き取り、乾いた布でから拭きします。消毒液を浸したガーゼなどで拭いてください。

使用者による保守点検事項

日常点検を使用前に行ってください。詳細は、取扱説明書「5.メンテナンス」を参照してください。

業者による保守点検事項

定期点検を 1 年毎に行ってください。詳細は、取扱説明書「5.メンテナンス」を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社
電話番号： 03-3815-2121(代)

製造業者
** *テクノホライゾン株式会社 本社工場